



Suzu, тренажер-макет свиноматки для ИО



Новый подход к обучению методам искусственного осеменения

Suzu - искусственная свиноматка для обучения техников по искусственному осеменению. С ее помощью обеспечиваются удобные и надежные условия тренировки процесса искусственного осеменения, прежде чем техники по искусственному осеменению смогут работать с живыми животными.

Тренажер-макет состоит из пластикового корпуса и силиконовых внутренних элементов, которые составляют наиболее **реалистичный репродуктивный тракт (РТ)**. Данный репродуктивный тракт может быть извлечен для демонстрации анатомии и процесса искусственного осеменения на начальном этапе тренировки.

Репродуктивный тракт свиноматки Suzu оснащен шейкой матки, аналогичной естественной, что позволяет представить на практике фиксацию катетера для ИО в шейке матки. Звуковой сигнал подтверждает успех процедуры, когда введенный катетер достигает правильного положения в шейке матки. Кроме того, наличие отверстия, имитирующего отверстие уретры, позволяет практиковать правильное введение катетера, избегая его попадания в уретру. Также возможно „осеменение“ свиноматки Suzu, поскольку репродуктивный тракт имеет дренажное отверстие. С помощью репродуктивного тракта можно практиковать как **традиционное**, так и **пост-цервикальное искусственное осеменение**.

Тренажер-макет Suzu обеспечивает гибкость в выборе времени и места проведения учебных курсов по искусственному осеменению, а также снижает риск травмирования животных из-за действий неопытных техников. Кроме того, можно самостоятельно определять регулярность проведения тренировок. Все эти преимущества помогают обеспечить оптимальное обучение и, в конечном итоге, улучшить работу соискателей на должность техников по искусственному осеменению свиноматок.

Характеристики продукта

- Анатомически корректная модель свиноматки, включающая полный репродуктивный тракт и шейку матки, которые обеспечивают естественные ощущения во время обучения искусственному осеменению
- Модульный подход обеспечивает различные уровни подготовки для быстрого достижения успеха в обучении
- Естественное прохождение внутренней канюли катетера для ПЦИО благодаря выраженным подушечкам шейки матки
- Звуковой сигнал при правильном введении катетера для ИО
- Предупреждение неправильного введения катетера для ИО в уретру
- Возможность тренировки полного „реального“ процесса осеменения
- Компактная и легкая тренажерная модель для простой транспортировки и очистки



Повысьте эффективность Ваших занятий по искусственному осеменению и внесите свой вклад в улучшение благополучия животных!



Информация для заказа

Suzu, тренажер-макет свиноматки - с полным репродуктивным трактом для традиционного и ПЦ осеменения

АРТ.: 22400/0100


Сменные детали

(1) Внешняя часть с ректумом, вульвой и хвостом

АРТ.: 22400/0105

(2) Репродуктивный тракт для традиционного и пост-цервикального осеменения со звуковым сигналом, влагалищной трубкой и шейкой матки

АРТ.: 22400/0106

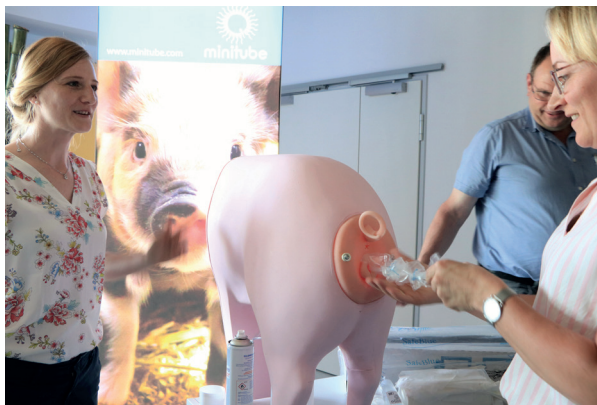

Стартовый набор включает

100 катетеров для ИО (АРТ. 17106/9176)
и 2 тьюбика ReproJelly (АРТ. 11907/0100)

