



QuickTip® Beutel für Ebersamen



Sichere Beutel-Technologie für Ebersamen

Ultimative Sicherheit

Minitube-Samenbeutel werden aus einer innovativen mehrschichtigen Kunststoffolie hergestellt und sind zu **100% spermensicher**.

Es ist die erste Kunststoffolie in der Herstellung von Samenbeuteln, die völlig frei von Klebstoff ist. In mehrschichtigen Kunststoffolien werden häufig Klebstoffe verwendet, um nicht kompatible Schichten zu einer Folie zu verbinden. Klebstoffe sind jedoch potenziell spermatoxisch, so dass Berichte von mangelhaften Samenbeuteln auf dem Markt vorliegen. Klebstoffe, die in das Innere dieser herkömmlichen Beutel entweichen, führten in der Vergangenheit bereits zu schwerwiegenden Fruchtbarkeitsproblemen. Deshalb bestehen die Beutel von Minitube aus einer innovativen Folie, bei der der Klebstoff durch eine absolut spermienfreundliche Schicht ersetzt wurde.

Gehen Sie auf Nummer sicher - verwenden Sie die völlig klebstofffreien Minitube-Samenbeutel!

- Jede Charge von Minitube-Samenbeuteln wird dem **Sperm Safe-Programm** unterzogen
- Materialien werden ausschließlich von zertifizierten deutschen Lieferanten bezogen und entsprechen den **FDA- und EU-Richtlinien**
- Alle Rohkomponenten-Chargen werden vor der Produktionsfreigabe Spermien-Toxizitätstests unterzogen
- Der Produktionsprozess garantiert eine lückenlose Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt von Minitube in eigener Produktionsstätte - die Produktion ist nach **ISO 9001: 2015** zertifiziert und wird regelmäßig von externen Stellen überprüft




ninitube ninitube




**100 %
spermensicher**


Standard-Samenbeutel

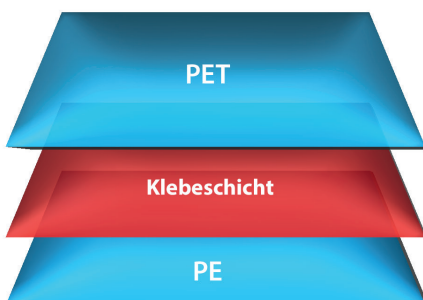

QuickTip®-Samenbeutel

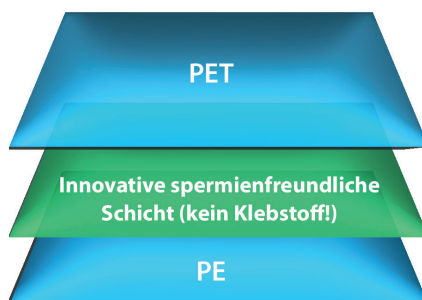

Struktur mehrschichtiger Kunststoffolien

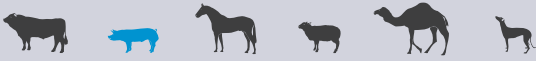


Benutzerfreundlich

Das bewährte **QuickTip®-System** garantiert dem Besamungstechniker eine einfache und schnelle Anwendung.

- Spitze bleibt bis zur Besamung sicher geschlossen
- Tube ist durch Abknicken der Spitze leicht und ohne Werkzeug zu öffnen und einfach mit jedem Katheter zu verbinden
- Spitze bleibt nach dem Öffnen im Beutel und gelangt nicht in die Gülle
- Geeignet für alle Katheter und Besamungstechniken
- Schnelle, einfache und hygienische Besamung

Minitube-Samenbeutel sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich. Sie sind mit allen gängigen Beutelabfüll- und Verschweißmaschinen kompatibel.

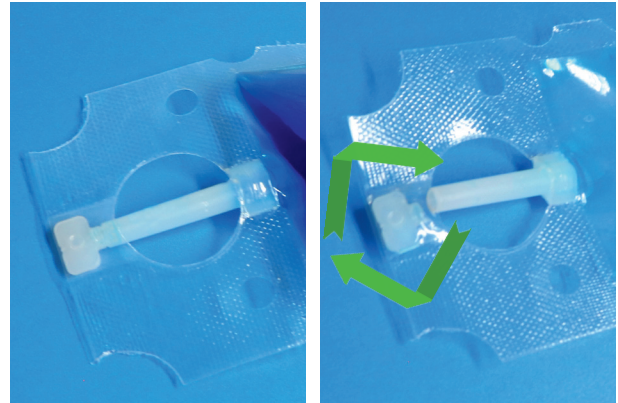

QuickTip®-System: einfach, schnell und sicher

Bestellinformation

QuickTip® Beutel für Ebersamen, Narrow Type (NT)	
Volumen bis 60 ml, 1000/Rolle [1]	13460/0060
Volumen bis 90 ml, 1000/Rolle [2]	13460/0090
Volumen bis 90 ml, mit Abrissperforation, 750/Rolle	13460/0190

QuickTip® Beutel für Ebersamen, Wide Type (WT)	
Volumen bis 60 ml, 1000/Rolle [3]	13460/1060
Volumen bis 90 ml, 1000/Rolle [4]	13460/1090
Volumen bis 90 ml, mit Abrissperforation, 750/Rolle	13460/1190



1 NT 60 ml



2 NT 90 ml



3 WT 60 ml



4 WT 90 ml

