



# Künstliche Besamung beim Rind



## QuickLock Besamungsgeräte

- Für alle Arten von Pailletten und Universalhüllen, geschlitzt oder ungeschlitzt
- Alle Teile aus sterilisierbarem Kunststoff oder Edelstahl
- Einzigartiges Design für eine sichere und zentrierte Ausrichtung der Pailletten; kein Sperma wird verschwendet
- Einfaches Fixieren und Lösen der Hülle mit einer Hand
- Identifikation durch verschiedenfarbige Mandrins
- Keine losen Teile; der Mandrin ist gegen Herausrutschen gesichert
- Separate Ausgabe der Paillette nach der Besamung zur besseren Kontrolle der Informationen

### QuickLock Classic

Einfaches Fixieren und Lösen der Hülle durch Knopfdruck.

QuickLock Classic [1] 17025/0000

### QuickLock 2000

- Ergonomisches Design
- Nur 1 cm der Hülle ist zur Fixierung nötig

QuickLock 2000 [2] 17026/0000


### QuickLock Ergo

- Ideal für ältere Kühe durch mehr Nutzfläche
- Kleinstmöglicher ergonomischer Griff
- Sehr einfach zu reinigen

QuickLock Ergo [3] 17024/0000

### QuickLock Mandrins

In verschiedenen Farben erhältlich.

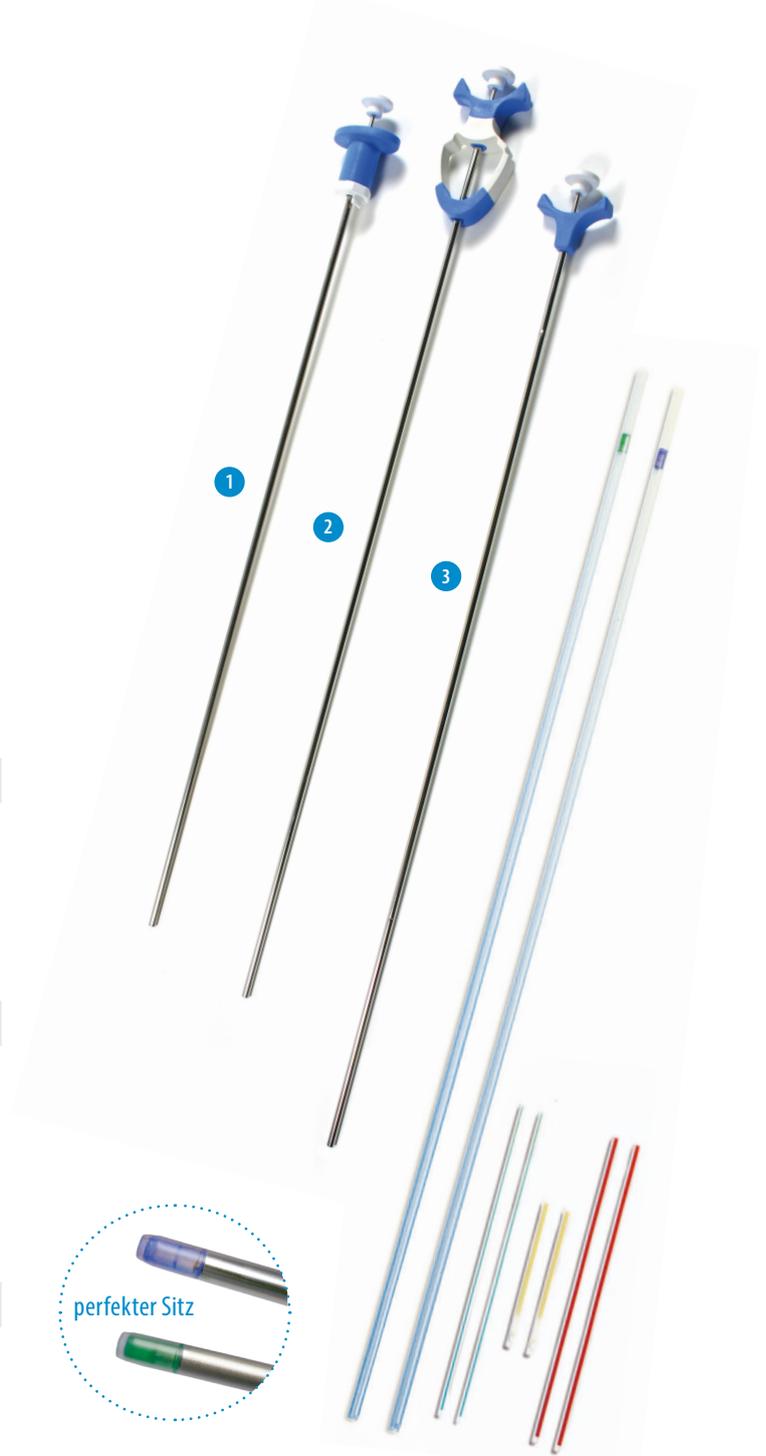




## Universalhüllen

- Absolut fester Sitz bei allen Arten von Pailletten
- Sanfte Besamung dank abgerundeter Spitze
- Transparente Adapter zur besseren visuellen Kontrolle der Paillettenposition
- Beutel mit Klebestreifen zum einfachen Wiederverschließen und -öffnen

Universalhülle geschlitzt, transparent-grün [1]	
50/Beutel	17007/0001
mit weichem Schutzüberzug, 50/Beutel	17007/0012
einzeln verpackt, 50/Beutel	17007/0014
Universalhülle ungeschlitzt, transparent-blau [2]	
50/Beutel	17007/0000
mit weichem Schutzüberzug, 50/Beutel	17007/0011
einzeln verpackt, 50/Beutel	17007/0013

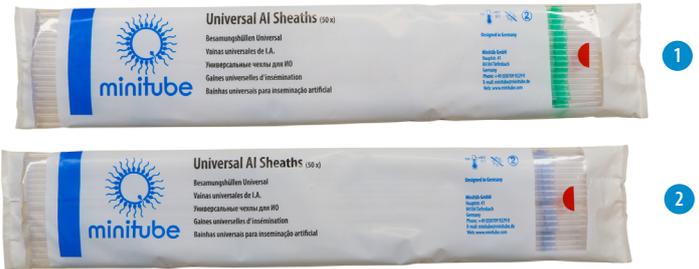

## QuickLock Vorwärmer 4.0

- Besamungs- und Embryotransfergeräte werden bei konstanter Temperatur transportiert
- Hält aufgetautes Sperma bzw. Embryonen bei optimaler Temperatur bis zur Besamung/zum Transfer
- Zieltemperatur im Inneren des Beutels ist frei einstellbar
- Powerbank als Stromquelle sorgt für Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Sehr robustes und leicht zu reinigendes Beutelmateriale
- Trageriemen ermöglichen verschiedene Trageweisen

QuickLock Vorwärmer 4.0	17028/0400
QuickLock Vorwärmer 4.0 mit Powerbank	17028/0401

### () Zubehör

Powerbank für QuickLock Vorwärmer 4.0	17028/0410
USB-Autoladegerät für Powerbank, für Bordspannungssteckdose 12-24 V	17048/0420
USB-Netzladegerät für Powerbank, 100-240 V	17048/0430
Innenbeutel für QuickLock Vorwärmer 4.0, 100/Packung	17028/0201

frei einstellbare Temperatur + flexible Energieversorgung durch Powerbank + sehr robust und leicht zu reinigen





## Auftaegerät MiniThaw

- Variable Temperatureinstellung von Umgebungstemperatur bis +50°C
- Digitale Anzeige der aktuellen Temperatur
- Gefrorene Pailletten brauchen nur etwa 30 Sek., um in der mit Wasser gefüllten Auftaukammer aufzutauen
- Der Lift hat drei Fächer und ermöglicht das gleichzeitige Auftauen von bis zu 10 Pailletten (0,5 ml oder 0,25 ml)
- Der geschlossene Deckel sitzt absolut dicht; keine Gefahr des Auslaufens
- Schlankes, leicht zu transportierendes Design; passt in den Becherhalter im Auto
- Einfach zu bedienen und robust genug für einen jahrelangen Einsatz
- Kann im Auto (12 V/24 V) oder an der Steckdose (110/230 V) betrieben werden

Auftaegerät MiniThaw [1] 17048/0000

### ( Zubehör

Transformer für Auftaegerät 12 V/110 V/220 V 17165/1395

Standfuß für MiniThaw, Metall [2] 17048/0005

Elektronischer Timer, magnetisch, inkl. Batterie [3] 17048/0006



schlankes Design + absolut dicht +  
leicht zu bedienen + schnelles und sicheres  
Auftauen der Pailletten + bequemes  
Transportieren und Laden

## MiniCutter

- Exaktes Schneiden von 0,25 und 0,5 ml Pailletten
- Ermöglicht einen geraden Schnitt in genau der richtigen Länge, um Spermienverlust zu vermeiden
- Ergonomische Form
- Einfach zu reinigen

MiniCutter für Pailletten 17062/0010





## Besamungskit

Inhalt: strapazierfähiger Koffer, MiniThaw, QuickLock 2000, 100 Universalhüllen, 80 KB-Schutzüberzüge, ReproJelly, Varikon Spekulum, 100 Besamungshandschuhe, MiniCutter, Pinzette und Kanisterklemme.

Besamungskit 17050/0070

### Alle Teile auch einzeln erhältlich:

Besamungskoffer 17050/0001

Auftaegerät MiniThaw (S. 3) 17048/0000

QuickLock 2000 (S. 1) 17026/0000

Universalhülle, ungeschlitzt, 50/Beutel (S. 2) 17007/0000

Schutzüberzug, 80/Rolle 17028/0100

ReproJelly, spermasicheres Gleitmittel, wasserlöslich, 100 ml Tube 11907/0100

Varikon Spekulum 17064/0380

Besamungshandschuh, sensitiv, grün, 5 Finger, schulterlang, 100/Karton 17080/0015

MiniCutter (S. 3) 17062/0010

Pinzette für Pailletten, abgewinkelt 17060/0000

Klemme 17063/0000



Alle KB-  
Produkte fürs  
Rind