



QuickTip® Bag, bolsa para semen porcino



Tecnología de bolsa, más segura para semen porcino

Máxima seguridad

Las bolsas de semen Minitube están hechas de una innovadora lámina de plástico multicapa y son **100% seguras para los espermatozoides**.

Es la primera lámina de plástico utilizada en la producción de bolsas de semen que está completamente libre de adhesivo. Los adhesivos se usan a menudo en láminas de plástico multicapa para combinar capas no compatibles en una lámina. Sin embargo, los adhesivos son potencialmente tóxicos para las células espermáticas y se han informado casos de bolsas de semen defectuosas. Los adhesivos que se filtran hacia el interior de estas bolsas defectuosas han producido graves problemas de fertilidad en el pasado. Las bolsas de Minitube están hechas de una lámina innovadora donde el adhesivo ha sido reemplazado por una capa completamente amigable para los espermatozoides.

Manténgase seguro: use las bolsas de semen Minitube completamente libres de adhesivos.

- Cada partida de bolsas de semen Minitube se somete al **programa Sperm Safe**
- Los materiales provienen exclusivamente de proveedores alemanes certificados y cumplen con las **directivas de la FDA y la UE**
- Todos los lotes de componentes de materias primas se someten a pruebas de toxicidad del semen antes del lanzamiento para producción
- El proceso de producción garantiza la trazabilidad total
- Elaboración por Minitube en las instalaciones de Minitube, producción certificada según **ISO 9001:2015** y auditada regularmente por entidades externas



100% seguras para los espermatozoides



estructura de láminas de plástico multicapa




Fácil de usar

El probado sistema **QuickTip®** garantiza una aplicación fácil y rápida para el técnico de IA.

- La punta se mantiene bien cerrada hasta la IA
- Fácil de abrir doblando la punta sin ninguna herramienta, fácil de conectar a cualquier catéter
- La punta permanece con la bolsa después de abrirse y no terminará en el estéril
- Apto para todos los catéteres y técnicas de inseminación
- Inseminación rápida, fácil e higiénica

Las bolsas de semen Minitube están disponibles en varios tamaños y formatos. Son compatibles con todas las máquinas comunes de llenado y sellado de bolsas.

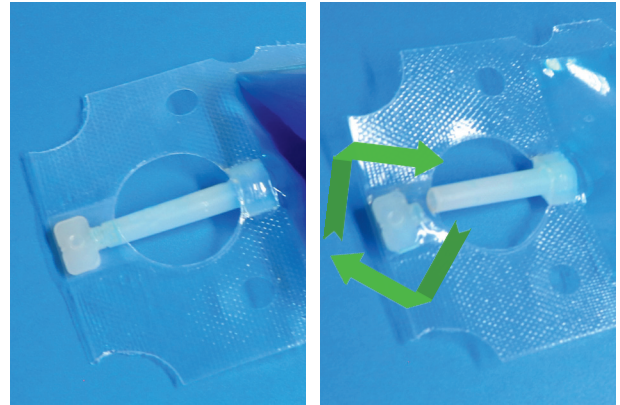

Sistema QuickTip®: fácil, rápido y seguro

Información sobre pedidos

QuickTip® Bag, bolsa para semen porcino, NT (tipo estrecha)	
volumen hasta 60 ml, 1000/rollo [1]	13460/0060
volumen hasta 90 ml, 1000/rollo [2]	13460/0090
volumen hasta 90 ml, perforada, 750/rollo	13460/0190

QuickTip® Bag, bolsa para semen porcino, WT (tipo ancha)	
volumen hasta 60 ml, 1000/rollo [3]	13460/1060
volumen hasta 90 ml, 1000/rollo [4]	13460/1090
volumen hasta 90 ml, perforada, 750/rollo	13460/1190



1 NT 60 ml

2 NT 90 ml

3 WT 60 ml

4 WT 90 ml