



ClearGlide®



Catéter de inseminación de alta calidad con punta de poligel

El catéter ClearGlide® se fija de forma segura en el cervix de la cerda gracias al diseño especial de la punta con pestaña. Durante la introducción del catéter la pestaña se dobla hacia atrás, pero una vez que alcanza la posición correcta en el cervix, la pestaña vuelve a su posición original y cierra el cervix de forma natural. El material no absorbente de la punta del catéter está recubierto de un polvo especial que en contacto con la humedad se torna en una película deslizante que hace innecesaria una lubricación adicional.

La punta con forma cónica y la pestaña hacen que el catéter ClearGlide® proporcione una fijación óptima, reduciendo al mínimo el reflujo de semen. Debido a su extraordinaria capacidad de deslizamiento y fijación, el ClearGlide® se deja introducir y retirar fácilmente, contribuyendo a mejorar el bienestar del animal.




Sus beneficios

- La punta del catéter ClearGlide® se fija al cervix mediante la pestaña especial que se dobla hacia atrás durante la canalización en el cervix
- La forma cónica de la punta y su capacidad de deslizamiento permiten la inserción y retirada suave del catéter
- El material elástico Polygel de la punta permite que ésta se adapte perfectamente al canal cervical
- El reflujo de semen se reduce al mínimo
- Reducido riesgo de lesiones: la inserción especial del tubo y punta del catéter previene irritación y lesiones del cervix
- El moldeado de fabricación en una pieza permite una fijación segura de la punta con el tubo del catéter
- La producción automática con estándares superiores de fabricación garantiza calidad y bioseguridad





Fijación perfecta de ClearGlide® en el cervix

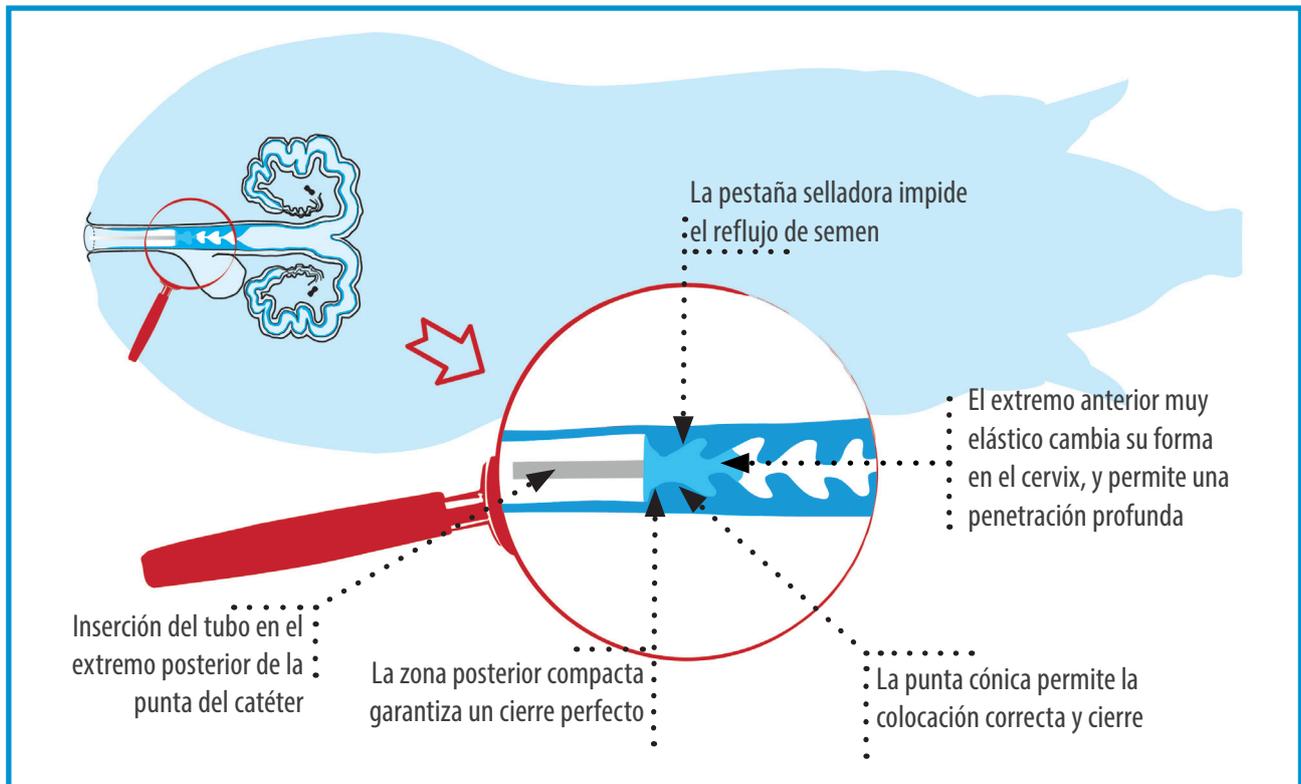

Características del producto

- Nuevo material plástico de estructura molecular única
- Punta de Poli gel con zonas de diferente consistencia, blando adelante y compacto atrás
- La punta y el tubo son fabricados como pieza única
- El material proporciona una capacidad extraordinaria de elasticidad y deslizamiento
- Estándar de higiene máximo disponible en la presentación SafeBlue

SafeBlue ClearGlide®

ClearGlide® está disponible junto al concepto de higiene SafeBlue: catéteres de inseminación de primera calidad, en envoltorio individual y preparados con una película lubricante. Está comprobado que la mejor higiene mejora el resultado de la inseminación.



ClearGlide® con mango
25/bolsa, 500/caja

REF: [17106/4026](#)

ClearGlide® sin mango
25/bolsa, 500/caja

REF: [17106/3026](#)

SafeBlue ClearGlide® con mango
100/caja

REF: [17106/4005](#)

SafeBlue ClearGlide® sin mango
100/caja

REF: [17106/3005](#)