




Technical Data Sheet

MPP Uno, envasadora y selladora automática de pajuelas

★ Características del producto

- Llena y sella una pajuela por ciclo: ideal para manejar pequeños volúmenes
- Capacidad: approx. 4000 pajuelas/hora
- Capacidad de la tolva: 2400 pajuelas de 0,25 ml ó 1200 pajuelas de 0,5 ml
- La conversión entre pajuelas de 0,25 y 0,5 ml se realiza en pocos minutos, sin intercambiar pieza alguna
- El generador de ultrasonido está integrado en una caja separada que puede instalarse a distancia de hasta 2,5 m (interruptor se ubica en la propia máquina)
- Unidad de vacío con depósito integrado y función de reajuste automático; el nivel de vacío puede modificarse fácilmente utilizando las teclas de ajuste
- Puede funcionar en cámara o cabina fría o a temperatura ambiente de forma independiente o junto con la impresora MiniJet (CombiSystem)
- Equipo muy compacto que requiere poco espacio; dimensiones de la máquina: 460 x 350 x 410 mm (A x A x P) y generador de ultrasonido
- Control óptimo por parte del usuario: el proceso de llenado se realiza justo delante de él
- Sistema automático: fácil de usar, no necesita casi formación del usuario
- Construcción robusta: fiable y sin pérdidas
- Diseñado para ofrecer condiciones ideales de higiene y seguridad
- Fuente de alimentación: 115 V/60 Hz o 230 V/50 Hz

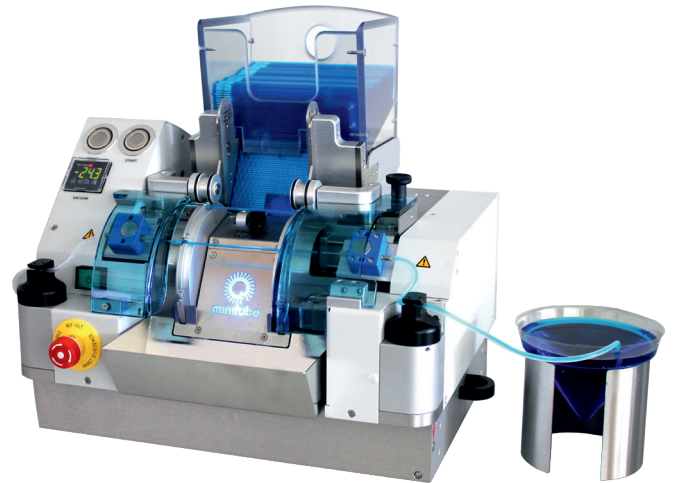

↗ Accesorios

Chasis, para pajuelas 0,5 ml y 0,25 ml	13018/0006
Cabezal de llenado, para pajuelas 0,25 ml	13017/0012
Cabezal de succión, para pajuelas 0,25 ml	13017/0022
Cabezal de llenado, para pajuelas 0,5 ml	13017/0017
Cabezal de succión, para pajuelas 0,5 ml	13017/0027
Sello anular, para cabezal de 0,25 ml y 0,5 ml, 5000/bolsa	13021/3001
Manguera de llenado/succión, 380 mm, silicona, extremos biselados, 1000/bolsa	13021/3800
Cono de semen desechable, 100/bolsa	13018/0100

MPP Uno 13017/0000