



ClearGlide®



Высококачественный катетер для искусственного осеменения с уникальной головкой Poly Gel

Головка катетера ClearGlide® плотно фиксируется в цервиксе свиноматки благодаря наличию уникального гибкого буртика, который во время введения отгибается назад, но, оказавшись на месте, самопроизвольно создает плотный «замок» в шейке матки. Головка Poly Gel прекрасно приспосабливается к форме цервикса. На поверхности неабсорбирующего материала имеется специальное порошковое покрытие, которое образует скользкую пленку при контакте с влагой, поэтому отпадает необходимость в дополнительной смазке.

Благодаря особой конической форме и уплотнительному буртику головка ClearGlide® обеспечивает превосходную фиксацию в шейке матки и, таким образом, обратный отток спермы сводится к минимуму. Встроенный стержень (трубка) и исключительная скользкая способность позволяют вводить и извлекать катетер без усилий, что положительно сказывается на самочувствии животного.




Преимущества для вас

- Головка ClearGlide® прочно фиксируется в цервиксе свиноматки благодаря уникальному гибкому буртику, который отклоняется назад в процессе введения
- Исключительная скользкая способность и коническая форма позволяют легко вставлять и извлекать катетер
- Гибкая головка Poly Gel замечательно приспосабливается к цервиксу
- Обратный отток спермы снижается до минимума
- Встроенный (травмобезопасный) стержень предотвращает возможность раздражения и повреждения шейки матки
- Литая конструкция 'всё в одном' обеспечивает надежное присоединение головки катетера к стержню
- Высокий стандарт автоматизированного производства гарантирует качество и биобезопасность





Превосходная фиксация ClearGlide® в цервиксе

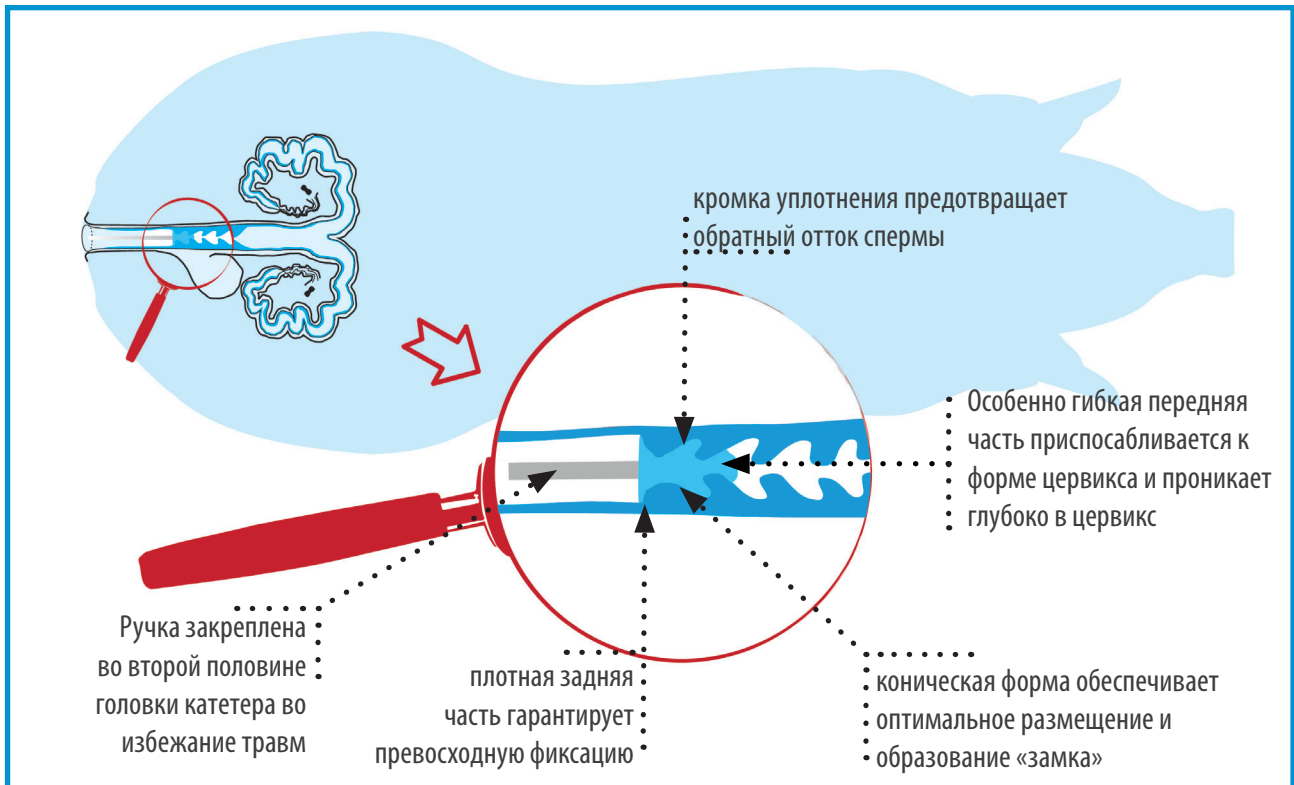

Особенности изделия

- Новый материал с уникальной молекулярной структурой
- Гелеобразная 2-фазовая головка с разными зонами жесткости
- Головка образует единое целое со встроенной ручкой
- Исключительная скользящая способность
- Высокий уровень гигиены, благодаря упаковке SafeBlue

SafeBlue ClearGlide®

ClearGlide® применяется в рамках концепции соблюдения гигиены SafeBlue, что означает предоставление первоклассных катетеров для искусственного осеменения в индивидуальной упаковке и с предварительно нанесенной смазкой. Улучшение санитарно-гигиенических условий при искусственном осеменении повышает успешность репродукции.



ClearGlide®, с ручкой, 25/пакет,
500/коробка

Арт.: 17106/4026

ClearGlide®, без ручки, 25/пакет,
500/коробка

Арт.: 17106/3026

SafeBlue ClearGlide®
с ручкой, 100шт./упаковка

Арт.: 17106/4005

SafeBlue ClearGlide®
без ручки, 100/упаковка

Арт.: 17106/3005