




QT-Packer

Машина для автоматической фасовки, запайки и маркировки пакетов для спермы хряков

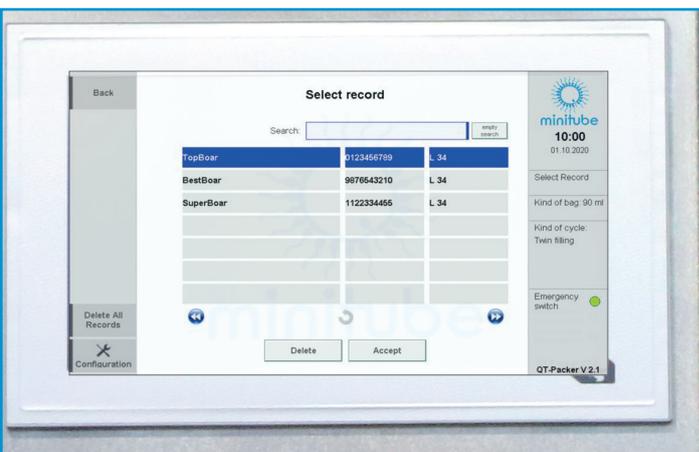

Компактность и высокая скорость обработки



Уникальная модульная конструкция

- Малогабаритная: размеры 1,2 x 0,6 м или 1,0 x 0,9 м
- Возможность установки комплектующих на различном расстоянии
- Сбор готовых пакетов со спермой различными способами: рядом с машиной, перед или под лабораторным столом
- Возможность адаптации к эргономическим требованиям оператора




Высокие технические стандарты

- Высокая производительность: 1500 пакетов в час в производственных условиях в режиме двойной фасовки; более 1800 пакетов в час в непрерывном режиме работы
- Высокая точность наполнения: ± 1 мл
- Полностью электрическая система; отсутствие потребности в компрессоре или сжатом воздухе (бесшумная работа)
- Надежная подача пакетов благодаря **двойной направляющей**; отсутствие сбоев при резке, нет необходимости в регулировке высоты держателя рулона



Множество опций

- Фасовка пакетов для спермы QuickTip® узкого типа объемом 60 мл и 90 мл для традиционного и постцервикального искусственного осеменения; отсутствие механической регулировки машины при переключении между размерами пакетов
- Возможность выбора режима двойного или одинарного наполнения; более 1000 пакетов в час при непрерывной работе в режиме одиночной фасовки
- Опциональное автоматическое переключение с двойного на одинарный режим наполнения для последних 4 пакетов партии
- Дополнительная функция разбавления в режиме двойной фасовки: разбавитель на первом блоке, эякулят - на втором

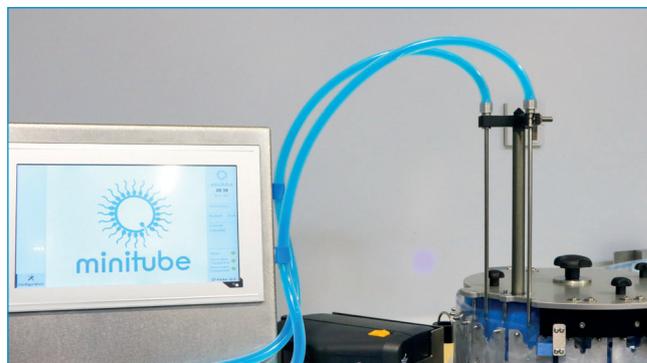


Гибкий дизайн этикеток и возможность передачи данных

- Широкий спектр дизайна этикеток, включая штрих-коды, QR-, PDF417- и DataMatrix-коды, а также логотипы компаний
- Возможность подключения к Prism 3.9, Prism10 и IDEE для прямой передачи информации о фасовке и маркировке



Простота использования

- Простая и быстрая смена рулонов; заканчивающийся и новый рулон могут быть соединены на месте без необходимости запуска процесса подачи для каждого нового рулона
- Система быстрой замены шлангов и крепления игл наполнения, при которой не требуется использование винтов или ключей
- В режиме одинарного наполнения следующая партия может быть подготовлена во время обработки текущей партии, что обеспечивает минимальное время простоя между партиями
- Простота в очистке

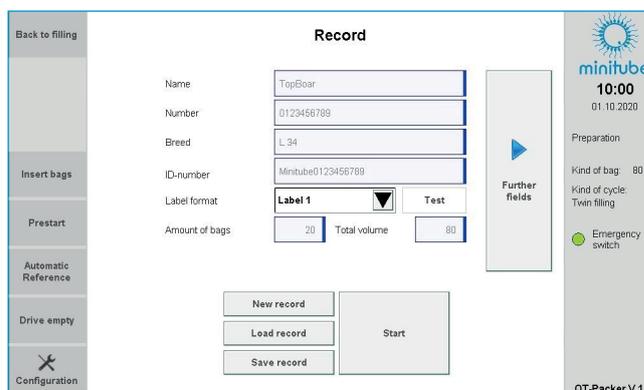

Сервисное обслуживание и техническая поддержка

- Гарантированная долгосрочная техническая поддержка со стороны опытной команды сервисных техников
- Сервисное обслуживание доступно в филиале компании Minitube в Вашей стране
- Разработанное собственными специалистами машинное программное обеспечение, поддерживаемое большой командой



„Я считаю, что машина QT-Packer от Minitube существенно изменила нашу работу в Pig Daddy's. Машина QT-Packer интуитивно понятна и отличается исключительной производительностью. Все элементы машины легко доступны и просто настраиваются. В целом, QT-Packer и сервис, предоставляемый вместе с машиной, очень надежны.“

**Шона Генри (Shawna Henry), помощник руководителя,
Pig Daddy's Boar Stud Site - Cactus Family Farms, США**





Принадлежности и расходные материалы

QT-Packer [АРТ.: 13215/0000](#)

(1) Шланги для розлива для QT-Packer, комплект [АРТ.: 13215/0160](#)

(2) Отрезной нож для QT-Packer [АРТ.: 13215/0175](#)

(3) Игла наполнения для QT-Packer [АРТ.: 13215/0165](#)

(4) Направляющая для пакетов, нержавеющая сталь [АРТ.: 13215/0180](#)

(5) QuickTip® пакет для спермы хряка, узкий тип
объем 60 мл, 750 шт./рулон [АРТ.: 13460/0060](#)

объем 90 мл, 750 шт./рулон [АРТ.: 13460/0090](#)

(6) Этикетки для QuickTip® пакетов для спермы хряка,
2000 шт./рулон [АРТ.: 13210/4964](#)



Испытайте QT-Packer в действии

