



CowScope



La reproducción asistida con una nueva perspectiva


El **videoendoscopio** multifuncional, CowScope, está diseñado para ganaderos, veterinarios y técnicos de IA. Sirve como herramienta para el manejo reproductivo, la inseminación bovina y el entrenamiento del personal.

La visualización de la vagina y del cervix permiten introducir fácilmente el QuickLock Ergo. Es muy **fácil de montar, utilizar y limpiar**.

La fuente de luz y el espéculo con pinza garantizan una **visualización clara**. Se introduce un tubo higiénico en el canal de trabajo y se sustituye después de cada inseminación. Además, se utiliza una cubierta protectora para proteger el dispositivo mientras se introduce en la vagina. Después de su uso, el CowScope se puede enjuagar y limpiar con toallitas higiénicas.

Se necesita un **smartphone** (disponible como accesorio opcional) para visualizar el **vídeo en tiempo real**.


- **Rápido y fácil de montar, usar y limpiar**
- **Diseño ergonómico para un mejor manejo y confort de los animales**
- **Inseminación eficiente bajo control visual**

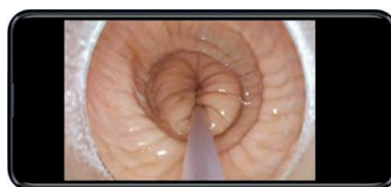

Inseminación artificial

El control visual hace que la inseminación artificial sea más fácil y segura. Gracias al diseño ergonómico del CowScope, el manejo del instrumento de IA es similar al de la IA normal sin endoscopio. El dispositivo es tan delgado que permite el control rectal de la posición correcta del QuickLock Ergo durante la IA. La protección higiénica mantiene limpios el dispositivo y la mano.

- El control visual facilita la introducción del dispositivo de IA a través del cuello uterino
- Su forma delgada permite su uso en novillas
- Ayuda a detectar los celos silenciosos mediante la observación de la mucosidad en el examen vaginal

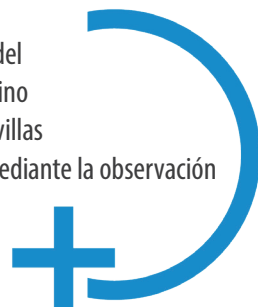

Manejo reproductivo

Detectar los problemas e iniciar el tratamiento a tiempo mejora la salud reproductiva y la fertilidad del rebaño. El examen vaginal puede mostrar patologías que de otro modo pasarían desapercibidas. Pueden diagnosticarse inflamaciones o secreciones debidas a metritis, vaginitis o endometritis, así como hemorragias, urovagina o anomalías congénitas. La presencia de un tapón de moco cervical indica preñez.

- Las imágenes y los vídeos se pueden grabar y compartir con el veterinario
- Detección y tratamiento precoz de los problemas reproductivos
- Uso del CowScope para la aplicación del tratamiento






Entrenamiento

El uso del CowScope permite visualizar el proceso de inseminación artificial cuando se enseña a los técnicos de IA y a los estudiantes de veterinaria. Con esta herramienta, es fácil entender la anatomía del animal y dominar la técnica de la inseminación artificial. La transmisión de la cámara se puede compartir de forma inalámbrica en un televisor o monitor externo (para ello se necesita Google Chromecast o un dispositivo similar, no incluido).

- Es fácil entender la anatomía gracias a la visualización de la misma
- Permite compartir la señal de la cámara en un monitor externo o en una pantalla de televisión
- La inseminación artificial se realiza de forma más rápida y con menos estrés para los animales

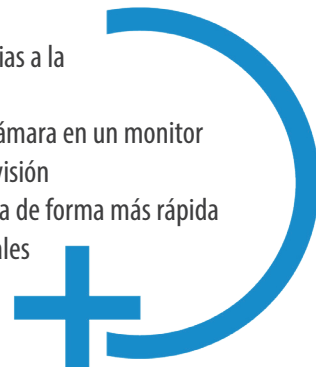

Información para pedidos

Videoendoscopio CowScope en maletín de transporte, con fundas protectoras (100x), tubos higiénicos (20x), espéculo frontal (2x), cierre para fijar el instrumento de IA (QuickLock Ergo). Con cámara Full HD (1080p) y fuente de luz LED.

CowScope [REF.: 17065/0000](#)



Opciones

En Google Play Store hay una aplicación gratuita para utilizar el CowScope. Requisitos para el smartphone: Android 11 (o superior) y un puerto USB C. Como opción, se puede suministrar un smartphone Android compatible.

Smartphone Wiko Power con cargador, pantalla de 6,8" con resolución HD+, 128 GB, Android 11, USB C [REF.: 17065/0002](#)

Funda para smartphone [REF.: 17065/0003](#)

Soporte de cuello para smartphone [REF.: 17065/0004](#)

Accesorios

Espéculo de entrada para CowScope [REF.: 17065/0007](#)

Tubo higiénico, 20/bolsa [REF.: 17065/0005](#)

Funda protectora, 100/caja [REF.: 17065/0006](#)

Seguro para fijar el instrumento de IA (QuickLock Ergo) [REF.: 17065/0008](#)

Toallitas de limpieza, 70/paquete [REF.: 17065/0009](#)