



EquiPlus diluyente



Para el envío y conservación de semen equino refrigerado

EquiPlus es un medio equilibrado diseñado para mantener la actividad espermática hasta 72 horas durante el almacenamiento y el transporte a 5°C. Contiene una mezcla de sustancias energéticas, proteicas y tampones científicamente seleccionados. Está disponible con antibióticos para controlar eficazmente el crecimiento bacteriano, y sin antibióticos.

Lo que diferencia a EquiPlus es su componente específico de leche descremada industrial. Los componentes específicos de la leche descremada son especialmente eficaces para conservar el semen de los caballos, ya que proporcionan una protección excepcional a la membrana espermática.

EquiPlus está disponible en tres cómodas presentaciones:

- como líquido estéril de color blanco lechoso que sólo requiere ser calentado antes de su uso,
- como polvo blanco que se disuelve fácilmente en agua purificada,
- como envase combinado que contiene polvo y agua bidestilada.

Cualquiera de estas tres versiones de Equiplus es adecuada tanto para semen centrifugado como no centrifugado, lo que proporciona versatilidad en diferentes situaciones de trabajo en campo.

EquiPlus polvo

EquiPlus polvo [1]	
para preparar 1 l, con Lincomicina y Espectinomicina	13570/0202
para preparar 100 ml, con Lincomicina y Espectinomicina	13570/0210
para preparar 100 ml, con Gentamicina y Penicilina	13570/0213
para preparar 100 ml, con Amikacina y Penicilina	13570/0215
para preparar 1 l, sin antibióticos	13570/0201
para preparar 100 ml, sin antibióticos	13570/0240

EquiPlus líquido

EquiPlus líquido [2]	
100 ml, con Lincomicina y Espectinomicina	13570/0251
100 ml, con Ticarcilina	13570/0262
100 ml, con Amikacina y Penicilina	13570/0263
100 ml, con Gentamicina	13570/0301
100 ml, con Gentamicina y Penicilina	13570/0303



Llevamos años confiando en Equiplus

Equiplus ha demostrado su eficacia a los profesionales ofreciendo resultados constantes con una amplia gama de sementales.



EquiPlus Combi

Equiplus combi se presenta en una botella especial que contiene el polvo y el agua ultrapura por separado. El diluyente en polvo se encuentra en la tapa del frasco y el agua estéril en el propio frasco.

El diluyente listo para usar se prepara fácilmente en sólo dos pasos. La dilución del semen puede comenzar tras un tiempo de adaptación de 15 a 20 minutos.

EquiPlus Combi, con 100 ml de agua bidestilada	
con Lincomicina y Espectinomicina	13570/0220
con Gentamicina	13570/0221
sin antibióticos	13570/0222

La combinación perfecta




La combinación de diluyente en polvo (contenido en la tapa) y agua pura estéril (en el frasco) hace que EquiPlus Combi sea extremadamente fácil de preparar.



EquiPlus en estudios comparativos

En una comparación de EquiPlus e INRA 96 en tres eyaculados de sementales diferentes, no se encontraron diferencias significativas entre los dos diluyentes en cuanto a la motilidad total, la motilidad progresiva y la viabilidad del semen almacenado a +5°C durante tres días.

Estos resultados indican que EquiPlus e INRA 96 son igualmente eficaces para preservar la calidad del semen equino en estas condiciones.

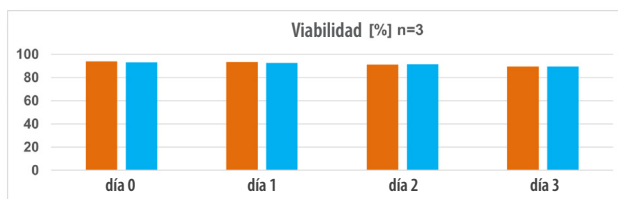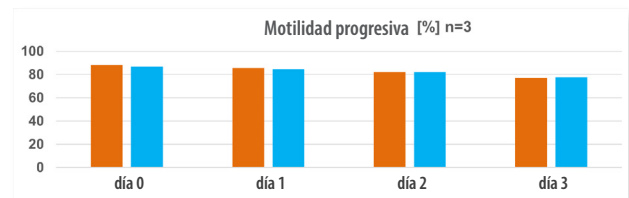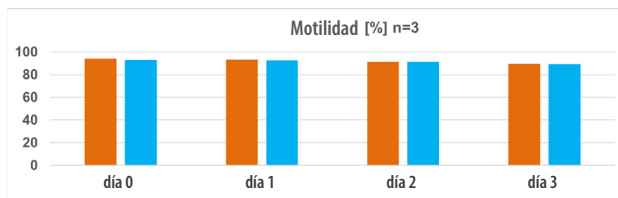

■ = INRA 96
■ = EquiPlus