



# Разбавитель EquiPlus



## Для консервации охлажденной и транспортируемой спермы жеребцов

EquiPlus - это сбалансированная среда, разработанная для сохранения активности спермиев в течение 72 часов при хранении и транспортировке при температуре +5°C. В ее состав входит смесь научно подобранных источников энергии и белка, а также буферов. Среда выпускается с антибиотиками для эффективного контроля роста бактерий и без антибиотиков.

Отличительной особенностью EquiPlus является определенный компонент промышленного обезжиренного молока. Особые компоненты обезжиренного молока особенно эффективны для сохранения спермы жеребцов, обеспечивая исключительную защиту мембраны спермиев.

### EquiPlus порошковый

EquiPlus порошковый [1]	
для 1 л, с линкомицином и спектиномицином	13570/0202
для 100 мл, с линкомицином и спектиномицином	13570/0210
для 100 мл, с гентамицином и пенициллином	13570/0213
для 100 мл, с амикацином и пенициллином	13570/0215
для 1 л, без антибиотиков	13570/0201
для 100 мл, без антибиотиков	13570/0240

### EquiPlus жидкий

EquiPlus жидкий [2]	
100 мл, с линкомицином и спектиномицином	13570/0251
100 мл, с тикарциллином	13570/0262
100 мл, с амикацином и пенициллином	13570/0263
100 мл, с гентамицином	13570/0301
100 мл, с гентамицином и пенициллином	13570/0303

EquiPlus выпускается в трех удобных форматах:

- в виде стерильной молочно-белой жидкости, требующей только подогрева перед использованием,
- в виде белого порошка, который легко растворяется в очищенной воде,
- в виде комбинированного пакета, содержащего порошок и бидистиллированную воду.

Любая из трех представленных версий EquiPlus подходит как для центрифугированной, так и для нецентрифугированной спермы, что обеспечивает универсальность в различных вариантах разбавления.



## Проверено годами

EquiPlus доказал свою ценность для практикующих специалистов, обеспечив стабильные результаты при работе с широким спектром жеребцов.



## EquiPlus Combi

EquiPlus Combi выпускается в специальном флаконе, содержащем отдельно порошок и стерильную воду. Порошок разбавителя находится в крышке флакона, а стерильная вода - в самом флаконе.

EquiPlus Combi,  
порошок и 100 мл бидистиллированной воды

с линкомицином и спектиномицином	13570/0220
с гентамицином	13570/0221
без антибиотиков	13570/0222

Готовый к использованию разбавитель легко подготавливается всего за два шага. Разбавление спермы можно начинать через 15-20 минут после адаптации.

### Идеальное сочетание

Сочетание разбавителя в форме порошка (в крышке) и стерильной чистой воды (в бутылке) делает приготовление EquiPlus Combi чрезвычайно простым.



1 Откройте крышку и нажмите на ее верхнюю часть, чтобы высыпать порошок в стерильную чистую воду (предварительно подогретую до +30°C - +35°C).





2 Полностью растворите порошок, осторожно встряхивая или перемешивая флакон, пока разбавитель не станет однородным.

## EquiPlus в сравнительных исследованиях

При сравнении EquiPlus и INRA 96 с тремя различными эякулятами жеребцов не было обнаружено существенной разницы между двумя разбавителями спермы в общей подвижности, прогрессивной подвижности и жизнеспособности для спермы, хранившейся при температуре +5°C в течение трех дней.

Данные результаты свидетельствуют о том, что EquiPlus и INRA 96 одинаково эффективны для сохранения качества спермы жеребцов в указанных условиях.

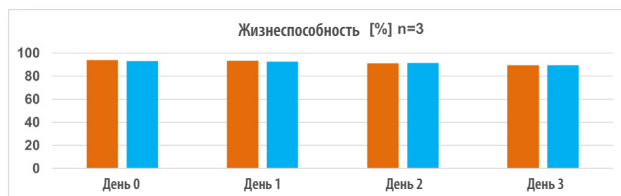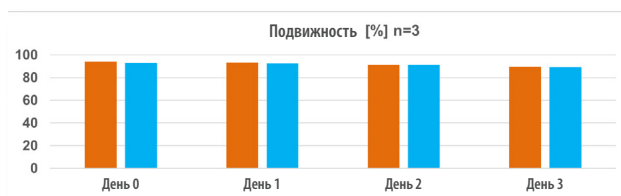

■ = INRA 96  
■ = EquiPlus