



Inseminación artificial bovina



Inyectores de IA QuickLock

- Para todo tipo de pajuelas y vainas, ranurada o no ranurada
- Piezas de acero inoxidable y esterilizables
- Diseño único y seguro por alineación centrada de la pajuela; sin desperdiciar semen
- Una sola mano para la fijación y retirada de la vaina
- Identificación con diferentes colores
- No contiene piezas sueltas; el cierre de seguridad impide que el mandril se salga
- Retirada de la pajuela por separado para el control de la información después de la IA

QuickLock Classic

Fijación y liberación de vainas muy fácil, simplemente presionando un botón.

QuickLock Classic [1] 17025/0000

QuickLock 2000

- Diseño ergonómico
- Requiere sólo 1 cm del largo de la vaina para su fijación

QuickLock 2000 [2] 17026/0000


QuickLock Ergo

- Ideal para vacas adultas debido a la mayor longitud
- Mango ergonómico de menor tamaño
- Inyector más fácil de limpiar

QuickLock Ergo [3] 17024/0000

Émbolos QuickLock

Disponible en diferentes colores.

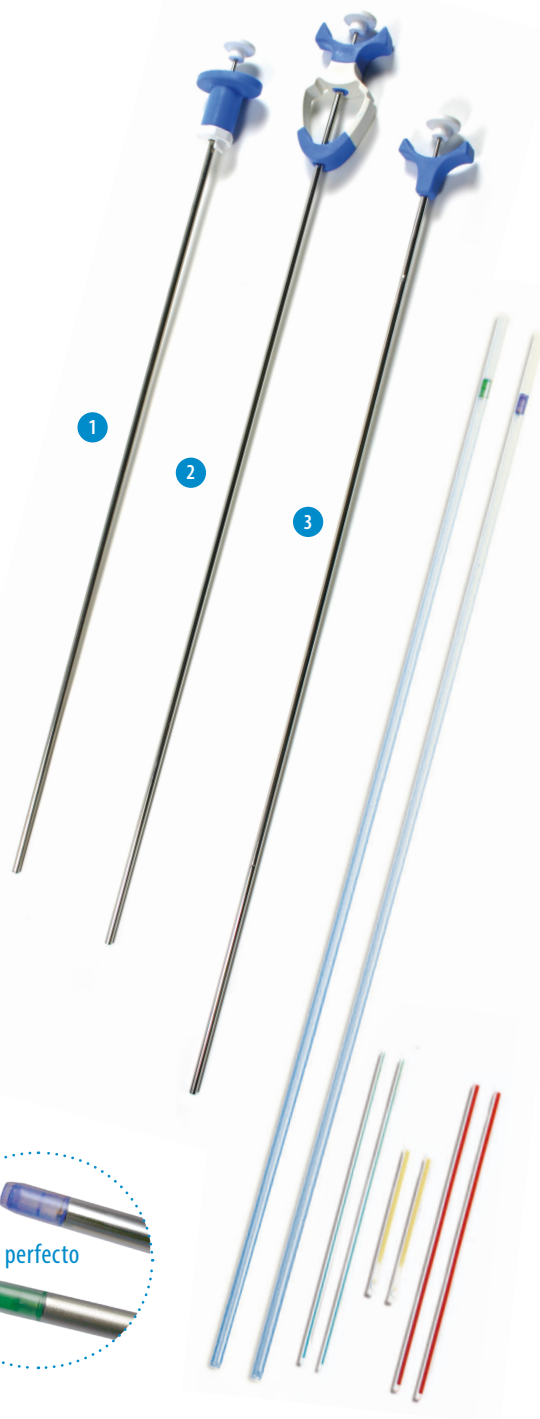



Vainas universales

- Ajuste perfecto para todo tipo de pajuelas de semen
- Suave inseminación facilitada por la forma redondeada de la punta
- Adaptadores transparentes para mejor control visual de posición de pajuelas
- Bolsas con cinta adhesiva para facilitar su cierre y reapertura

| Vaina universal ranurada, verde transparente [1] | |
|--|------------|
| 50/bolsa | 17007/0001 |
| con funda higiénica suave, 50/bolsa | 17007/0012 |
| envasada individualmente, 50/bolsa | 17007/0014 |



| Vaina universal no ranurada, azul transparente [2] | |
|--|------------|
| 50/bolsa | 17007/0000 |
| con funda higiénica suave, 50/bolsa | 17007/0011 |
| envasada individualmente, 50/bolsa | 17007/0013 |


Calentador QuickLock 4.0

- Los dispositivos de transferencia de IA y embriones se transportan a una temperatura constante
- Mantiene el semen/embrión a una temperatura óptima desde la descongelación hasta la inseminación/transferencia
- Rango de temperatura ajustable por el usuario
- Powerbank como fuente de energía para mayor flexibilidad y fiabilidad
- Bolsa de transporte resistente y versátil, fácil de limpiar
- Las correas permiten diferentes posiciones para transportar la bolsa

| | |
|--|------------|
| Calentador QuickLock 4.0 | 17028/0400 |
| Calentador QuickLock 4.0 con powerbank | 17028/0401 |

(↔) Accesorios

| | |
|--|------------|
| Powerbank para calentador QuickLock 4.0 | 17028/0410 |
| Cargador USB para coche, para conectar a la toma de corriente de 12-24 V | 17048/0420 |
| Cargador de red USB, para conectar a la toma de red de 110-230 V | 17048/0430 |
| Bolsa plástica desechable, para proteger el interior, 100/bolsa | 17028/0201 |


 temperatura ajustable +
 suministro flexible de energía mediante powerbank
 + muy robusto y fácil de limpiar





Descongelador MiniThaw

- Temperatura regulable de ambiente a +50°C
- Indicador digital de la temperatura actual
- Las pajuelas se descongelan en 30 segundos en la cámara de descongelación que está llena de agua
- El elevador tiene tres compartimentos y permite descongelar hasta 10 pajuelas (0,5 ml o 0,25 ml) a la vez
- La tapa se ajusta herméticamente; no hay riesgo de fugas
- Diseño delgado y fácil de transportar; cabe en el portavasos del coche
- Fácil de manejar y lo suficientemente resistente como para durar muchos años en el campo
- Se conecta a la toma de corriente de 12-24 V y a la toma de red de 110-230 V mediante un cable USB-C o un adaptador

Descongelador MiniThaw con cable USB-C [17048/0001](#)
[1]

(↗) Accesorios

Cargador USB para coche, para conectar a la toma de corriente de 12-24 V [17048/0420](#)

Cargador de red USB, para conectar a la toma de red de 110-230 V [17048/0430](#)

Base, metálica, para MiniThaw [2] [17048/0005](#)

Temporizador digital, magnético, pila incluida [3] [17048/0006](#)

Batería, para uso móvil, suministro de energía de hasta 15 horas [4] [17048/0410](#)

MiniCutter

- Corte preciso de pajuelas de 0,25 ml y 0,5 ml
- Facilita el corte recto y en la longitud exacta, que ayuda a evitar la pérdida de semen
- Diseño ergonómico
- Fácil de mantener limpio

MiniCutter para pajuelas [17062/0010](#)



diseño delgado + absolutamente hermético + fácil de manejar, transportar y cargar + descongelación rápida y segura de las pajuelas



minitube




ScanDMC

Soporte para escanear códigos Datamatrix en pajuelas de semen con un smartphone. Transforma un teléfono inteligente normal en un escáner de códigos Datamatrix fiable y asequible para las pajuelas.

ScanDMC

13034/0020

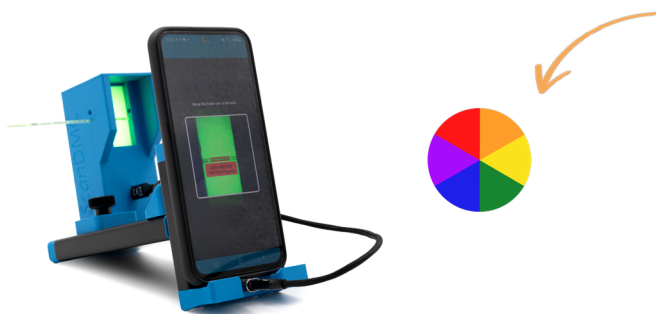

★ Características del producto

- Mantiene las pajuelas a la distancia idónea de escaneado
- Elimina los reflejos para mejorar la precisión
- Admite todos los colores de pajuelas de semen Minitube
- Protege de la luz ambiental y utiliza retroiluminación LED (6 colores) para una iluminación óptima
- Incluye un cable USB-C doble corto para la fuente de alimentación
- Compatible con todos los smartphones Android y Apple con puerto USB-C
- Ajustable para adaptarse a cualquier tamaño de teléfono y posición de la cámara

Kit de inseminación

Contenido: maletín ABS muy resistente, MiniThaw, QuickLock 2000, 100 vainas universales, 80 camisas sanitarias, lubricante ReproJelly, espéculo Varikon, 100 guantes para inseminación, MiniCutter, tijera y pinza.

Kit de inseminación

17050/0070

Componentes disponibles también individualmente:

| | |
|--|------------|
| Maletín de inseminación | 17050/0001 |
| Descongelador MiniThaw (página 3) | 17048/0001 |
| QuickLock 2000 (página 1) | 17026/0000 |
| Vaina Universal no ranurada, 50/bolsa (página 2) | 17007/0000 |
| Camisas sanitarias, 80/rollo | 17028/0100 |
| ReproJelly, gel lubricante no espermicida, soluble en agua, tubo de 100 ml | 11907/0100 |
| Espéculo Varikon | 17064/0380 |
| Guante para inseminación, sensitivo, verde, 5 dedos, hasta el hombro, 100/caja | 17080/0015 |
| MiniCutter (página 3) | 17062/0010 |
| Tijera curva para pajuelas, forma angular | 17060/0000 |
| Pinza | 17063/0000 |



Todos los productos para IA bovina



minitube