




ePacker

Máquina automática para
envasar semen porcino

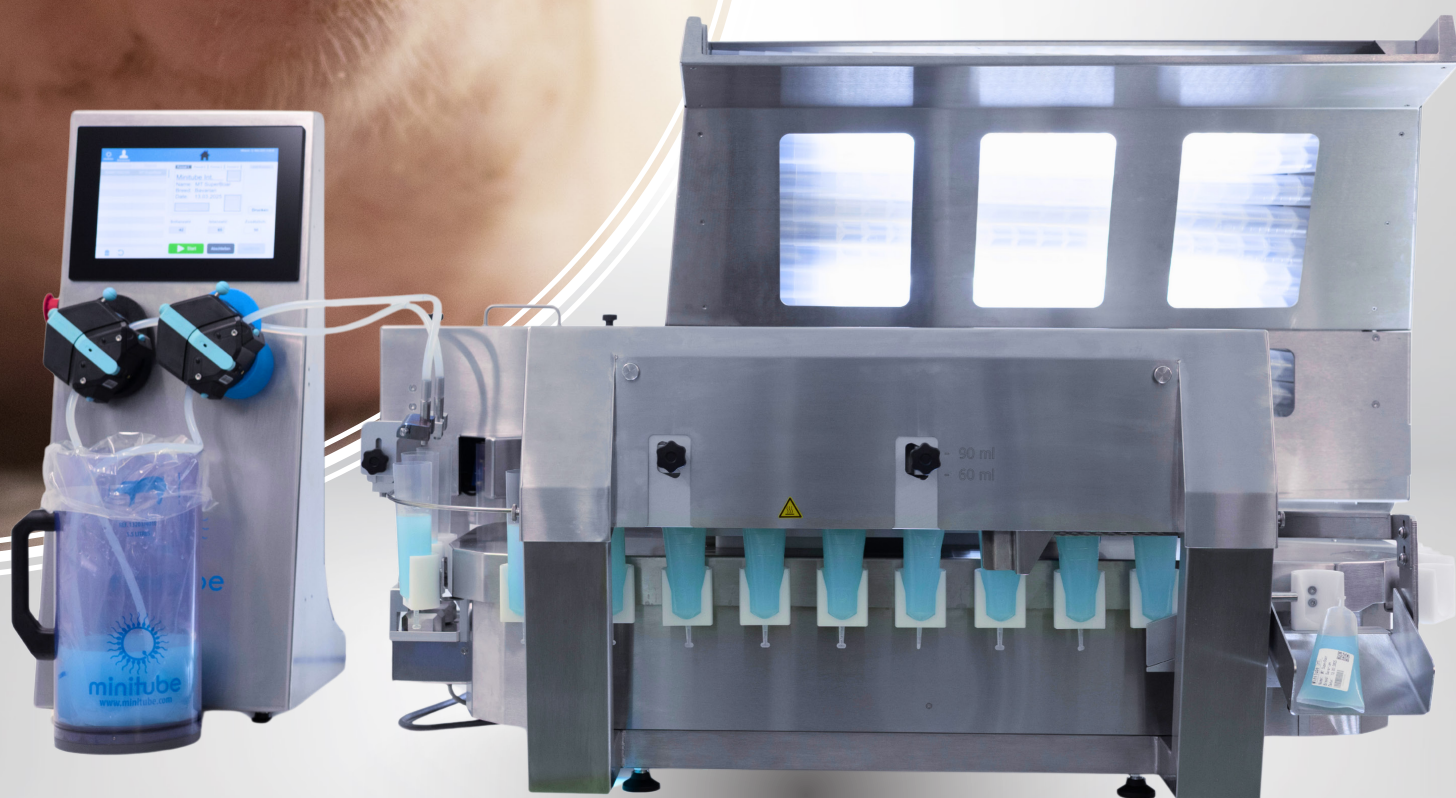

Resistente, limpia, silenciosa y rápida, la ePacker es la solución perfecta para los centros de inseminación porcina que buscan la última tecnología



Gran precisión y velocidad

Equipada con dos bombas peristálticas, la ePacker proporciona un volumen de llenado preciso (+/- 1 ml) a cada tubo con una velocidad de procesamiento de 1.000 tubos por hora.



Autocalibración del volumen de llenado

Para un cambio rápido entre lotes, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando el tiempo de producción real.



Avanzado sistema de sellado e impresión

La técnica de fusión térmica (TFT) garantiza un sellado seguro y hermético. La impresora integrada proporciona etiquetas de última generación con texto, logotipos y códigos.



Funcionamiento versátil y sencillo

Producción versátil con tubos de 60 ml y 90 ml. La ePacker permite cambios rápidos y sin herramientas entre diferentes tamaños de tubo.



Diseño de fácil manejo y limpio


Al funcionar sin aire comprimido, la ePacker es más silenciosa que cualquier otra máquina en el mercado. Con su avanzado sistema de control automático, su software intuitivo y sus superficies limpias, es fácil de manejar, mantener y cuidar.



Valor económico

La ePacker le aporta el menor coste de producción y la mayor rentabilidad.



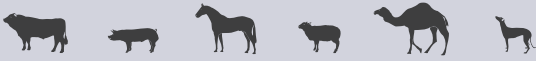

★ Características del producto

- Llena hasta 1000 tubos de semen (90 ml) por hora
- Equipado con dos bombas peristálticas para un llenado preciso (+/- 1 ml)
- La calibración automática mediante células de carga garantiza un rendimiento constante
- Utiliza una sólida y novedosa técnica de fusión térmica (TFT) para un sellado seguro y perfecto
- Llena tubos de 60 y 90 ml con una boquilla corta y flexible
- Permite el cambio rápido y sin herramientas entre diferentes tamaños de tubo en unos sencillos pasos
- El diseño modular de los elementos clave facilita el acceso, mantenimiento y servicio
- Se conecta sin problemas a Prism10 y a otros programas informáticos de laboratorio para la transferencia de datos de llenado y etiquetado, o para funcionar de forma autónoma
- Admite una amplia gama de diferentes diseños de etiquetas incluidos códigos de barras 128, QR, PDF417, DataMatrix, etc. y más
- Tolva de tubos de gran capacidad para 336 tubos de semen (90 ml) en 16 pilas
- Presenta un diseño higiénico con superficies de acero inoxidable, bordes redondeados y cables ocultos para facilitar la limpieza



Experiencia WYSIWYG única

¡Lo que ves es lo que tienes! La intuitiva pantalla táctil muestra una vista previa en tiempo real de la etiqueta del tubo, con la información correspondiente dentro de los diseños de etiquetas predefinidos.

Información para pedidos

ePacker 13207/0000

Accesorios

Tubo dispensador 13207/0160

Etiqueta para tubo, 50 x 32 mm, blanca, 2000/rollo 13210/4964

