



Ecógrafo Minitube 3.0 Plus



Para uso veterinario en distintas especies

El ecógrafo Minitube 3.0 Plus es un equipo ligero, resistente al agua y compacto, para realizar exámenes ecográficos en diferentes especies. El ecógrafo es perfecto para realizar en animales exploraciones y diagnósticos ginecológicos, obstétricos, abdominales, urológicos y de vasos periféricos.

Se presenta en un maletín de transporte resistente que incluye una tablet antirreflejos de 11", cargador USB, correa de transporte y lubricante ReproJelly. Las sondas de ultrasonidos, que se venden por separado, son intercambiables, lo que permite al usuario realizar exámenes en diferentes especies con un solo dispositivo simplemente cambiando la sonda.

Existen varios modos de exploración en función de la sonda utilizada. Estos incluyen modo B, modo B|B, modo M, PW y CF Doppler.

El ecógrafo Minitube 3.0 Plus utiliza la tecnología más avanzada de procesamiento y formación de haces y algoritmos para calcular automáticamente los días de gestación al realizar mediciones obstétricas. Existen varias opciones en función de la especie y las estructuras anatómicas examinadas.


Los resultados de los exámenes se pueden guardar y exportar junto con imágenes y vídeos. La batería interna de alta capacidad garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.

★ Características del producto

- Tablet: 11"
- Modos de visualización: Modo B, modo B|B, modo M, PW y CF Doppler
- Funciones de medida: distancia, área, volumen, medidas obstétricas con cálculo automático de días de gestación
- Doppler color con cálculo automático de diversos parámetros (frecuencia cardíaca, velocidad, flujo sanguíneo)
- Imágenes armónicas codificadas
- Capacidad de la batería: 6 h de uso continuo
- Conexión eléctrica del cargador 100-240 V



Con cálculo automático de días de gestación

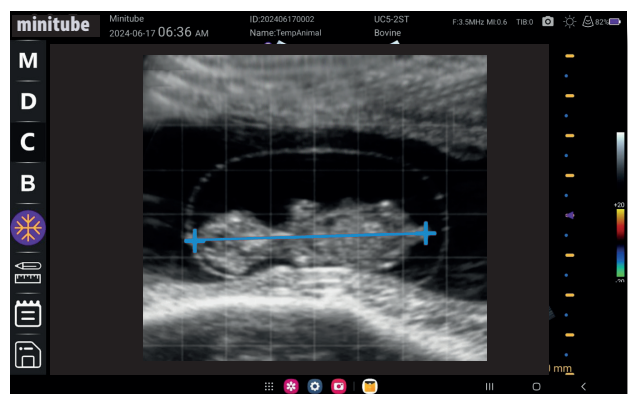

Ecógrafo Minitube 3.0 Plus

23500/2005



☰ Alcance del suministro

- Tablet de 11" con protección antigolpes y pantalla antirreflejos
- Tres cables para conectar el Dispositivo a la Tablet
- Fuente de alimentación y cable USB
- Maletín de transporte y correa de transporte
- Lubricante Reprojelly de 100 ml
- Manual de instrucciones



↔ Sondas disponibles

Convexa 3,5 MHz 23500/2105
para porcino y pequeños rumiantes

- Frecuencia central: 3,5 MHz
- Rango de frecuencia: 2,0 MHz – 5,0 MHz
- Profundidad de exploración: hasta 351 mm



Linear rectal 6,0 MHz 23500/2106
para vacuno, equino y camélidos

- Frecuencia central: 6,0 MHz
- Rango de frecuencia: 5,0 MHz – 8,5 MHz
- Profundidad de exploración: hasta 120 mm



Micro-convexa 8,2 MHz 23500/2108
para pequeños animales

- Frecuencia central: 8,2 MHz
- Rango de frecuencia: 7,2 MHz – 9,6 MHz
- Profundidad de exploración: 2 - 10 cm

