




ePacker

Полностью автоматическая
машина для фасовки спермы
хряков в тубики

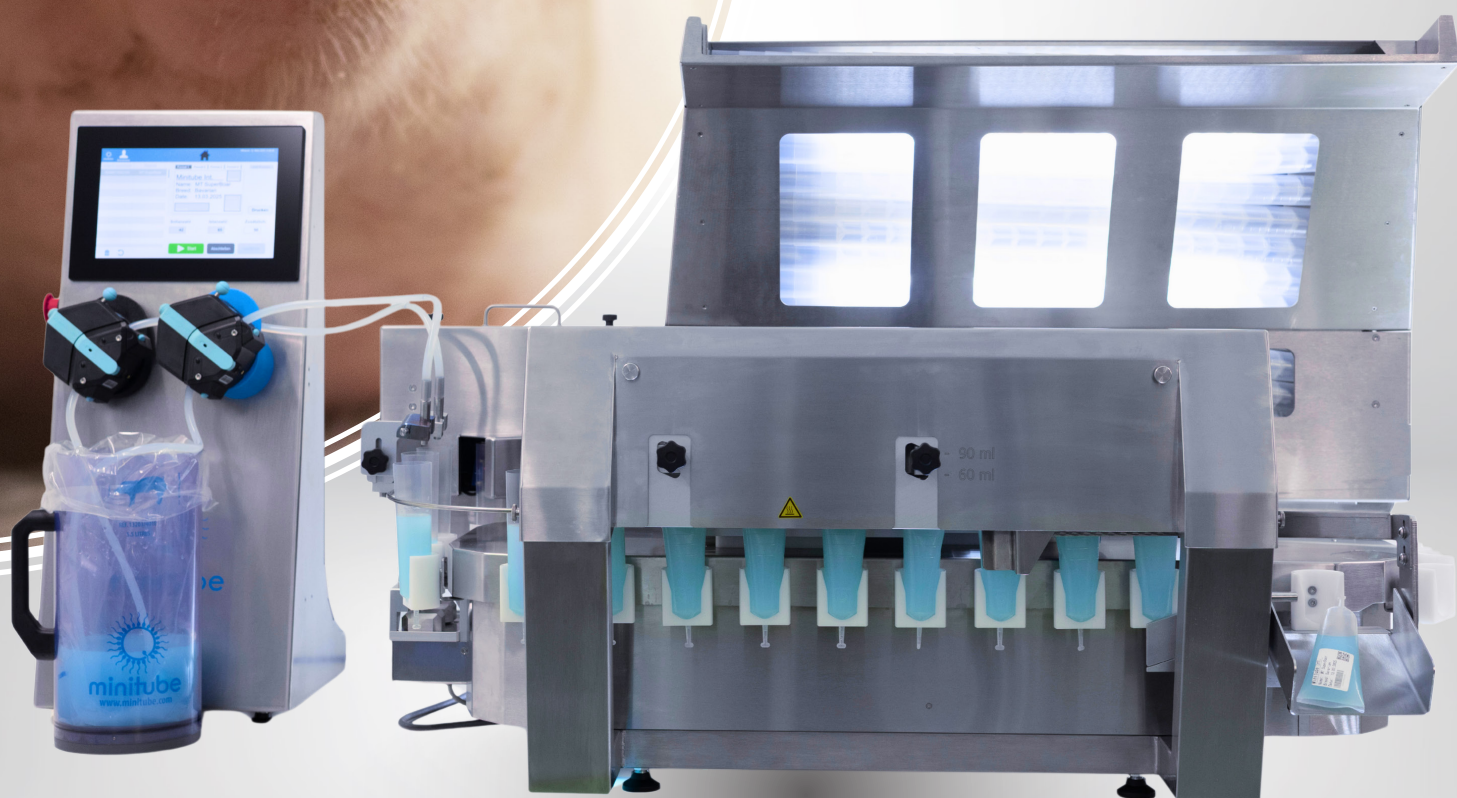

**Надежная, бесшумная и быстрая машина ePacker - идеальное решение
для хозяйств, ориентированных на современные технологии!**



Высокая точность и скорость

Оснащенный двумя перистальтическими насосами, ePacker обеспечивает точное наполнение каждого тюбика (+/- 1 мл) при высокой скорости обработки - до 1000 тюбиков в час.



Автокалибровка объема наполнения

Для ускоренной настройки между партиями, минимизации времени простоя и максимизации эффективного времени производства.



Усовершенствованные технологии запайки и маркировки

Технология термической сварки (TFT) обеспечивает надежную и герметичную запайку, а интегрированный блок печати позволяет создавать современные этикетки с текстом, логотипами и кодами.



Универсальность и бесперебойная эксплуатация

Универсальное производство тюбиков объемом 60 мл и 90 мл. ePacker позволяет быстро и без инструментов совершать перестановку между размерами тюбиков.



Бесшумный, удобный в использовании и гигиеничный дизайн


Работая без сжатого воздуха, ePacker отличается более низким уровнем шума, чем любая другая машина из представленных на рынке. Благодаря современной автоматизации, интуитивно понятному ПО и гигиеничным поверхностям машина ePacker проста в эксплуатации, обслуживании и чистке.



Экономическая эффективность

ePacker обеспечивает самую низкую себестоимость продукции, гарантируя высокую рентабельность Вашего бизнеса.



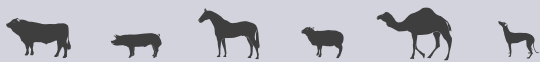

★ Описание продукта

- Наполнение до 1000 тюбиков для спермы хряка (90 мл) в час
- Оснащен двумя перистальтическими насосами для точного дозирования объема (+/- 1 мл)
- Автокалибровка с помощью датчиков нагрузки обеспечивает стабильную работу
- Прочная и герметичная запайка благодаря передовой и надежной технологии термической сварки (TFT)
- Наполнение тюбиков объемом 60 мл и 90 мл с помощью короткой и гибкой форсунки
- Быстрая перестановка между размерами тюбиков без использования инструментов за несколько простых шагов
- Модульная конструкция основных элементов обеспечивает легкий доступ, техническое обслуживание и сервис
- Бесперебойное подключение к Prism10 и другому лабораторному ПО для передачи данных о фасовке и маркировке, с возможностью автономной работы
- Поддерживает широкий спектр различных дизайнов этикеток, включая штрихкоды 128, QR, PDF417, DataMatrix и другие
- Магазин для тюбиков большой емкости вмещает 336 тюбиков для спермы (90 мл) в 16 штабелей
- Гигиеничный дизайн с поверхностями из нержавеющей стали, закругленные края и скрытые кабели для легкой очистки



Наглядный интерфейс в режиме WYSIWYG

What You See Is What You Get - «что видишь, то и получаешь» - интуитивный сенсорный дисплей обеспечивает точный предварительный просмотр этикетки в режиме реального времени, отображая соответствующую информацию о маркировке в рамках заранее заданных шаблонов этикеток.



Информация для заказа

ePacker 13207/0000

➔ Принадлежности

Шланг для розлива спермы 13207/0160

Этикетки для тюбиков, 50 x 32 мм, белые, 2000 шт./рулон 13210/4964