




КОНЕВОДСТВО

Технология репродукции животных

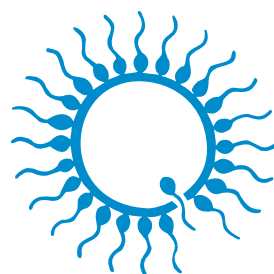

minitube
our knowledge, your success

Minitube: проверенное качество с 1970 года



Дорогие клиенты,

Компания Minitube полностью привержена качеству – это основа всей нашей деятельности.

Мы осознаем, что безопасность, функциональность и эффективность являются ключевыми факторами для обеспечения бесперебойной и рентабельной производственной системы. Более 50 лет компания Minitube поставляет надежное, высокопроизводительное, качественное оборудование и расходные материалы на рынок в сфере вспомогательной репродукции.

Будучи лидером отрасли, мы берем на себя ответственность за предоставление продукции, которая не ставит под угрозу качество или безопасность. По этой причине все запатентованные расходные материалы и среды для сохранения спермы или эмбрионов производятся на нашем собственном специализированном современном оборудовании и сопровождаются обширным внутренним и внешним тестированием качества, которому Вы можете доверять. Уровень качества Minitube не является субъективной характеристикой, а определяется неопровержимыми фактами и десятилетиями успешной работы.

Комплексный подход к качеству подкрепляется стратегией долгосрочного партнерства с нашими поставщиками и клиентами. Многолетние партнерские отношения способствуют установлению доверия и взаимопонимания, необходимых для обеспечения постоянного качества.

То же самое относится и к нашей сервисной службе, которая всегда стремится обеспечить наилучшее обслуживание в отрасли. Будучи нашим клиентом, Вы всегда можете воспользоваться экспертными знаниями и ноу-хау сотрудников Minitube.

Двигаясь вперед, мы продолжаем исследовать и разрабатывать наилучшие продукты и предоставлять высококачественные услуги, как мы это делали на протяжении более 50 лет.

Д-р Кристиан Зиммет
Генеральный директор






Онлайн-медиаотека Minitube:
Все каталоги доступны в цифровом
виде на различных языках

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сбор спермы	02
2	Оценка спермы	06
3	Разбавление спермы	10
4	Транспортировка и хранение свежей спермы	14
5	Обработка соломинок	18
6	Замораживание и криохранение спермы	22
7	Перенос эмбрионов и OPU	26
8	Сбор и перенос эмбрионов	30
9	Тренинги и сервис	38

1 СБОР СПЕРМЫ

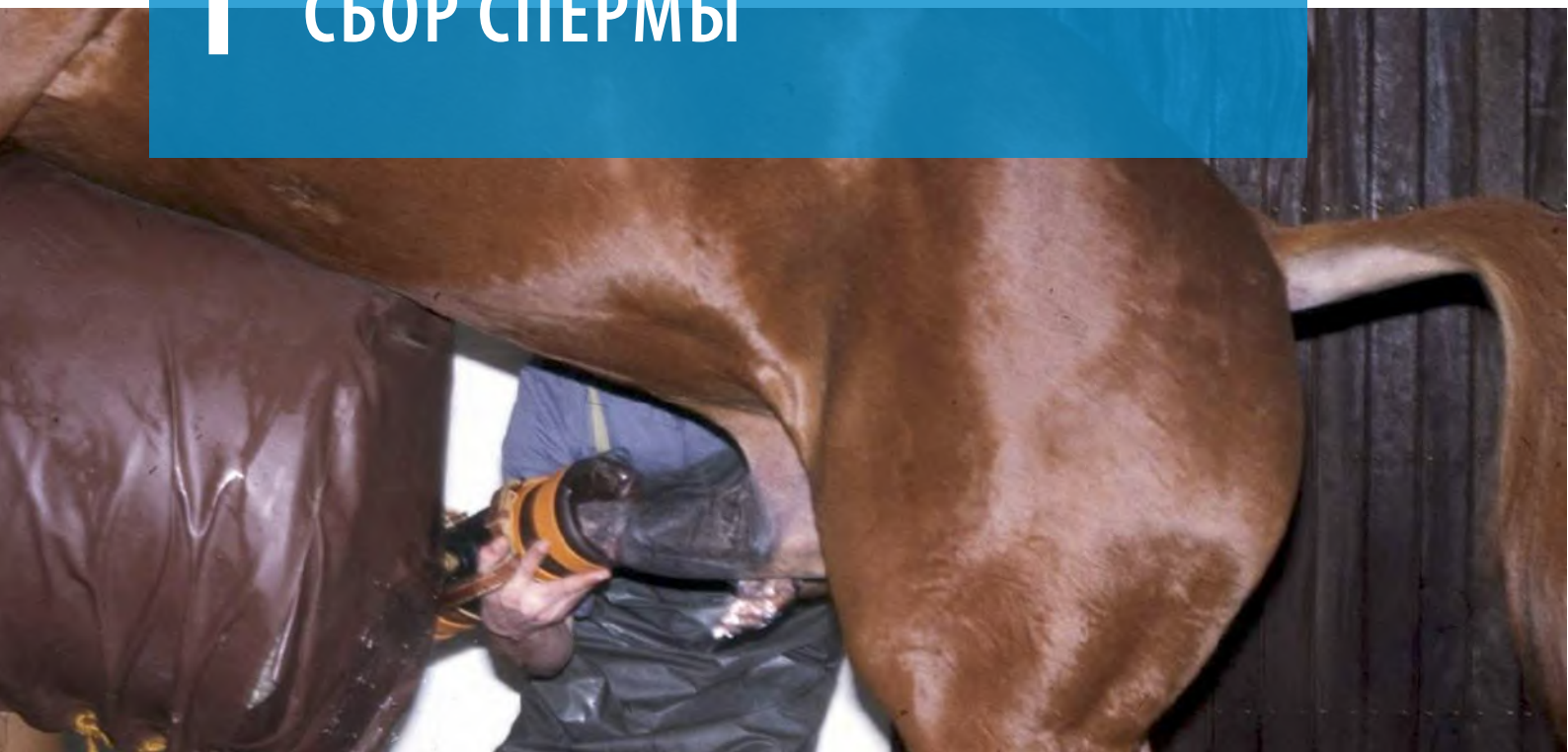

Искусственная вагина, модель Hannover

С клапаном, внутренним шлангом (100 см), 3 резиновыми кольцами и кожаной ручкой. Прочный цилиндрический резиновый корпус с закругленными краями. Конструкция клапана позволяет добавлять воздух для регулировки внутреннего давления.

Искусственная вагина, модель Hannover [1] 11220/0145

Принадлежности

Внутренний шланг для ИВ Hannover, резиновый, с обеих сторон закругленные края, стерилизуемый [2]

длинный вариант, 100 см 11222/0002

укороченный вариант, 70 см 11222/0003

Одноразовый внутренний вкладыш для ИВ Hannover

25 шт./упаковка 11245/0450

ширина 31 см, прибл. 200 м в рулоне, ультратонкий материал: гладкий и очень прочный [3] 11222/0120

Резиновое кольцо для ИВ Hannover [4] 11222/0001

Кожаные ручки для ИВ Hannover [5] 5011222/0008



Искусственная вагина, модель Missouri

Двойной латексный вкладыш с клапаном и кожаным футляром, адаптер и бутылочка для сбора спермы. Конструкция клапана позволяет добавлять воздух для регулировки внутреннего давления.

Искусственная вагина, модель Missouri [1] 11245/0000

Принадлежности

Резиновый вкладыш для ИВ Missouri, 70 см 11245/00011

Одноразовый внутренний вкладыш для ИВ Missouri, 25 шт./упаковка 11245/0450



Искусственная вагина, модель Colorado

В комплект входят 3 внутренних резиновых вкладыша (трубчатый/конический/прямой), 10 резиновых колец, 2 зажима, 25 одноразовых вкладышей, 25 бутылочек для сбора спермы, 25 нейлоновых фильтров и термочехол. Прочный цилиндрический резиновый корпус с закругленными краями. Конструкция клапана позволяет добавлять воздух для регулировки внутреннего давления.

Искусственная вагина, модель Colorado [2] 11230/0000

Принадлежности

Внутренний вкладыш для ИВ Colorado, латексный, конусовидный конец для соединения с бутылочкой

прямой формы [3] 11231/0101

трубчатый, прямые концы 11231/0103

Одноразовый внутренний вкладыш Colorado

25 шт./упаковка [4] 11232/0110

расширенный конец, 25 шт./упаковка [5] 11232/0102

ширина 31 см, прибл. 200 м в рулоне, ультратонкий материал: гладкий и очень прочный [6] 11232/0030

Термочехол для ИВ Colorado [7] 11231/0185



Принадлежности для всех ИВ

Бутылочка для сбора спермы

200 мл, пластиковая, одноразовая, 100 шт./упаковка [8] 11231/0200

250 мл, стеклянная 11245/0006

Термочехол для бутылочки для сбора спермы, защищает сперму от воздействия низких температур и ультрафиолетового излучения [9] 11225/0026

Соединительная гайка, для бутылочки для сбора спермы, 100 шт./упаковка 11231/0301

Фильтр для спермы, нейлоновый, подходит для бутылочки для сбора спермы, 25 шт./упаковка [10] 11231/0400

Фильтр-мешок для спермы

нетканый, 150 x 60 мм, 10 шт./упаковка [11] 11245/3100

нетканый, 125 x 90 мм, 10 шт./упаковка 11260/1000

Термометр для искусственной вагины

до +100°C, биметаллический, небьющийся [12] 11027/0000

до +200°C, цена деления 0,1°C, красный наполнитель [13] 11027/0200

Чучело для жеребца, модель Hannover

- Покрытие из армированного синтетического материала обеспечивает очень высокий уровень гигиены: легко моется и эффективно дезинфицируется
- Благодаря мягкой подкладке обеспечивается максимальный комфорт даже для сильно стимулированных жеребцов
- Специальная форма корпуса позволяет удерживать искусственную вагину в наиболее естественном положении
- Простота установки и максимальная стабильность: две опоры, закрепленные на полу четырьмя шурупами каждая, обеспечивают максимальную безопасность для сборщика и жеребца
- Размер чучела подходит для всех пород: высота чучела 1,30–1,70 м, размер корпуса 2 м х 60 см х 55 см (Ш х В х Г)

Чучело для жеребца, модель Hannover, со съемным ремнем прикуса [1]

регулируется по высоте и наклону для удовлетворения потребностей различных пород и предпочтений **11200/0000**

с гидравлической регулировкой высоты: обе опоры могут подниматься/опускаться на 40 см вместе/отдельно с помощью ручного насоса **11200/1000**

Принадлежности

Покрывало для чучела, синтетический материал, закрытое со стороны сбора спермы, с ремнями для крепления [2] **11200/2601**

Ремешок прикуса [3] **11200/2100**

Стрейч-пленка для защиты чучела, 300 м **32000/0010**



1

Человек и животные в фокусе

Спроектировано с учетом сочетания наивысшей безопасности с максимальным комфортом для жеребца и сборщика.



2



3

Тепловой шкаф

Для сушки, нагрева и стерилизации лабораторных материалов.

- Температурный диапазон: +30°C до +300°C
- Естественная вентиляция
- Дисплей с многофункциональным сенсорным экраном
- PID многофункциональный микропроцессорный контроллер
- 1 Pt-100 датчик с двойной защитой от перегрева (регулируемый электронный контроль температурой и механический ограничитель температуры)
- Регулируемый приток предварительно прогретого свежего воздуха

Тепловой шкаф

53 л, 400 х 400 х 330 мм, 55 кг, 230 В **14127/0053**

53 л, 400 х 400 х 330 мм, 55 кг, 115 В **14127/0054**



Предлагаются различные размеры тепловых шкафов!



Sterivar

Стерилизатор низкого давления, специально разработан для стерилизации искусственных вагин и принадлежностей к ним.

Описание продукта

- Изготовлен из нержавеющей стали, двойные стенки с изоляцией
- С предохранительным клапаном, таймером, краном для слива воды и защитой от перегрева
- Вместимость: 15 искусственных вагин
- Температурный диапазон: до +100°C
- Давление: макс. 0,02 бар
- Внутренние размеры: 750 x 400 мм
- Источник питания: 115 V/60 Hz или 230 V/50 Hz
- Потребляемая мощность: 3500 W

Sterivar [1]

230 V	11050/0015
115 V	11050/0014

Основание на роликах для Sterivar [2]

11051/0000



Принадлежности для сбора спермы

Перчатки для сбора спермы, голубые, нитриловые, ультратонкие, спермодобротные, без латекса, без талька, 100 шт./коробка [1]

размер M	11128/0055
размер L	11128/0060
размер XL	11128/0065

Инфракрасный термометр, для бесконтактного измерения температуры, с чехлом и батареей [2]

15120/7000

ReproJelly, спермодобротный гель, водорастворимый

тубик 100 мл, с герметично закрывающимся колпачком [3]	11907/0100
Бутылка 1 л, с герметично закрывающимся колпачком [4]	11907/1000
канистра 3 л, без дозатора [5]	11907/3000

Дозатор для канистры ReproJelly

11907/3100

Вазелин, 1 кг

11905/0100



Сбор спермы

Лубрикант ReproJelly

Изоосмотический и спермодобротный, поддерживает жизнеспособность спермиев. Идеальная вязкость для лучшего покрытия перчаток, оборудования и инструментов для ИО.

2 ОЦЕНКА СПЕРМЫ



AndroScope

AndroScope – это компактная мобильная CASA-система, основанная на AndroVision®, которая позволяет анализировать подвижность и концентрацию спермы различных видов животных в любой точке процесса производства, транспортировки и осеменения.

AndroScope оснащен профессиональной высокоскоростной камерой и надежной регулировкой фокуса для точного анализа спермы. Нагревательный блок в зоне анализа мобильной CASA-системы достигает +37°C в течение нескольких секунд, поэтому анализ спермы проводится при оптимальных температурных условиях.

Практичный прочный футляр для переноски обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке AndroScope и содержит все необходимое для проведения анализа спермы.



AndroScope, вкл. транспортировочный кейс и принадлежности [1]

12500/3000

Принадлежности

Одноразовая счетная камера Minitube,
20 µm, 4 счетных участка, 25 шт./упаковка

12050/0220

Микропробирка 2,0 мл с крышкой,
250 шт./упаковка

14602/0904

Одноразовые капиллярные соломинки,
100 шт./упаковка

15404/0100

Палочки из микрофибры, длина 124 мм,
100 шт./упаковка

12510/0106

Опционально: Портативный нагреватель,
для 6 реакционных пробирок и 1 счетной
камеры [2]

12057/6000



1



2



AndroVision®

Данная высокоэффективная автоматизированная система компьютерного анализа спермы выделяется возможностью сочетания классического анализа CASA с более углубленными тестами для оценки функциональных свойств спермиев. С ее помощью можно точно и быстро оценивать концентрацию и подвижность, жизнеспособность, целостность акросом, активность митохондрий и целостность ДНК. Аккуратная и быстрая оценка – до 1000 клеток на анализируемый участок – делают AndroVision® идеальным инструментом для проведения объективной и полной оценки спермы.

AndroVision® интуитивно понятна и проста в использовании: всего 3 шага от начала анализа до получения конечного результата. Опциональные интерфейс с сенсорным экраном и сканер штрих-кода расширяют возможности системы для еще более быстрого и эффективного применения.

Описание продукта

- Анализ изображений и видеофайлов в режиме реального времени
- Анализ до 4 полей за 20 секунд
- Высокоэффективный фильтр частиц для точной идентификации спермиев
- Профили анализа для многих видов животных
- Возможность создания пользовательских профилей и настройки параметров анализа
- Экспорт данных в MS Excel и другие программы
- Языки: английский, немецкий, испанский, китайский, португальский, русский, французский

Программное обеспечение AndroVision®

с ПК и монитором [1]	12500/0000
с ПК, сенсорным экраном и сканером штрих-кодов	12500/0001
с ноутбуком	12500/0010
Цветная камера для AndroVision® [2]	12500/4400

Программные модули AndroVision®

Модуль Морфология и Морфометрия	12500/1300
Модуль Жизнеспособность*	12500/1400
Модуль Целостность акросом*	12500/1600
Модуль Активность митохондрий*	12500/1700
Модуль Целостность ДНК*	12500/1800

* Необходим флуоресцентный микроскоп.

Принадлежности

Фазово-контрастный микроскоп Zeiss Axiolab 5* [3]	12008/0020
ScanStage, автоматизированный столик для микроскопа с нагревательной системой [4]	12048/0031
Блок управления HTi 200 [5]	12057/0200
Нагревательная плитка, 245 x 200 мм [6]	12057/0510

* Другие микроскопы из нашей линейки продуктов также могут использоваться с AndroVision®. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.



Фазово-контрастный микроскоп CX 43

- Фазовая ахроматическая оптика с универсальным конденсором
- Нагревательный столик микроскопа с блоком управления температурой HTi 200 и дополнительной нагревательной плиткой (180 x 180 мм)
- Встроенная светодиодная подсветка
- Эргономичный дизайн

Фазово-контрастный микроскоп CX 43, с фототубусом (тринокулярный), с объективами 20х, 40х [1] 12005/0042

Подставка для блоков управления HTi и небольших нагревательных плиток (1 шт.) [2] 12057/0080



Фазово-контрастный микроскоп MBL

Функциональный микроскоп для анализа спермы с нагревательной системой и блоком управления для индивидуальной регулировки температуры.

Доступен широкий спектр микроскопов и принадлежностей!



Фазово-контрастный микроскоп MBL 2000

бинокулярный, нагревательный столик, HTi 50, объективы 10х, 40х, 100х 12010/3000

бинокулярный, нагревательный столик, HTi 50, объективы 10х, 40х, 100х, с камерой и монитором [1] 12010/3050


Фазово-контрастный микроскоп MBL 2100

тринокулярный, нагревательный столик, HTi 50, объектив 20х 12010/3103

тринокулярный, нагревательный столик, HTi 200, объектив 20х, с камерой и монитором 12010/3101

Цветная цифровая камера для микроскопа [2] 12110/1600 со встроенным ПО для вывода изображений

Монитор 11,6" с HDMI-соединением [3] 12110/1610

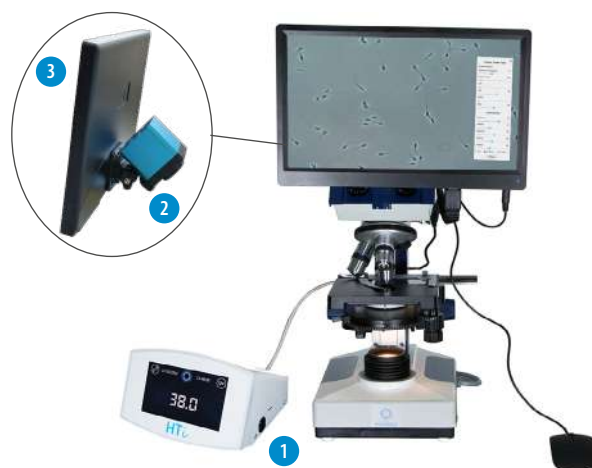

Красители для спермы

Краситель Spermac, для морфологического анализа, 4 x 50 мл [1] 15405/0000

Краситель Farelly, для морфологического анализа, 3 x 250 мл [2] 15405/0026

Eosin G, раствор 2% для суправитального окрашивания, 50 мл [3] 15405/0025

Nigrosin, раствор 4% для суправитального окрашивания, 50 мл [4] 15405/0029



Лабораторные весы

Лабораторные весы для определения объема эякулята, диапазон взвешивания до 2000 г, точность 0,1 г, платформа 130 x 130 мм.

Лабораторные весы 14295/0442



Стеклопная лабораторная посуда

Мы предлагаем множество различных мерных пипеток, градуированных цилиндров, мензурок, дозаторов, пробирок, колб Эрленмейера и т.д. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!



Принадлежности для микроскопа

Предметное стекло, 75 x 25 мм, 50 шт./коробка [1] 15400/2400

Покровное стекло, 18 x 18 мм, 100 шт./коробка [2] 15401/0990

Иммерсионное масло, 8 мл [3] 12000/0101

Салфетка для чистки объектива, 90 x 72 мм, 500 шт./упаковка [4] 15230/9100



Счетные камеры (гемоцитометры)

Thoma new 15150/4771

Neubauer улучшенный 15152/4421

Bürker 15153/0000



Пипетка

Настраиваемая пипетка одноканальная, желтая, автоклавируемая, 10 - 100 µl 12425/4810

Наконечники для пипетки, 10 - 100 µl, желтые, 1000 шт./упаковка 12425/9409



Фотометр SDM 1

- Откалиброван для шести различных видов животных: хряка, быка, жеребца, кобеля и мелких жвачных животных
- Отсутствие необходимости разбавления образцов спермы
- Значение концентрации спермиев отображается на дисплее в 10^6 спермиев/мл
- Источник питания: прилагаемый сетевой адаптер 100-240 V или батарейки

Фотометр SDM 1 [1] 12300/0200


Микрокюветка для SDM1, 100 шт./упаковка, одноразовая [2] 12300/1111



Доказанная точность

SDM 1 - это компактный, высокоточный фотометр для измерения концентрации спермы. Простая очистка, минимальное техническое обслуживание.

3 РАЗБАВЛЕНИЕ СПЕРМЫ

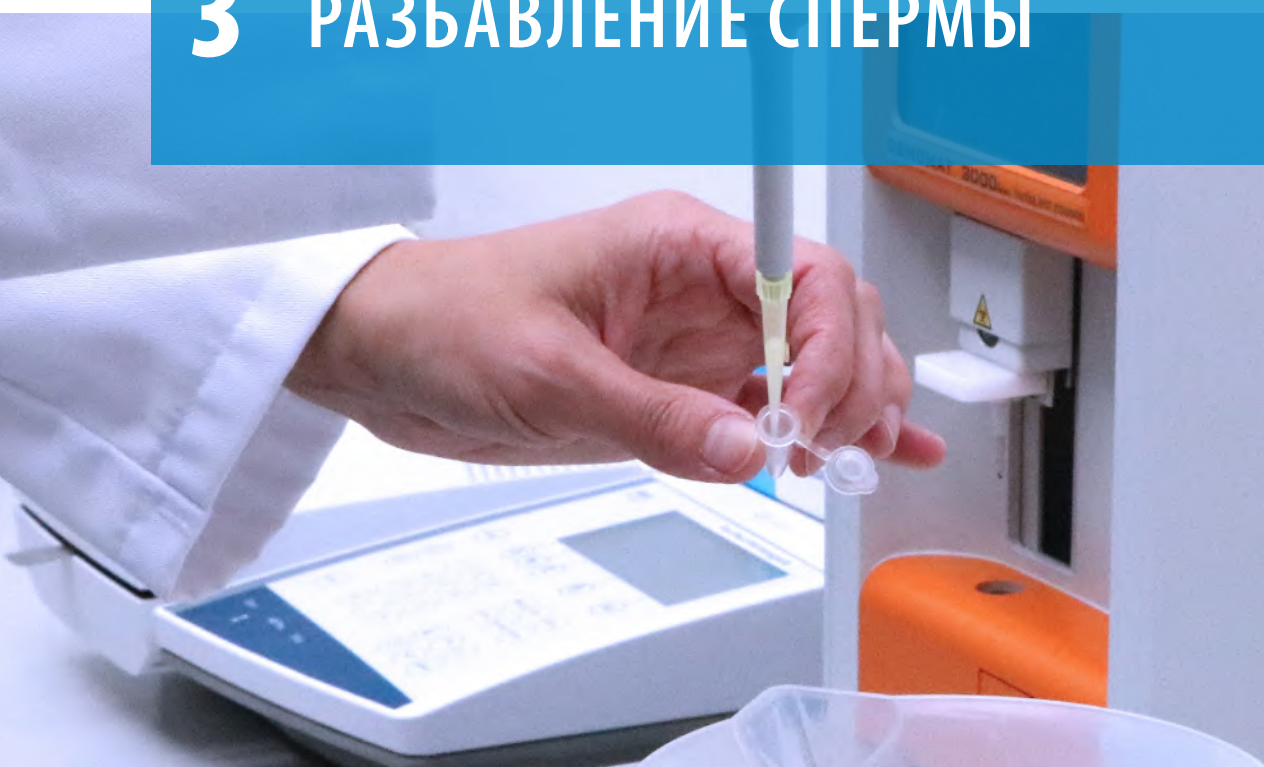

■ Beyond®

Разбавитель для длительного хранения охлажденной спермы жеребца.

⚙ Описание продукта

- Хранение и транспортировка спермы до 14 дней при температуре +5°C
- Сперма жеребцов с низкой устойчивостью к охлаждению и замораживанию или изначально низкого качества может храниться до 7 дней при температуре +17°C
- Уменьшение количества сборов спермы и более гибкая организация ИО
- Более длительный срок хранения уменьшает количество партий спермодоз для осеменения
- Синтетический химически определенный разбавитель
- 100 мл готового к использованию разбавителя
- Снижение риска возникновения воспаления матки
- Производство и контроль качества в соответствии с требованиями GMP
- Подготовка осуществляется в три простых этапа: разбавление в пропорции 1:1 с предварительным разбавителем – центрифугирование со средой CushionFluid или без нее – финальное разбавление с Beyond® до 50–100 млн/мл

Beyond®, 100 мл готового к использованию разбавителя

13570/0100



Переломный момент в отрасли коневодства

Благодаря Beyond® стало возможным хранение спермы в течение 14 дней при температуре +5°C.



EquiPlus

Сбалансированная среда с сухим молоком для сохранения активности спермиев до 72 часов. Предназначена для хранения и транспортировки при 5°C.

EquiPlus, порошковый* [1]

для 1 л, с линкомицином и спектиномицином	13570/0202
для 100 мл, с линкомицином и спектиномицином	13570/0210
для 100 мл, с амикацином и пенициллином	13570/0215
для 1 л, без антибиотиков	13570/0201
для 100 мл, без антибиотиков	13570/0240

EquiPlus Combi, порошковый + 100 мл бидистиллированной воды [2]

с линкомицином и спектиномицином	13570/0220
с гентамицином	13570/0221
без антибиотиков	13570/0222

EquiPlus, жидкий [3]

100 мл, с линкомицином и спектиномицином	13570/0251
100 мл, с амикацином и пенициллином	13570/0263
100 мл, с тикарциллином	13570/0262
100 мл, с гентамицином	13570/0301

* Дистиллированная вода не входит в комплект.



Идеальное сочетание

Сочетание порошкового разбавителя (в крышке) и стерильной чистой воды (во флаконе) обеспечивает исключительную простоту приготовления EquiPlus Combi.

Gent

Культуральная среда для спермы жеребцов, которая подходит для хранения спермы при температуре от +4°C до +6°C в течение прибл. 72 часов. С яичным желтком и антибиотиком. Поставляется в замороженном виде. Поставляется в замороженном виде, готова к использованию после подогрева.

Gent, 45 мл	13571/0045
-------------	------------



Подготовка разбавителя

CushionFluid, среда для щадящего центрифугирования спермы жеребцов, обеспечивает получение большего количества спермиев по сравнению со стандартным центрифугированием

100 мл [1]	13580/0001
30 мл	13580/0030

Среда для центрифугирования, порошок для приготовления 1 л прозрачного раствора ЭДТА-глюкозы [2]

Бидистиллированная вода, стерилизованная, не содержит пирогенов

1 л [3]	13570/1000
100 мл	13570/1100



Spectrum - SBS CryoSystem

SBS CryoSystem состоит из ряда разбавителей Spectrum, которые отличаются друг от друга криопротекторами и специфическим содержанием желтка или молока. Концепция Spectrum позволяет подобрать оптимальный разбавитель для каждого конкретного жеребца. С помощью замороженной-оттаянной спермы можно достичь показателей жеребости, сопоставимых с результатами при использовании охлажденной спермы. Предлагается пять готовых к использованию разбавителей, предназначенных для транспортировки и хранения при температуре -20°C .



Spectrum Orange	
30 мл	13572/0020
15 мл	13572/0200
Spectrum Red	
30 мл	13572/0030
15 мл	13572/0300
Spectrum Green	
30 мл	13572/0040
15 мл	13572/0400
Spectrum Blue	
30 мл	13572/0050
15 мл	13572/0500
Spectrum Violet	
30 мл	13572/0060
15 мл	13572/0600

Низкое содержание молока и яичного желтка. Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и замораживанием.

Высокое содержание яичного желтка, отсутствие молока. Лучше всего сочетается с быстрым охлаждением и замораживанием.

На основе молока, с низким содержанием яичного желтка. Лучше всего сочетается с быстрым охлаждением и замораживанием. Подходит только для некоторых жеребцов.

Низкое содержание молока и яичного желтка. Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и замораживанием. Криопротектор обладает высокой мембранной проницаемостью.

Низкое содержание молока, содержит яичный желток. Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и замораживанием. Сбалансированная комбинация криопротекторов.



Тест-набор Spectrum

Набор содержит: 2x Spectrum Orange (15 мл), 2x Spectrum Red (15 мл), 1x Spectrum Blue (15 мл), 1x Spectrum Violet (15 мл), 1x Spectrum Green (15 мл), 2x CushionFluid (30 мл), 2x SBS среда для центрифугирования (120 мл)

Тест-набор Spectrum	13572/0000
---------------------	------------



Spectrum Duo

Spectrum Duo - это новая концепция разбавителей SBS Spectrum, разработанная для упрощения логистики. Обеспечивая те же результаты, что и готовые к использованию варианты разбавителей, разбавители Spectrum Duo состоят из двух компонентов, которые можно легко смешать в готовый продукт, добавив яичный желток. Транспортировка при температуре $\leq +20^{\circ}\text{C}$, хранение при температуре $\leq +8^{\circ}\text{C}$.

Spectrum Duo Red	13572/0230
Spectrum Duo Violet	13572/0260



Не поставляется в США и Канаду

Водяная баня

- Электронный контроль температуры, нержавеющая сталь, с решеткой и крышкой
- Диапазон рабочих температур: минимум 5°C выше температуры окружающей среды до +100 °C (в зависимости от атмосферного давления)
- Интуитивно понятный 3,5-дюймовый цветной графический дисплей с сенсорным экраном
- Внутренние размеры: 267 x 200 x 207 мм (Ш x В x Г)
- Внешние размеры: 349 x 378 x 289 мм (Ш x В x Г)

Водяная баня, 10 л

230 V	14079/0001
110 V	14079/0002



В наличии широкий
выбор водяных бань
различных размеров!



Центрифуга Minitube

- С поворотным-откидным ротором
- В комплекте с держателями пробирок:
4 x 100 мл/4 x 50 мл/8 x 15 мл
- Скорость в g (RCF) и rpm: макс. скорость 4000 rpm/2200 x g
- Память: 100 программ
- Размеры: 380 x 300 x 490 мм (Ш x В x Г)

Центрифуга Minitube

230 V	14601/0000
110 V	14601/0001



Роллерный миксер RM5

- Для щадящей, равномерной гомогенизации сперматозоидов в пробирке
- Подходит для использования внутри холодильника
- С 5 роликами, длина ролика прибл. 320 мм
- Размеры: 430 x 110 x 180 мм (Ш x В x Г)

Роллерный миксер RM5

230 V	14340/0348
110 V	14340/0349



Лабораторный шейкер VIBRAMAX 100

- Платформа с 2 фиксаторами и нескользящей резиновой прокладкой, с таймером
- Частота колебаний: 150-1350 циклов/мин
- Амплитуда: 3 мм
- Таймер: 0-120 мин, предварительная установка, возможность переключения на режим непрерывной работы
- Площадь платформы: 220 x 220 мм

Лабораторный шейкер VIBRAMAX 100

230 V	14703/0304
110 V	14703/0305



4 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЖИДКОЙ СПЕРМЫ



Пластиковые пробирки

Пластиковая пробирка, с градуировкой

50 мл, завинчивающаяся крышка, плоское основание, стерилизованная, 25 шт./упаковка [1]	17220/0017
30 мл, завинчивающаяся крышка, плоское основание, стерилизованная, 50 шт./упаковка [2]	17231/0030
13 мл, завинчивающаяся крышка, круглое дно, стерилизованная, 100 шт./упаковка [3]	17230/6001
13 мл, без крышки, круглое дно, 100 шт./упаковка	17230/6000

Принадлежности

Завинчивающаяся крышка, для пластиковой пробирки 13 мл, 1000 шт./упаковка [4]

белая	17230/6054
красная	17230/6055
синяя	17230/6056
фиолетовая	17230/6057
зеленая	17230/6058
желтая	17230/6059

Штатив, для 20 пластиковых пробирок 12/13 мл, оргстекло 17230/9384



Джутовый транспортировочный бокс

- Экологичное, компактное и функциональное решение для упаковки
- Вкладыши из джута – природного возобновляемого материала, на 100% компостируемы
- Поддерживает стабильную температуру до 30 часов
- В комплект входят картонная коробка, джутовые вкладыши, 2 хладоэлемента и 2 пластиковые пробирки (50 мл)
- Внешние размеры: 200 x 185 x 200 мм (Ш x Г x В)

Джутовый транспортировочный бокс

17229/0001



Неопоровый транспортировочный бокс

- Изготовлен из высокоизолирующего неопора
- Поддерживает стабильную температуру до 45 часов
- Внешние размеры: 290 x 290 x 180 мм (Ш x Г x В)
- Вариант с принадлежностями [1] включает картонную коробку, 2 хладоэлемента, 2 одноразовых шприца (20 мл), 2 защитных колпачка для шприцев и 2 пластиковые пробирки (13 мл)

Неопоровый транспортировочный бокс

с принадлежностями [1]

17229/0002

без принадлежностей [2]

17229/0006



Стерильные пакеты

Стерильный пакет, с проволочным замком и полем для надписи, 100 шт./упаковка

60 мл

17224/0250

120 мл

17224/0500

350 мл

17224/1000



Одноразовые шприцы

Одноразовый шприц, соединение Luer, полностью пластиковый, стерилизованный

1 мл, 100 шт./упаковка

19801/0001

2 мл, 100 шт./упаковка

19801/0002

5 мл, 100 шт./упаковка

19801/0005

10 мл, 100 шт./упаковка

19801/0010

20 мл, 100 шт./упаковка

19801/0020



Транспортировка и хранение
свежей спермы

5 ОБРАБОТКА СОЛОМИНОК



SFS 133

Описание продукта

- Полуавтоматическая фасовочно-укупорочная машина
- Фасовка и укупорка по 6 соломинок в такт
- Укупорка производится надежно и гигиенично с помощью металлических укупорочных шариков
- В каждой соломинке автоматически образуется воздушный пузырек размером 1 см
- Производительность: прибл. 2000 соломинок в час

SFS 133, для соломинок 0,5 мл, с вакуумной бутылкой, форсункой наполнения и отсасывания, магазином для соломинок **13133/0133**

Насос низкого вакуума, 30-60 Нг, с манометром и клапаном

230 V/50 Hz **13133/0267**

115 V/50 Hz **13133/0268**

Устройство загрузки картриджей, с блоком загрузки и 10 картриджами для 36 соломинок 0,5 мл **13133/0005**

Принадлежности

Форсунка наполнения с 6 иглами **13133/1000**

Форсунка отсасывания с 6 иглами **13133/2000**

Уплотнитель, для всех форсунок наполнения/отсасывания, 5000 шт./упаковка **13021/3001**

Силиконовый шланг для SFS, прозрачный, 3 x 1 мм, длина 10 м **13133/3550**

Металлический укупорочный шарик для соломинок 0,5 мл **13400/9900**



MPP Uno



Фасовка и укупорка 1 соломинки за цикл - оптимальное решение для работы с небольшими объемами.

Описание продукта

- Автоматическая фасовочно-укупорочная машина для соломинок 0,25 мл и 0,5 мл
- Производительность: прибл. 4000 соломинок в час
- Быстрый переход между соломинками 0,25 и 0,5 мл и наоборот без использования инструментов (1-2 минуты)
- Сменный магазин, вместимость: 2400 соломинок 0,25 мл или 1200 соломинок 0,5 мл
- Ультразвуковой генератор в отдельном корпусе, который может быть установлен на расстоянии до 2,5 м (переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится непосредственно на машине)
- Разработана для обеспечения идеальных условий гигиены и безопасности
- Возможна эксплуатация в холодном помещении, холодильной камере или при комнатной температуре как автономно, так и в комбинации с принтером MiniJet (комбисистема)
- Очень компактное устройство, занимающее мало места; размеры машины: 460 x 350 x 410 мм (Ш x В x Г) + ультразвуковой генератор
- Вакуумный блок со встроенным резервуаром и функцией автоматической регулировки; уровень вакуума легко изменяется с помощью кнопок
- Управление с помощью программируемого логического контроллера
- Источник питания: 110 V/60 Hz или 230 V/50-60 Hz

MPP Uno, комплект [1]

13017/0000

Принадлежности

Форсунка наполнения, для соломинок 0,5 мл [2] 13017/0017

Форсунка отсасывания, для соломинок 0,5 мл [3] 13017/0027

Магазин, для соломинок 0,25 мл и 0,5 мл [4] 13018/0006

Уплотнитель, для игл 0,25 мл и 0,5 мл, 5000 шт./упаковка 13021/3001

Шланг наполнения/отсасывания, 380 мм, спермадобротный материал (силикон), V-образный вырез, упакован в фольгированный пакет, 100 шт./упаковка 13021/3800

Одноразовый конус для спермы, 100 шт./упаковка [5] 13018/0100

Держатель форсунок, наполнения и отсасывания, штабелируемый, нержавеющая сталь [6] 13017/0050



1



2



3



4



5



6

EasyCoder



Чистая и не оставляющая запаха маркировка соломинок без чернил и растворителей.

Описание продукта

- Термотрансферный принтер с автоматической подачей соломинок (производительность: 3600 соломинок в час) для мгновенной стойкой печати
- Неповторимая аккуратная и четкая печать на соломинках 0,5 мл и 0,25 мл; легкий и быстрый переход между различными размерами соломинок
- Печать до 3-х строк на соломинку, включительно штрихкоды, логотипы и специальные символы
- Управление через ПК с помощью понятного и удобного программного обеспечения Minitube
- Легкость в работе и техническом обслуживании
- Габаритные размеры (Д x Ш x В): 660 x 370 x 310 мм (без ПК)
- Источник питания: 110 V/50-60 Hz или 230 V/50-60 Hz



Принтер EasyCoder 13038/0000

Красящая лента, черная 13038/0010

MultiCoder

Быстрая и удобная машиночитаемая маркировка лабораторных изделий.

Описание продукта

- Высокое разрешение струйной печати
- Система защиты печатающей головки (предотвращает высыхание чернил)
- Широкий выбор насадок
- Не требуются дополнительные инструменты для смены насадок
- Предварительно разработанные макеты печати
- Загрузка файлов Excel для печати
- Простое редактирование макетов печати с помощью функции перетаскивания



+ Преимущества для Вас

- + Высокая гибкость: встроенная система струйной печати может маркировать различные материалы, такие как пластик, стекло или алюминий
- + Подвижная направляющая и уникальная, простая в использовании несущая система обеспечивают быструю замену маркируемых объектов и быстрый рабочий процесс
- + Простая печать информации на минимальном пространстве, включая текст, штрихкод, QR-код и логотип

Принтер MultiCoder 13145/0000



Уникальный, многофункциональный и экономичный

Быстрая и простая печать на целом ряде предметов: соломинках для спермы, гоблетах, кассетах, культуральных чашках, макросоломинках, шприцах, криопробирках и многих других.

Соломинки для спермы

На протяжении более 30 лет соломинки Minitube используются во всем мире в качестве стандарта для замораживания спермы. Процесс контроля качества, технологии производства и выбор материалов Minitube гарантируют **надежность продукта**, который неизменно превосходит отраслевые стандарты.

В **экосоломинках** внутренняя часть пробки короче в сравнении с пробками стандартных соломинок и тем самым **абсорбируется на 3-4 % меньше спермиев**. Они идеально подходят для ночной эквilibрации спермы при пониженных температурах. **Экосоломинки** применяются аналогично стандартным соломинкам для спермы.



По запросу возможна предварительная маркировка соломинок.

	Соломинка 0,5 мл	Экосоломинка 0,5 мл
прозрачная	13408/0010	13408/3010
красная прозрачная	13408/0044	13408/3044
зеленая прозрачная	13408/0054	13408/3054
синяя прозрачная	13408/0064	13408/3064
серая прозрачная	13408/0074	13408/3074
желтая прозрачная	13408/0094	13408/3094
розовая	13408/0100	13408/3100
бирюзовая	13408/0130	13408/3130
оранжевая прозрачная	13408/0144	13408/3144
бежевая прозрачная	---	13408/3184
фисташковая прозрачная	13408/0204	13408/3204
белая	13408/0210	13408/3210

Макросоломинки

Макросоломинки, 100 шт./упаковка [1]

2,5 мл, длина: 140 мм	13441/0133
5 мл, длина: 140 мм	13441/0280

Укупорочные шарики для макросоломинок,
1000 шт./упаковка [2]

металлические	13440/0000
стеклянные, синие	13440/0100
стеклянные, зеленые	13440/0200
стеклянные, красные	13440/0600
стеклянные, желтые	13440/0900



6 ЗАМОРАЖИВАНИЕ И КРИОХРАНЕНИЕ СПЕРМЫ



Замораживатели

Замораживатели Minitube являются компактными и простыми в обращении устройствами. Они состоят из высококачественной пенополистироловой коробки, внутреннего контейнера из нержавеющей стали и плавучей рамки. Контейнер из нержавеющей стали заполняется жидким азотом. Плавающая на поверхности азота рамка позволяет соломинкам 0,5 мл или 0,25 мл находиться на нужном расстоянии от азота во время первого этапа охлаждения. Затем соломинки вручную погружаются в азот.

- Возможность регулирования расстояния между соломинками и поверхностью жидкого азота
- Подходит для работы с соломинками 0,5 мл и 0,25 мл
- Низкий расход азота
- Коробка из высококачественного пенополистирола и внутренний контейнер из нержавеющей стали
- Удобная транспортировка

Замораживатели

на 20 соломинок [1]	15043/0636
на 90 соломинок [2]	15043/0736

Принадлежности

Блок загрузки к плавучей рамке на 90 соломинок	15043/0738
Дополнительные рамки	
для замораживателя на 20 соломинок [3]	5015043/0600
для замораживателя на 90 соломинок [4]	5015043/0900



Автоматический замораживатель IceCube 14S

Большой вариант:
IceCube 14M



Замораживатель с компьютерным управлением, удобным вводом данных и автоматической записью кривой замораживания.

Описание продукта

- Диапазон температур: от +40°C до -180°C
- Скорость охлаждения: от 0,01 до 60°C/мин
- Скорость нагрева: от 0,01 до 15°C/мин
- Точность отображения: 0,01°C
- Измерение температуры с помощью 2-х термометров сопротивления Pt-100
- Вместимость: прибл. 900 соломинок 0,5 мл на цикл замораживания
- Программное обеспечение для программирования и контроля замораживания, сохранение в памяти неограниченного количества программ и файлов обработки, цветной графический дисплей с отображением всех температурных кривых, широкие возможности настройки параметров
- Размеры: 540 x 420 x 520 мм (Д x Ш x В), вес: 29 кг

IceCube 14S, с комплектом соединителей для контейнера с жидким азотом

с планшетом 10" [1]	16821/3000
с сенсорным монитором 12"*	16821/2000
без монитора*	16821/1000


Принадлежности

Рампа для IceCube 14S, на 36 соломинок [2]	16821/5036
Загрузочный блок для рампы	16821/5037
Приспособление для загрузки рампы IceCube 14S [3]	16821/5030
Проставка для IceCube 14S [4]	16821/5018
Контейнер высокого давления для жидкого азота, 60 л	16820/1900
Основание на роликах для контейнера для жидкого азота	16501/0204
Щипцы для рампы [5]	16821/5031

Замораживание эмбрионов с IceCube:

Функция автосидинга для замораживания эмбрионов	16821/5019
Рампа для автосидинга (с проставкой) [6]	
вместимость: 35 соломинок 0,5 мл	16821/5020
вместимость: 43 соломинки 0,25 мл	16821/5021

* Для подключения к ПК или ноутбуку.

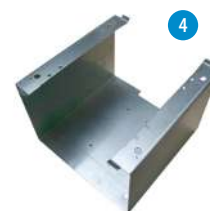

Замораживание и
криохранение спермы

Гоблеты

Гоблеты [1]

Ø 7,1 мм	белый	16907/0071
Ø 10 мм	белый*	16910/0010
Ø 13 мм	белый*	16913/0133
Ø 35 мм	белый	16935/0135
Ø 53 мм	белый	16953/0133
Ø 65 мм	белый	16965/0133
шестигранный	белый	16970/0136

* Предлагаются различных цветов.

Принадлежности

Держатели гоблетов [2]

для 2 гоблетов 7,1 мм	16965/6171
для 2 гоблетов 10 мм	16965/6000
для 2 гоблетов 13 мм	16965/6013

Маркировочные этикетки для держателей гоблетов, различных цветов 13422/00xx

Разделитель гоблетов, 12 x 6,5 см, 100 шт./упаковка [3] 16967/0065

Идентификационный стержень, длина 140 мм

для соломинок 0,25 мл	16903/0210
для соломинок 0,5 мл	16903/1210

Воронка из нержавеющей стали для гоблетов 65 мм [4] 15004/0402



Кассеты для хранения соломинок

	Треугольные кассеты [1]*		Плоские кассеты [2]**	
	длинные	короткие	длинные	короткие
зеленые	16981/01351	16981/01201	16980/1201	16980/0601
синие	16981/01361	16981/01211	16980/1202	16980/0602
желтые	16981/01371	16981/01221	16980/1203	16980/0603
красные	16981/01381	16981/01231	16980/1204	16980/0604
белые	16981/01391	16981/01241	16980/1205	16980/0605
бежевые	16981/01401	16981/01251	16980/1206	16980/0606
оранжевые	-	-	16980/1207	16980/0607

* Для 10/20 соломинок 0,5 мл или 28/56 соломинок 0,25 мл.

** Для 3/6 соломинок 0,5 мл или 6/12 соломинок 0,25 мл.

Криососуды для хранения

- 6 канистр 279 x 41 мм
- Время статического хранения: 175 дней
- Диаметр горловины: 55 мм
- Общая высота: 690 мм
- Вместимость: 3732 x 0,5 мл соломинки
- Вес (заполненный): 42 кг

MVE криососуд ET 35, объем: 36 л

16503/3606



Другие варианты и размеры криососудов



Vapor Shipper

- 1 канистра 278 x 67 мм
- Время статического хранения: 13 дней
- Скорость статического испарения: 0,26 л/день
- Вместимость: 938 соломинок 0,25 мл / 440 соломинок 0,5 мл (1 уровень)
- Диаметр горловины: 70 мм
- Высота: 468 мм
- Диаметр: 222 мм

MVE Vapor Shipper SC 4/2 V, объем: 3,6 л [1]

16504/2001

- 1 канистра 278 x 46 мм
- Время статического хранения: 21 день
- Скорость статического испарения: 0,20 л/день
- Вместимость: 452 соломинки 0,25 мл / 210 соломинок 0,5 мл
- Диаметр горловины: 51 мм
- Высота: 492 мм
- Диаметр: 222 мм

MVE Vapor Shipper SC 4/3 V, объем: 4,3 л [2]

16504/3001

Защитная транспортировочная упаковка, для Vapor Shipper, изготовлена из пластика, отвечает требованиям IATA [3]

16504/3010



CryoCube™ Dry Shipper

- Одноразовый контейнер
- 1 канистра 127 x 35 мм
- Время статического хранения: 5 дней
- Вместимость: 182 соломинки 0,25 мл / 88 соломинок 0,5 мл
- Диаметр горловины: 35 мм
- Высота: 305 мм
- Диаметр: 305 мм


CryoCube™ Dry Shipper

16505/0100



Замораживание и криохранение спермы

7 ОСЕМЕНЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА

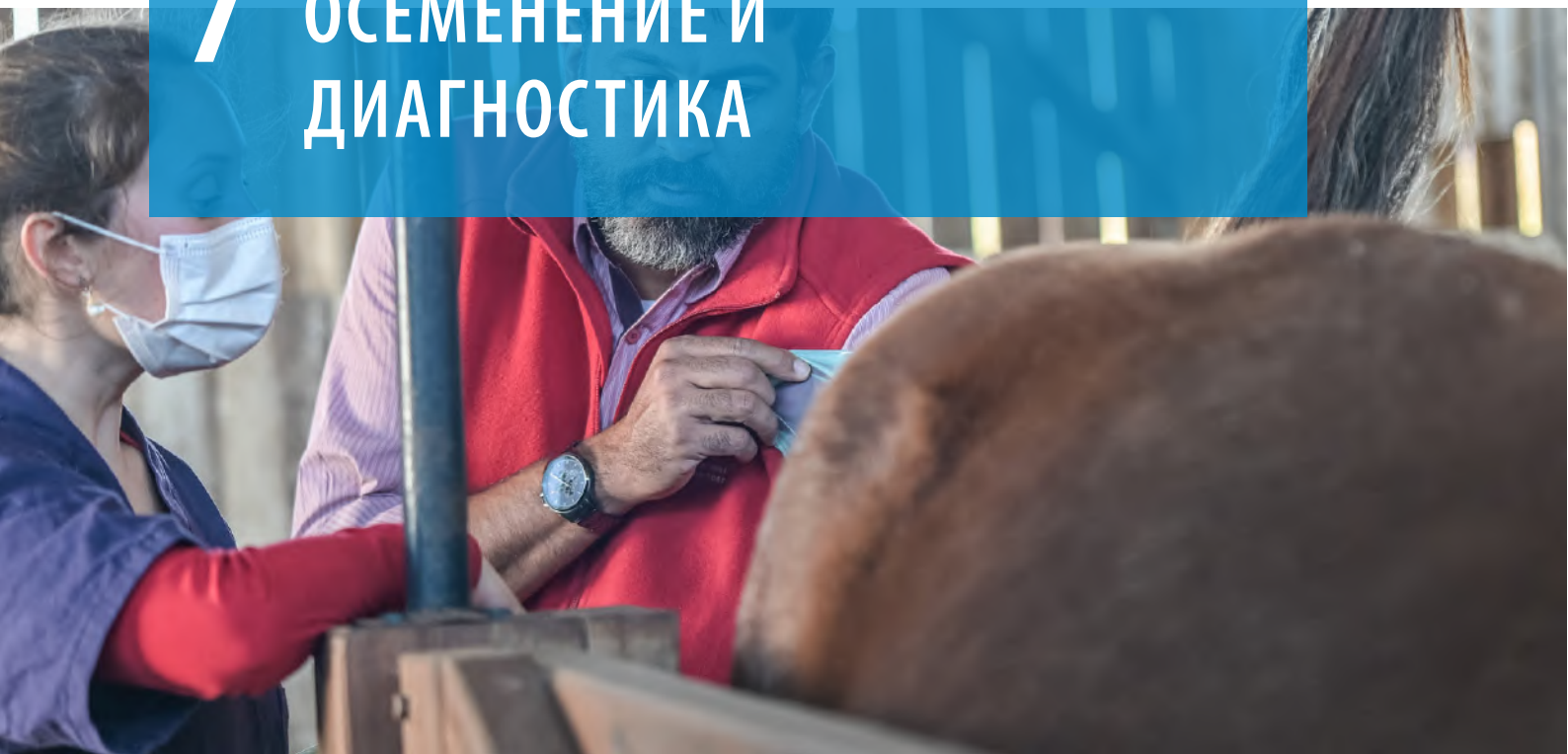


■ Универсальные пипетки для ИО

⚙ Описание продукта

- Подходят для осеменения как свежей, так и замороженной спермой в соломинках
- Гладкий круглый наконечник для мягкого введения
- Гибкий стержень облегчает работу; длинные пипетки с ультрагибким стержнем для глубокого внутриматочного осеменения
- Наконечник с внутренним конусом для соломинок 0,5 мл обеспечивает 100% введение спермы напрямую в матку
- При использовании стилета для ИО с соломинками 0,5 мл с одной и той же пипеткой можно поочередно использовать несколько соломинок
- Пальцевый упор с адаптером для присоединения шприца и макросоломинок

Универсальные пипетки

длина: 57 см, 5 шт./упаковка	17209/0005
длина: 57 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная	17209/0001
длина: 65 см, 5 шт./упаковка	17209/1165
длина: 65 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная	17209/1265
длина: 75 см, 5 шт./упаковка	17209/1175
длина: 75 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная	17209/1275

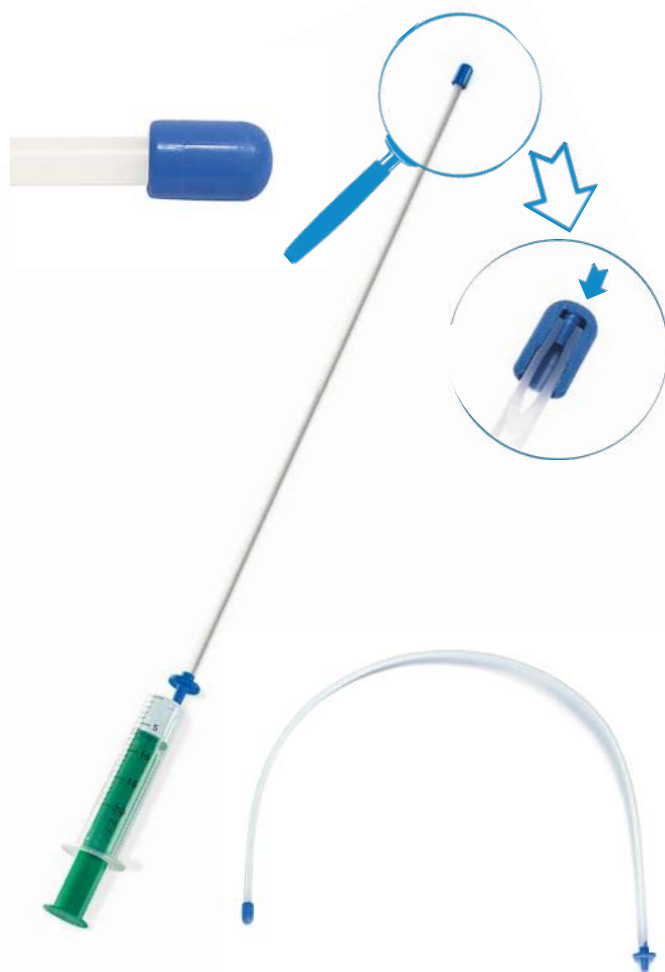

Пипетка для глубокого ВМО с внутренним катетером

Для глубокого внутриматочного ИО малыми объемами спермы, если соломинки не могут быть использованы. Пипетка оснащена внутренним катетером для уменьшения объема канала, по которому проходит сперма.

Пипетка для внутриматочного ИО с внутренним катетером

длина: 65 см, 5 шт./упаковка	17207/1165
длина: 65 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная	17207/1265
длина: 75 см, 5 шт./упаковка	17207/1175
длина: 75 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная	17207/1275




Гибкий стилет

Гибкий стилет для глубокого внутриматочного или транцервикального осеменения лошадей с помощью универсальной пипетки и соломинок 0,5 мл. Сперма из соломинок 0,5 мл попадает непосредственно в матку, что обеспечивает 100% введение спермы. Стиллет изготовлен из нержавеющей стали и оснащен двумя выступами для извлечения пустых соломинок, что позволяет поочередно использовать несколько соломинок с одной и той же пипеткой.

Гибкий стилет

длина: 57 см	17209/1057
длина: 65 см	17209/1065
длина: 75 см	17209/1075

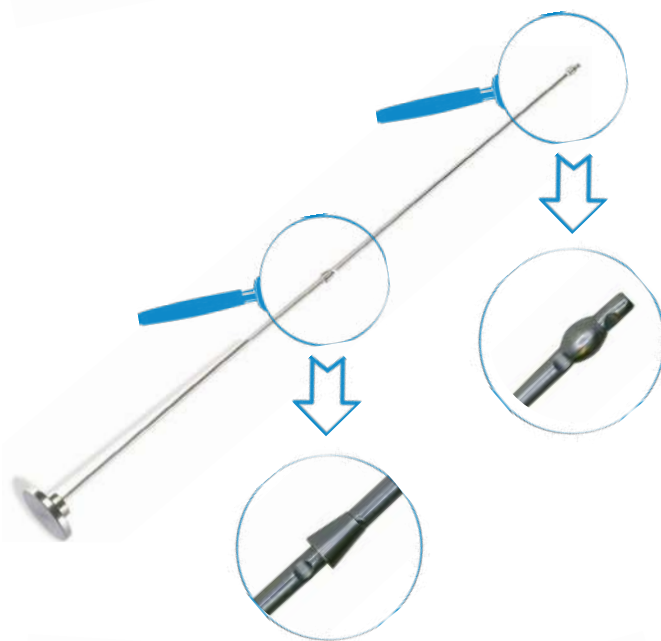

Осеменение и диагностика

Пипетка для осеменения свежей спермой

Пипетка для ИО с соединением Luer, 60 см, закругленный наконечник, 25 шт./упаковка [1]

17209/2000

Переходная канюля для шприца для спермы, длина: 13 см, 10 шт./упаковка [2]

17229/0020



Санитарные чехлы

Санитарные чехлы используются во время ИО и ПЭ для защиты инструментов от загрязнения во время прохождения через влагалище до достижения шейки матки.

Санитарные чехлы для искусственного осеменения, длина: 46 см, 80 шт./рулон [1]

17028/0100

Санитарные чехлы для переноса эмбрионов, длина: 53 см, 80 шт./рулон [2]

19271/0080



Оттаиватель MiniThaw

- Переменная установка температуры (от окружающей среды до +50°C)
- Цифровое отображение фактической температуры
- Подъемник для соломинок имеет три отделения и позволяет размораживать до 10 соломинок одновременно (0,5 мл или 0,25 мл)
- Подключение к бортовому разъему 12-24 V и к сети 110-230 V через USB-C кабель или адаптер
- Прочность и простота в обращении

MiniThaw оттаиватель с USB-C кабелем [1] 17048/0001

Принадлежности

Автомобильный USB-адаптер для подключения к бортовому разъему 12-24 V 17048/0420

USB сетевой преобразователь для подключения к сетевой розетке 110-230 V 17048/0430

Подставка металлическая для MiniThaw [2] 17048/0005

Цифровой таймер, с магнитом, батарейка в комплекте [3] 17048/0006

Внешний аккумулятор (Powerbank) для оттаивателя MiniThaw [4] 17048/0410



Резак MiniCutter

- Точный срез соломинок 0,25 мл и 0,5 мл
- Обеспечивает прямой срез на строго необходимой длине, что помогает избежать потери спермы
- Эргономичная форма
- Простая очистка

MiniCutter для соломинок 17062/0010



Перчатки для осеменения

Эластичные и прочные перчатки из перерабатываемого полиэтилена обеспечивают превосходные ощущения в сочетании с хорошей защитой. Уменьшенный диаметр перчатки позволяет удерживать ее на руке не снижая ее прочности.

Перчатки для осеменения, пальцев, длина до плеча

чувствительные, зеленые, 100 шт./упаковка [1] 17080/0015

сверхчувствительные, прозрачные, 100 шт./упаковка 17080/0050

сверхчувствительные, прозрачные, индивидуально упакованные, стерилизованные, 50 шт./упаковка 17080/0052

зеленые, индивидуально упакованные, стерилизованные, 50 шт./упаковка [2] 17080/0250



Тупфер для взятия мазка из матки

С пипеткой для введения с перфорированным наконечником для взятия проб без риска загрязнения. Защитная оболочка разрывается в определенном месте. В комплект входят два колпачка для транспортировки тупфера в лабораторию. Мазок может быть помещен непосредственно в транспортировочную среду AMIES для предотвращения высыхания образца.

Тупфер для взятия мазка из матки, индивидуально упакованный, стерилизованный, 10 шт./упаковка

с транспортировочной средой AMIES

17214/2951

без транспортировочной среды

17214/2950



Цитологическая щетка

Для взятия клеток из матки кобылы для проведения цитологических исследований и немедленной оценки мазка.

Цитологическая щетка, индивидуально упакованная, стерилизованная, 10 шт./упаковка, с транспортировочным боксом для предметных стекол

17214/2960



Рефрактометр для молозива

Используется для определения уровня иммуноглобулина в молозиве кобылы для обеспечения достаточного питания новорожденного жеребенка. Молозиво высокого качества должно быть заморожено для использования в экстренных случаях. Для проведения теста достаточно лишь одной капли молозива. Нет необходимости в батарейках и расходных материалах. Очень простой в обращении.

Рефрактометр для молозива, с кейсом

24400/0150



Спекулы и щипцы

Одноразовый speculum, из картона с отражающим алюминиевым покрытием внутри, гладкий передний край для мягкого введения, внутренний диаметр: 3 см, длина: прибл. 43 см, стерилизованный, 100 шт./упаковка [1]

17210/0000

Спекулум Поланского, нержавеющая сталь [2]

17210/4200

Цервикальные щипцы Гётце, нержавеющая сталь, 54 см

с источником света [3]

17212/0055

без источника света

17212/0054

Щипцы для биопсии, ручка: 60 см, бранши: 4 x 28 мм, нержавеющая сталь [4]

17214/5066

Металлический контейнер, с крышкой и ручками для стерилизации и транспортировки speculuma и цервикальных щипцов, 560 x 230 x 120 мм (Ш x В x Г) [5]

17215/0149

Светодиодный фонарик, питание от аккумулятора (до 250 ч), с зажимом для крепления, длина: 96 мм [6]

17210/0010



8 ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ И ОРУ



Катетеры для вымывания эмбрионов для кобыл

Все размеры в сочетании с Y-образным соединением обеспечивают большой поток промывочной среды. Баллон (100 мл) в надутом состоянии плотно закрывает цервикс.


Описание продукта

- В индивидуальной упаковке, стерилизованный
- Длина: прибл. 90 см
- Соединение Foley, большие передние отверстия
- СН 28: закрытый наконечник, СН 32 и СН 36: открытый конец
- Изготовлен из силикона, стерилизуемый

Катетеры для вымывания эмбрионов

СН 28	19009/0028
СН 32	19009/0032
СН 36	19009/0036

Удлинитель для промывочного катетера, высокая скорость потока, длина: прибл. 60 см, с конусообразным наконечником 19009/0041

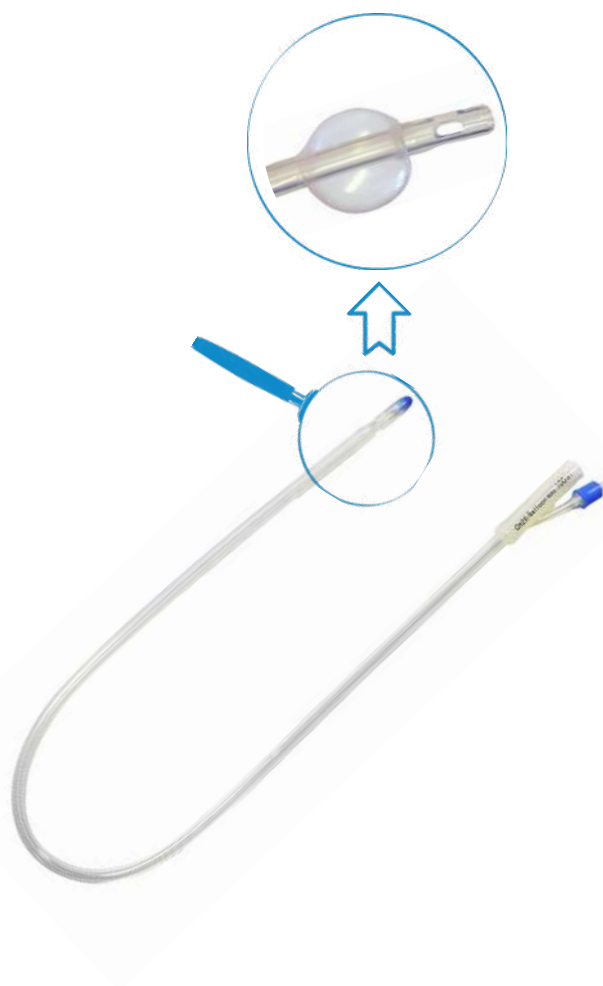

■ Фильтры для вымывания эмбрионов

- Надежная фиксация крышки во время вымывания и легкое снятие после (крышка без резьбы)
- Встроенная поисковая чашка с координатной сеткой облегчает поиск эмбрионов (размер ячеек идеально подходит для эмбрионов всех размеров)
- Также подходят для фильтрации ооцитов после ОРУ
- Фильтровальная сетка не высыхает, так как остается в контакте с жидкостью
- Избыток жидкости контролируется и удаляется через выводную трубку с зажимом (достаточно большой диаметр входного отверстия обеспечивает необходимую скорость потока среды)
- Возможно соединение со всеми Y-образными трубками
- Стерилизованы и абсолютно герметичны

■ EmSafe

- Поддерживает постоянное количество промывочной жидкости в чашке на уровне 60 мл
- Вентиляционное отверстие в крышке и воздушный выход оснащены фильтром, который надежно удерживает эмбрионы в системе

Фильтр EmSafe

19010/6000

■ Miniflush®

- Вертикальная система для вымывания эмбрионов с большой площадью фильтрующей поверхности
- Поддерживает постоянный объем 20 мл в течение всей процедуры промывки
- Благодаря своей неглубокой форме поисковая чаша идеально подходит для использования со всеми микроскопами

Фильтр Miniflush®

19222/2000

■ Промывочные шланги

Одноразовый Y-образный шланг с зажимом для использования в сочетании с любым катетером. Шланг изготовлен из очень гладкого, гибкого материала. Конец для соединения с фильтром не требует дополнительного адаптера. Стерилизованный, 1 шт./упаковка.

Y-образный промывочный шланг, большой просвет, конусообразный наконечник

19982/0202

Простота и безопасность использования

Универсальные фильтры двойного назначения и поисковые чашки, не требующие контроля во время процедуры вымывания. Эмбрионы извлекаются непосредственно из фильтрующей чашки.



EquiFlush

Готовая к использованию среда для вымывания эмбрионов лошадей. Содержит буферы, BSA или PVA и антибиотики.

- Предлагается в пластиковых бутылках и инфузионных пакетах
- Бутылки с резиновой пробкой для легкого подсоединения Y-образной трубки и петель на дне для подвешивания
- Инфузионный пакет с конфигурацией 3-х портов и герметичными портами для гигиенического выведения жидкости

EquiFlush

с BSA и антибиотиками, пакет 1 л	19982/6201
с BSA и антибиотиками, пакет 2 л	19982/6202
с BSA и антибиотиками, бутылка 1 л	19982/6205
с PVA и антибиотиками, пакет 1 л	19982/6211
с PVA и антибиотиками, пакет 2 л	19982/6212
с PVA и антибиотиками, бутылка 1 л	19982/6213



Среда для
вымывания

EquiHold

Готовая к использованию среда для выдерживания эмбрионов лошадей. Содержит буферы, глюкозу, пируват, BSA, аминокислоты, факторы роста и антибиотики. Применяется для:

- Выдерживания эмбрионов при комнатных условиях
- Транспортировки эмбрионов
- Промывки и полоскания эмбрионов
- Загрузки эмбрионов для пересадки в животное-реципиента

EquiHold, 3 x 5 мл

19982/6250



Среда для
выдерживания

Набор Equine VIT

Набор для витрификации для прямого переноса эмбрионов лошадей. Набор содержит все необходимое для витрификации 3-х эмбрионов:

- Среда для витрификации (3 x VS1, 3 x VS2, 3 x VS3)
- 3 разбавителя
- 1 шприц 1 мл для наполнения соломинок
- 1 наконечник для пипетки (адаптер для соломинки)
- 4 чашки с 5 лунками
- 10 стерилизованных соломинок 0,25 мл для витрификации
- 3 идентификационных стержня
- 1 алюминиевый держатель гоблетов
- 3 гоблета 10 мм

Набор Equine VIT

19982/6251



Стереомикроскопы

- Зеркало с LED освещением для оптимальной визуализации блестящей оболочки (zona pellucida)
- Общее увеличение от 10х до 70х
- 2 окуляра 10х

Стереомикроскоп, 110 V/60 Hz или 230 V/50 Hz

бинокулярный	12014/0000
тринокулярный	12014/1000



Контроль температуры

Нагревательный столик, для установки над осветительным элементом стереомикроскопа, 180 x 180 x 10 мм, необходим блок управления температурой [1]

12057/0600

Блок управления HTi 50, для нагревательного столика, свободная настройка температуры, цифровой дисплей [2]

12057/0100

Подставка для блоков управления HTi и небольших нагревательных плиток (1 шт.) [3]

12057/0080

Лабораторная нагревательная плитка, обогреваемая площадь: 470 x 260 мм, заданная температура (+37°C), встроенный блок управления и внешний источник питания [4]

12055/0010



Обработка эмбрионов

5-луночная чашка с крышкой, стерилизованная, с закругленными краями, MEA тест каждой партии, 4 шт./упаковка [1]

19021/0001

Steripette, 60 мм, в индивидуальной упаковке, стерилизованная, для использования с инсулиновым шприцем объемом 1 мл, 50 шт./упаковка [2]

19025/0050

Одноразовый шприц, 1 мл, соединение Luer, стерилизованный, полностью пластиковый, сперматодоботный, 100 шт./упаковка

19801/0001

Микропипеттор, простое и точное пипетирование с помощью колесика, для всех размеров капиллярных трубок объемом до 1 мл [3]

19022/0002

Стеклянные капилляры, 250 шт./упаковка

20 µl	19022/0020
50 µl	19022/0050

Чашка Петри

диаметр 35 мм	19020/0035
диаметр 94 мм	19020/0094
диаметр 145 мм	19020/0145
с сеткой, диаметр 65 мм [4]	19020/2065




Перенос эмбрионов с использованием соломинок 0,5 мл

Чехол для ПЭ лошадей, индивидуально упакован, стерилизованный, 10 шт./упаковка	
с фронтальным отверстием [1]	19290/1050
с боковым отверстием [2]	19290/1060
Упругий стилет, с белым пальцевым упором	19290/1049
Гибкий стилет, длина: 65 см	17209/1065
Пальцевый упор и кольцо, для использования с чехлами для ПЭ лошадей и стилетом для ИО [3]	19290/1048
Пипетка для ПЭ лошадей, одноразовая, гибкая, металлический наконечник с боковым отверстием, стерилизованная, 1 шт./упаковка [4]	19290/1065
Упругий стилет, с белым пальцевым упором	19290/1049
Гибкий стилет, длина: 65 см	17209/1065

Опция А:
19290/1050 или 19290/1060
+
19290/1049 или 17209/1065
+
19290/1048

Опция В:
19290/1065
+
19290/1049 или 17209/1065

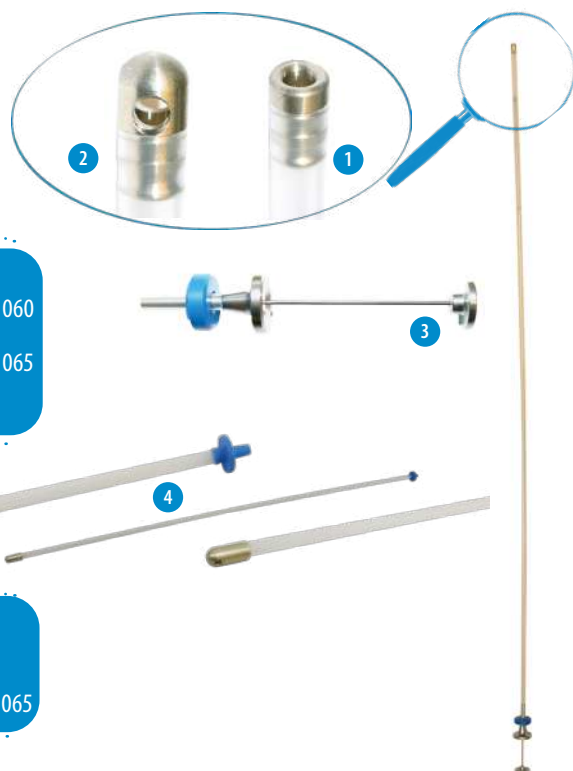

Перенос эмбрионов с использованием соломинок 0,25 мл

Набор DIUI для глубокого ВМО и ПЭ, стилет для введения, гибкий стилет для ИО/ПЭ, пальцевый упор, два фиксационных кольца, для помещения эмбрионов глубоко в рог матки с помощью соломинок 0,25 мл и чехлов для глубокого внутриматочного ИО	17015/0100
Чехол для глубокого внутриматочного ИО для соломинок 0,25 мл	
10 шт./упаковка	17015/0650
1 шт./упаковка, стерилизованный	17015/0660



Перенос эмбрионов > 8 день

Пипетка с большим внутренним диаметром для ИО/ПЭ лошадей, длина: 65 см, закругленные концы, подходит к шприцу с соединением Luer, стерилизованная	
1 шт./упаковка	19290/1101
25 шт./упаковка	19290/1105



Соломинки

Соломинка 0,25 мл, 133 мм, прозрачная, стерилизованная, 10 шт./упаковка

без упупорочного шарика	19042/0010
со стеклянным упупорочным шариком	19041/0010
с идентификационным стержнем (различных цветов) [1]	19040/0010

Соломинка 0,5 мл, прозрачная, стерилизованная

133 мм, с упупорочным шариком, 1 шт./упаковка [2]	19043/0001
133 мм, с упупорочным шариком, 10 шт./упаковка	19043/0010
133 мм, без упупорочного шарика, 1 шт./упаковка	19043/1011
133 мм, без упупорочного шарика, 10 шт./упаковка	19043/1010
90 мм, без пробки, 10 шт./упаковка	19044/9110

Идентификационный стержень для ПЭ, для упупорки соломинок 0,25 мл, 100 шт./упаковка, белый (предлагается различных цветов) [3]

Маркер для соломинок, черный, очень тонкий, спиртоустойчивый



CryoSealer

Ручное устройство для запайки соломинок 0,25 мл и 0,5 мл ультразвуковым методом. Ультразвуковая запайка обеспечивает идеальную и равномерную герметизацию каждой соломинки. Источник питания: 100-240 V AC / 50-60 Hz.

CryoSealer 13135/0000



Устройство ручной запайки

Ручное устройство запайки соломинок, надежная герметизация всех видов соломинок методом тепловой запайки (также в парах жидкого азота). Состоит из запаячных щипцов, адаптированных для соломинок, и блока управления для изменения уровня нагрева.

Устройство ручной запайки 13135/2500



Устройство для ручной упупорки соломинок

Упупорка каждой соломинки 0,5 мл шариком по отдельности.

Устройство для ручной упупорки соломинок 13136/0100



Ультразвуковой сканер Versana Active

- Портативная, простая в использовании ультразвуковая система для сканирования линейным и конвексным датчиком
- Высококачественная система документирования и передачи данных
- Режимы отображения: В-режим, М-режим
- Импульсно-волновой цветной доплер с автоматическим расчетом
- Триплексный режим в реальном времени
- Визуализация с кодированием гармоник, сложносоставное многолучевое сканирование (CrossXBeam), подавление зернистости в режиме реального времени (SRI-HD) для исключительного качества изображения
- Возможности подключения: USB, HDMI, Ethernet
- Монитор: 15,6" LCD с высоким разрешением
- Размеры: 39 x 5,8 x 36,2 см (Ш x В x Г)
- Вес: 5 кг с батареей
- Источник питания: 100-240 VAC/50-60 Hz



Ультразвуковой сканер Versana Active	23360/0000
Конвексный секторный датчик, 6,0-10,0 MHz	23360/0002
Эндоэктальный линейный датчик, 3,5-10,0 MHz	23360/0003

Ультразвуковой сканер Minitube 3.0 Plus

Портативный ультразвуковой сканер для акушерских измерений у различных видов животных с точным автоматическим расчетом гестационного возраста.

- В комплект входят планшет 11", блок питания, ремешок для переноски, гель ReproJelly и зарядное устройство, размещенные в прочном кейсе
- Совместим с любым устройством на Android с портом USB-C
- Поддерживает несколько режимов сканирования, включая В-режим, В|В-режим, М-режим, PW- и CF-Допплер с автоматическим расчетом параметров
- Встроенный аккумулятор обеспечивает длительную работу (до 6 часов) с быстрой зарядкой (2-3 часа)
- Большой антибликовый дисплей обеспечивает четкую визуализацию анатомических структур при любом освещении
- Компактный, легкий и водонепроницаемый (IPX7)

Ультразвуковой сканер Minitube 3.0 Plus [1]	23500/2005
Линейный ректальный датчик, 6,5 MHz [2]	23500/2106



EquiPlus среда для ОПУ

Готовый к использованию раствор, содержащий BSA и гепарин для предотвращения свертывания крови во время процедуры ОПУ.

EquiPlus среда для ОПУ, 500 мл

с PVA	19982/2283
с BSA	19982/2281



ОПУ насос для аспирации и промывания фолликулов

ОПУ насос для аспирации и промывания фолликулов, забора яйцеклеток у кобыл в прочном чемодане.

- Два насоса и нагревательный блок объединены в один модуль для удобной аспирации ооцитов
- Уровень давления и гистерезис программируются пользователем
- Насос приводится в действие педальным переключателем
- ЖК-дисплей и цифровые контроллеры позволяют легко регулировать и контролировать вакуум аспирации и температуру нагревательного блока
- Комплект поставки: 1х бутылка 250 мл, 5х силиконовых шлангов, 5х инъекционных шлангов 115 мм, 5х инъекционных шлангов 30 мм, 5х аспирационных шлангов, 2х гидрофобных фильтра

ОПУ насос для аспирации и промывания фолликулов [1]

220-240 V/50-60 Hz	23362/0002
110-115 V/50-60 Hz	23362/0003

Принадлежности

Силиконовая пробка, плотно соединяется с пробирками 50 мл, 1 шт./упаковка [2]	23360/1100
Одноразовый шланг, для трансвагинальной аспирации ооцитов у кобыл [3]	19009/4101
Гидрофобный фильтр [4]	23362/1015



Держатель ультразвукового датчика

- Держатель датчика оснащен направляющей для иглы и используется с двухпросветной иглой: два канала позволяют одновременно или поочередно осуществлять аспирацию и инъекцию жидкостей в фолликулы и из них
- Игла подсоединяется к насосу ОРУ и имеет эхогенную метку на наконечнике для лучшей визуализации при УЗ-исследовании
- Легкий, тонкий и эргономичный дизайн держателя обеспечивает удобство в обращении, а оптимальная геометрия способствует повышению благополучия животных
- Съемная ручка может быть установлена с удобной для использования стороны
- Оптимизированный выход для двухпросветной иглы позволяет отлично ее контролировать

Держатель ультразвукового датчика для [1]

микроконвексного датчика Mindray C11-3s	19009/3095
микроконвексных датчиков BCF 65C15EAV и 6C2S	19009/3096
микроконвексного датчика Sonosite C11	19009/3097
микроконвексных датчиков Esaote SC3123, mC 3-11	19009/3098
микроконвексного датчика GE 8C-RS	19009/3099

(⚙️) Принадлежности


Двухпросветная аспирационная игла, 12 G, 25", состоит из внешней иглы и внутренней канюли [2]	19009/3105
Запасная игла, 12 G, 25"	19009/3106
Защитный чехол для держателя датчика, 144 шт./упаковка	23360/1260
Транспортировочный кейс для держателя датчика [3]	23360/0200



По запросу также предлагаются держатели для других датчиков.



9 ТРЕНИНГИ И СЕРВИС

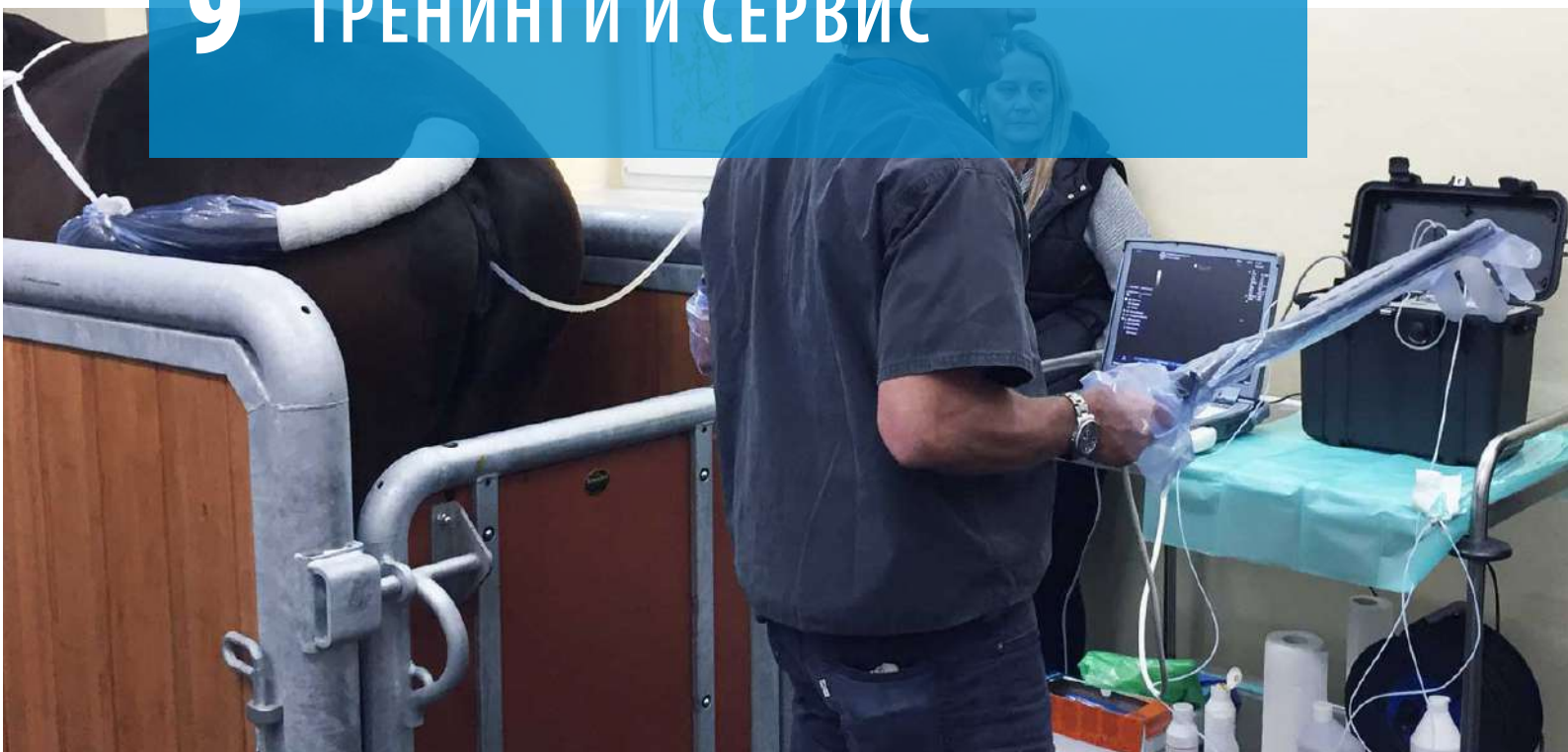

Тренинги и семинары

Компания Minitube предлагает специализированные тренинги по продуктам и образовательные семинары в области технологий вспомогательной репродукции по всему миру. Индивидуальные и групповые семинары по искусственному осеменению, переносу эмбрионов, анализу спермы, обработке спермы и т.д. проводятся в соответствии с клиентским спросом.

Все учебные курсы сочетают в себе теоретические и практические занятия. Наши преподаватели – авторитетные специалисты в области вспомогательного воспроизводства животных. Компания Minitube тесно сотрудничает с ведущими конными заводами, университетами и исследовательскими центрами. Накопленный опыт и знания воплощаются в наших семинарах, на которых демонстрируются новейшие технологии и практики, а также проводится обучение участников.

Курсы представляют собой интерактивные семинары, где презентации, обсуждения, демонстрации и практические занятия дополняют друг друга. На тренингах Minitube даются полезные советы по поиску и устранению неисправностей, а участники курсов получают пользу от практического обучения. Кроме того, участники получают ценную документацию и сертификат об обучении. Тренинги Minitube очень гибкие и проводятся в компании Minitube, на площадках партнеров, заказчиков и виртуально.

Мы с удовольствием подберем для Вас оптимальный вариант обучения. Пожалуйста, свяжитесь с нами: seminar@minitube.de

Мобильный лабораторный сервис

Компания Minitube Middle East предлагает уникальный профессиональный лабораторный сервис для клиентов, в частности, в отдаленных районах. Мобильная лаборатория представляет собой фургон, оснащенный высококачественным оборудованием Minitube для анализа и сохранения/замораживания спермы или эмбрионов животных.

Minitube Middle East предлагает свои услуги клиентам в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Омане, в регионах, которые иначе не имели бы доступа к профессиональной лаборатории по консервации спермы и эмбрионов.

Для получения более подробной информации об услуге, а также для обсуждения возможностей создания собственной мобильной лаборатории обращайтесь к нам: minitube@minitube.de





MINITUBE INTERNATIONAL

Предоставление услуг в области репродуктивных технологий по всему миру

Minitube USA
800.646.4882
info@minitube.com

Minitub do Brasil
+55 51 3222 7876
minitub@minitube.com.br

Minitube India
+91 11 4309 0668
info@minitube-india.com

Minitube China
+86 185 1545 5770
info@minitube.cn

Minitub Ibérica
+34 977 845 397
info@minitub-iberica.com

Minitube Australia
+61 3 5342 8688
info@minitube.com.au

Minitube Central Europe
+421 377 877 915
mtce@minitube.sk

Minitube Canada
800.500.7978
info.canada@minitube.com

Minitube México
+52 442 246 73 46/47
info@mexitube.mx

Minitube Middle East
+971 426 68871
info.middle.east@minitube.com

Minitube Indonesia
+62 21 7591 75-96/94
info@minitube.co.id

Minitube International AG, Германия

+49 8709 9229 0
minitube@minitube.de

Follow us



www.minitube.com

