




牛

动物生殖技术

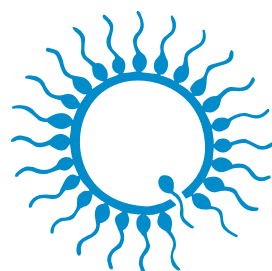

minitube

我们的知识, 您的成功

始于1970,品质保证



尊敬的客户：

Minitube公司始终坚持以提升产品质量为核心战略。

为了更好地服务于全球客户群，我们认识到产品可靠性、功能性和生产效率是公司持续盈利的关键因素。50多年来，Minitube公司为辅助生殖市场提供了强大、高性能和高质量的设备和耗材。

作为行业领导者，我们有责任提供优质安全的产品。因此，所有专有耗材和精液或胚胎保存液都是在我们自己的专用最先进设施中制造的，并由您可以信赖的反复内部测试和外部第三方质量保证测试提供支持。Minitube产品质量不是主观界定的，而是基于确凿的事实和几十年的成功记录。我们与供应商和客户的长期合作战略是我们全面质量方针的基础。这些长期的关系有助于建立信任和理解，以确保持续提高产品质量。

我们的服务团队也是如此，他们始终致力于提供行业内最好的服务。Minitube员工的专业知识和经验始终为客户服务。展望未来，我们承诺将一如既往，继续研发最佳产品，提供最佳服务。

Christian Simmet 博士
总裁





Minitube在线媒体库：
所有目录以不同语言数
字化提供

内容

1	实验室管理软件	02
2	精液采集	04
3	精液分析	08
4	精液稀释	12
5	细管处理和冷冻	16
6	授精和妊娠检测	31
7	胚胎移植与活体采卵/ 胚胎体外生产	37

1 实验室管理软件



■ 用iMale软件进行牛电子识别

无线iMaleRFID读取器和iMale标签打印机的组合可以安全读取动物耳标，并在精液采集区直接打印带有动物ID的条形码标签。打印的条形码标签可以粘贴在精液收集袋/杯子上，在实验室中使用Prism10 Bull可以安全地识别和处理精液。

- 可作为独立系统或和Prism 10 Bull联用
- iMale: 作距离: 30 cm, 加上装置长度: 65 cm
- iMale S: 作距离: 20 cm, 加上装置长度: 20 cm
- 从iMale读取器到标签打印机的无线数据传输的最大距离约为10 m
- 可以读取所有HDX和FDX-B转发器耳标

包括iMale RFID 读取器

iMale, 带内置充电器和外接电源 [1] 18001/0000

iMale S, 带内置充电器, 外接电源和手提箱 [2] 18001/0010

（附件

iMale 标签打印机 [3] 18001/0200

适用于iMale打印机的标签纸 18001/0210
41 x 25 mm, 一卷含425个标签 [4]



Prism10 Bull 实验室软件



PRISM10实验室软件使用动态用户界面, 体现出公牛精液生产的现代工艺流程和以产品为本的理念。

产品特点

- 流程化精液处理: 公猪标识、射精量(质量)、密度(密度仪或AndroVision®精子分析系统), 运动活力和形态(AndroVision®或手动), 评估和采精员识别等
- 数据可以连接到iMale, AndroVision®, SmartDispenser, MPP Quattro以及MiniJet printer(一体系统)
- 灵活的体系结构-可以从任何连接的计算机进行操作
- 以产品为中心的方法可以根据客户需要定制生产流程图: 每一次精液处理可以加工成不同的产品, 例如每一剂量的精子数量不同、包装不同、剂量不同等
- 可以灵活地从Excel导入和更新公猪信息
- 标记精液、采精和公牛特征的标签(例如丢弃原因、爬跨质量)
- 根据客户需要调整精液数据限值和警告, 帮助育种经理在生产过程中做出决策
- 实时数据可以远程访问, 例如订单填写、日常生产
- 进度、废弃精液等
- 具有可定制模板和导出功能的全面报告(PDF, Excel)
- 种畜带图表的面板: 概述平均遗传指数, 休息时间, 年龄, 每周可用精子产量, 畜栏使用和其他
- 可视化生产情况面板: 精液质量概述、精液生产中每个时期、每个公牛、每个过程的生产剂量等



+ 产品优势

- + 新开发的、现代的、基于网络的软件
- + 由经验丰富的开发团队提供长期支持
- + 轻松连接Minitube设备
- + 所有数据安全、可追踪, 确保输入错误最小化
- + 生产可靠性高, 运行不依赖于单个设备
- + 重要性能参数一览
- + 数据可以通过智能手机远程访问
- + 为不同客户定制不同产品
- + 生产时间概述
- + 生产与销售无缝连接
- + 所有生产数据的统计分析

Prism10 实验室软件订阅

12535/0005



2 精液采集



■ 电刺激采精仪

全套电刺激采精仪：耐用便携箱、控制单元、电池和变压器/充电器。使采精变得容易，尤其对难以刺激的高龄公牛。

- 采用数字显示，实际值调整步长为0.5V
- 完全便携，可遥控
- 手动可调节的运行/暂停比例
- 具有3种不同类型曲线的功率输出，可根据动物的大小和灵敏度进行平衡设置
- 电源：115 V/ 60 Hz 或230 V/ 50 Hz

电刺激采精仪 产品号码 [1]

11900/0000

（附件

探头

2.5", Ø 7 cm [2]

11900/0025

2", Ø 5.6 cm [3]

11900/0022

精液采集漏斗和固定器 [4]

11900/0250



牛精液采集用牛台

为技术人员和公牛提供舒适的采精过程, 可通过液压调节高度。

- 主体结构由坚固的镀锌钢板构成
- 采用高质量填料
- 蒙皮由增强PVC材料制成
- 内置座位供采精者使用

(+ 产品优势

- + 对不同体型的公牛可以通过液压调节假台畜高度
- + 轻松采集公牛精液
- + 可控制向前和向后运动带给公牛最舒适的感觉
- + 装置的后腿光滑且是分开的, 使公牛受伤的风险降为最低
- + 采用一次性卫生蒙皮, 以达到最理想的卫生效果

牛精液采集用牛台

移动式 [1]	11000/1000
固定式 [2]	11000/0500

(⚙️ 附件

一次性卫生蒙皮, 100张/盒	11000/0200
公牛假台畜塑料罩, 带有皮带	11000/0100



青年公牛专用采精假台畜

此设备是适用于青年公牛的固定式小型采精假台畜。装配端高度: 105厘米 (另一端高度为114厘米), 长度: 130厘米。

- 装配端两脚采用斜角设计, 为公牛和采精员提供额外的空间, 便于安装人工阴道, 从而确保双方的舒适体验
- 尤其对青年公牛而言, 这种低矮设计极大地提升了它们的舒适度
- 这款设备同样适用于年长公牛
- 装置主体选用高强度钢材作为核心支撑, 经过耐用的PVC涂层处理, 并配有厚实的泡沫缓冲垫, 确保了产品的稳定性和耐用性

青年公牛专用采精假台畜

11000/1500



■ 牛假阴道

Minitube提供4种不同长度的牛假阴道, 适用于不同种类和大小的公牛。

假阴道外壳 (含阀门) [1]	
20 cm	11021/0020
30 cm	11021/0033
35 cm	11021/0035
41 cm	11021/0041
内衬	
光滑的, 650 mm [2]	11022/0002
粗糙的, 650 mm	11022/0003
粗糙的, 480 mm	11022/0005
内衬, 一次性使用	
每卷 200 m	11022/0010
带内置收集瓶 (15 ml) 和盖子, 已灭菌 [3]	11022/0011
圆锥形, 末端开口 产品号码	11022/0012
圆锥形, 末端封闭 产品号码	11022/0013
锥形漏斗	
乳胶	11024/0000
硅 [4]	11024/0050
保温袋, 材质为氯丁橡胶, 58 cm, 蓝色 产品号码 [5]	11025/0058
保温袋, 绿色 [6]	
18 cm	11025/0018
35 cm	11025/0035
45 cm	11025/0045
橡胶圈	11022/0001

(附件

涂油棒 [7]	11905/0050
ReproJelly, 非杀精润滑剂, 水溶性, 3l 罐装, 无分配器 [8]	11907/3000
ReproJelly罐装分配器	11907/3100
仿真阴道专用温度计	
双金属材料, 非常坚固耐用, 温度范围至 +100°C	11027/0000
至+200°C, 刻度0.1°C, 红色指针 [9]	11027/0200
带刻度的玻璃采集管, 15 ml	11023/0015
带刻度塑料收集瓶, 带盖, 15 ml	11023/0018
带刻度精液收集瓶, 郁金香形状, 8 ml [10]	11023/0016



消毒器

低压消毒器，专门为假阴道及其附件而设计。由不锈钢制成，双层绝热。配备压力安全阀，计时器，排水管，预防过热装置和公牛用假阴道安放装置。

- 容积: 可放置15个假阴道
- 温度范围: 最高温度为 +100°C
- 压力: 最大 0.02 bar
- 内部尺寸: 约 750 x 400 mm (直径)
- 电源: 115 V/60 Hz 或 230 V/50 Hz
- 功率: 3500 W

消毒器 [1]

230 V	11050/0015
115 V	11050/0014

(附件

消毒器辊座 [2]

11051/0000

消毒器嵌件, 可放置15个乳胶锥形漏斗 [3]

11051/1015



保温柜

- 适用于假阴道及其附件
- 外壳及内部结构为不锈钢材质
- 容积: 449 l
- 2 个嵌入式支架
- 尺寸内部: 104 x 72 x 60 cm (宽x高x深)
- 尺寸外部: 119 x 124 x 78 cm (宽x高x深)
- 强制通风
- 多功能PID微处理器
- 拥有2个光定义TFT彩色显示器
- 数码计时器, 可调范围从1分钟到99天
- 温度范围: 高于环境温度+10°至+300°C
- 电源: 400 V (± 10%) 50/60 Hz
- 功率: ~ 5800 W (加热功能)

保温柜

14135/0400



我们提供多种不同型号和大小的保温柜, 其中也包括全手动型号。

3 精液分析



AndroScope

AndroScope是一个基于AndroVision®的紧凑型移动CASA系统,可以在生产、运输和授精过程中的任何时间点分析各种物种的精液活力和密度。AndroScope配备了专业的高速摄像头和强大的焦距调节功能,用于精确的精液分析。便携式CASA系统的分析区加热装置可使温度在几秒内达到+37°C,从而在最佳温度条件下进行精液分析。AndroScope适用于安装MS Windows 10或更新版本的台式电脑、笔记本电脑或平板电脑(连接设备需要USB-3.0插头)。一个实用、坚固的手提箱为AndroScope的运输提供了最佳保护,并包含了进行精液分析所需的一切。



AndroScope, 括运输箱和附件 [1] 12500/3000

附件

一次性Minitube四舱玻片, 20 µm, 25/盒 12050/0220

带帽测试管2 ml, 250/包 14602/0904

一次性毛细管, 100/包 15404/0100

微纤维杆, 长度124 mm, 100/袋 12510/0106

选项: 移动加热装置, 用于6个离心管和1个载玻片 [2] 12057/6000





AndroVision®

拥有着与传统的CASA分析融为一体的精子功能性检验,使得这一高效的自动化精子分析系统更为出众。AndroVision® 是一个客观和完整的精子分析工具。在其每一分析区域,即每一个视野,被分析的精子细胞数可达到1000个。它可以迅速并精确的计算出密度、活力以及精子完整性和生存力。所有图像和数据被保存下来,以便于日后进行检验。

AndroVision®还可以与Prism10实验室软件进行无缝对接。用户操作界面简便易懂分析报告可以被生成成为数字文件并轻松打印出来。这些功能和其它辅助功能使得AndroVision®成为研究性及生产性实验室中精子细胞分析评估软件的完美之选。

产品特点

- 实时分析实时图像和视频文件
- 20秒内分析多达4个区域
- 高效微粒过滤器,用于准确识别精子
- 用于分析多种物种
- 分析参数和用户创建的配置文件可以根据客户需求进行调整
- 数据导出到 MS Excel 和其他程序
- 语言: 英语、德语、西班牙语、中文、葡萄牙语、俄语、法语

AndroVision® 软件

带计算机和其它附件 [1]	12500/0000
带触屏与条形码扫描器	12500/0001
带笔记本电脑	12500/0010

AndroVision® 摄像机高速彩色摄像机 [2]	12500/4400
-----------------------------	------------

AndroVision® 软件模块

软件模块形态学和形态测量学	12500/1300
软件模块生存力*	12500/1400
软件模块顶体完整性*	12500/1600
软件模块线粒体活性*	12500/1700
软件模块 DNA 完整性*	12500/1800
剂量计算 - 产品号码	12500/1100
质量控制 - 产品号码	12500/1200
实验室连接软件 - 产品号	12500/1910

* 需要荧光显微镜。

附件

Zeiss Axiolab 5 相差显微镜* [3]	12008/0020
ScanStage, 集成加热系统的自动显微镜载物台 [4]	12048/0031
加热控制器HTi 200 [5]	12057/0200
加热板, 245x200 mm [6]	12057/0510

* 我们产品组合中3其他显微镜也可用于AndroVision®。请联系我们获取报价。



相衬显微镜 CX 43

- 相衬消色差光学装置, 采用通用聚光镜
- 加热型原装显微镜载物台, 带HTi 200 温度控制单元
- 可自由选择温度
- 符合人体工学的设计

相衬显微镜CX 43, 带光电管 (三目), 带物镜 20x, 40x [1] 12005/0042

用于HTi 控制模块和小加热板的架子系统 (1个) [2] 12057/0080



提供各种显微镜和配件



相差显微镜 MBL

用于精子分析的功能显微镜, 带有加热系统和温度控制装置, 可按需要调节温度。

相差显微镜 MBL 2000

双目, 加热台, HTi 50, 物镜 10x, 40x, 100x 12010/3000

双目, 加热台, HTi 50, 物镜 10x, 40x, 100x, 带摄像头和显示器 12010/3050


相差显微镜 MBL 2100

三目, 加热台, HTi 50, 物镜 20x 12010/3103

三目, 加热台, HTi 200, 物镜 20x, 带摄像头和显示器 12010/3101

显微镜用数码彩色摄像头 [1] 12110/1600
带有/成图像显示软件

带HDMI输入的 11.6 英寸显示 [2] 12110/1610

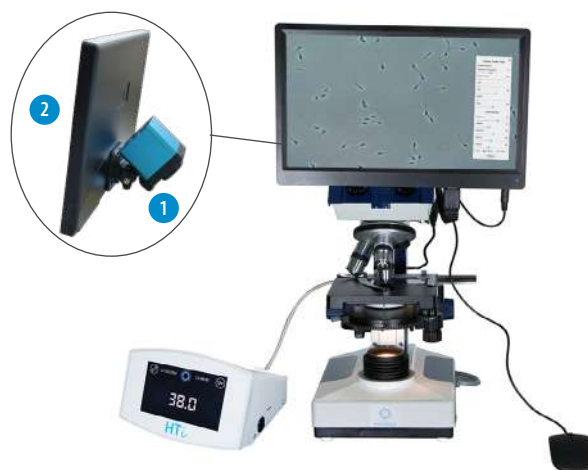

精子染色染料

Spermac, 形态分析染色, 4 x 50 ml [1] 15405/0000

Farely stain, 用于形态学分析, 3 x 250 ml [2] 15405/0026

Eosin G, 2% 用于活体染色的溶液, 50 ml [3] 15405/0025

Nigrosin, 4% 用于活体染色的溶液, 50 ml [4] 15405/0029



密度仪SDM 6

- 触摸屏, 大屏幕显示器
- 公猪、公牛、种马、公羊和公兔精液精子浓度测定程序
- 自动计算稀释剂用量和剂数
- 精液浓度以 10^9 精子细胞/ml表示
- 可选: 集成打印机, 打印输出每批精液的生产数据

精子密度仪SDM6, 带有集成打印机, 用于打印精液生产数据 **12300/0006**

附件

检测片, 一套4片	12300/0010
打印纸	12300/0311
比色杯, 4 ml, 100个/包	12301/0003
NaCl 溶液, 0.9 %, 1 l	12301/4667
分散剂0.5-5 ml, 用于NaCl 溶液	12428/1815
棕色玻璃瓶用于500 ml 分配剂	12428/1905
连续移液器10-100 μ l, 带数字显示功能	12425/4810
移液器枪头, 10-100 μ l, 黄色, 1000/包	12425/9409

确保精确

SMD6和SDM1是用于测量精子浓度的小型、高度精确的密度仪。
清洁简单, 只需少量维护。



精子密度仪SDM 1

- 校准六种不同的物种, 包括猪, 牛, 马, 犬, 山羊和绵羊
- 可以使用未经稀释的原始精液样本
- 精液浓度显示为百万精子/ml
- 配备100 - 240 V电源和电池

精子密度仪SDM 1 [1] **12300/0102**

SDM 1 比色杯, 100个/盒, 耗材 [2] **12300/1111**



4 精液稀释



■ 水浴锅

不锈钢，带角盖和电子温度控制。

- 工作温度范围: 最低高于环境温度5°C, 最高可达+100°C (取决于环境压力)
- 带触摸屏的3.5英寸彩色显示屏
- 独立温度限制器, 出现故障时自动关闭加热

水浴锅, 51 l, 230 V/50-60 Hz

14082/0045



可提供各种不同尺寸的水浴箱



■ 实验室电子秤

- 最大称量范围2000 g
- 分度值0.1 g
- 称量盘尺寸130 x 130 mm

实验室电子秤最大称量2 kg

14295/0442



■ 磁力搅拌器

用于搅拌精液稀释剂，带加热器且与接触式温度计连接。

磁力搅拌器带加热模块 [1]

115 V/60 Hz	14235/0731
230 V/50 Hz	14235/0732

- 加热功率: 800 W
- 温度范围: +20 to +300°C
- 速度: 最高1400 rpm
- 最大承重: 20 l

无加热功能磁力搅拌器 [2]

115 V/60 Hz	14230/0001
230 V/50 Hz	14230/0000

- 转速: 最高可达2200转/分钟
- 最大承载量: 5升

接触式温度计, 用于磁力搅拌器, 电子控制 14235/7320

温度计支架 14235/7323

搅拌棒

30 mm	14240/7130
40 mm	14240/7140



■ SmartDispenser 3.0 S 智能分配系统

该设备的智能组合确保稀释剂每次称量误差不超过±1克，同时支持小体积液体的精确分配。其智能化的操作不仅确保每剂精子细胞数量的精确控制，还显著提升了精液实验室的工作效率。

- 系统支持自动将精液与预设体积的稀释剂混合
- 系统组件包括集成控制器的泵单元、高精度秤、支撑架、所需软管及沉子
- 泵与控制器间的实时反馈机制确保稀释过程的高精度
- 可与加热稀释液槽和Prism10实验室管理软件配合使用，实现工作流程的全面优化
- 触摸屏操作简便，导航直观
- 占地面积小

SmartDispenser 3.0 S的称量程高达2千克，分辨率精确至±1克，泵流量则可达1.2升/分钟 13200/0410



AndroMed®

- 不含动物源成分
- 对于大多数公牛以及各种稀释比例都可以达到恒定最佳的冷冻效果
- 显微镜下检测非常清晰
- 易于准备, 节省时间

AndroMed®* 13503/0200
200 ml, 可以配制成1 l 稀释液

AndroMed® CSS, 一步式配方** 13503/1200
200 ml, 可以配制成1 l 稀释液

AndroMed® CSS, 两步式**
成分1, 100 ml, 适用于500 ml 精液稀释液 13503/1250
成分2, 200 ml, 适用于500 ml 精液稀释液 13503/1251



不含卵黄稀释液

BoviFree

- 冷冻过程的平衡方案经过反复优化, 保证恒定的最佳冻存结果
- 提高冷冻复苏后精液的各项参数值
- 易于制备
- 显微图像明亮清晰

BoviFree* 13501/0200
200 ml, 可以配制成1 l 稀释液

BoviFree CSS, 一步式配方** 13501/1200
200 ml, 可以配制成1 l 稀释液

BoviFree CSS, 两步式**
成分 1, 100 ml, 可以配制成500 ml 稀释液 13501/1250
成分 2, 200 ml, 可以配制成500 ml 稀释液 13501/1251



不含卵黄稀释液

Steridyl

- 精心研制、经过验证的缓冲配方
- 各种稀释比例及大多数公牛都能获得稳定及最佳冷冻效果
- 易于制备, 只需加水, 节省时间
- 无菌, 无需添加蛋黄

Steridyl* 13500/0260
500 ml, 可以配制成1250 ml 稀释液

Steridyl CSS, 一步式配方** 13500/0280
500 ml, 可以配制成1 l 稀释液

Steridyl CSS, 两步式**
成分 1, 500 ml, 可以配制成1 l 稀释液 13500/0290
成分 2, 500 ml, 可以配制成1 l 稀释液 13500/0295



含卵黄稀释液

Triladyl®

- 国际认证50余年
- 基于 TRIS 的精细配方
- 加水和蛋黄后即可使用
- 适用于所有类型的公牛, 获得可靠的最佳
- 和恒定的解冻后效果

Triladyl®* 13500/0250
250 g, 可以配制成1250 g 稀释液

Triladyl® CSS, 一步式配方** 13500/1200
200 g, 可以配制成1000 g 稀释液



精液冷冻液
(一步式)

Biladyl®

- 基于经验验证的Triladyl®配方
- 允许在没有甘油的情况下进行首次稀释
- 用于各种冷冻方案

Biladyl®, 组分 A** 13500/0004
49 g, 可以配制成500 g 稀释液

Biladyl®, 组分 B** 13500/0006
250 g, 可以配制成750 g 稀释液



精液冷冻液
(一步式)

抗生素补充物

- 符合CSS方案的粉末抗生素配方
- 需要加水

一步法精液稀释剂抗生素添加剂: 13504/9000
550 mg 庆大霉素、110 mg 泰乐菌素、
330 mg 林可霉素和660 mg 大观霉素

二步法精液稀释剂抗生素添加剂: 13500/0005
300 mg 庆大霉素、60 mg 泰乐菌素、
180 mg 林可霉素和360 mg 大观霉素



* 使用抗生素配方。

** 符合CSS规定。

最大限度确保产品安全性

在Minitube的ISO和GMP认证的稀释剂生产设施制造。每个生产阶段都有最高的质量控制标准, 并保证只使用精子友好的设备和材料。

5 细管处理和冷冻



■ 精液细管

30年来, Minitube 0.25 ml 和0.5 ml 精液细管已被广泛用作冷冻储存精液的标准工具。Minitube的质量控制过程、生产技术和材料选择标准确保产品质量稳定可靠, 始终超过行业标准。



■ 鲜精细管和EcoStraws细管

鲜精细管用于在冷冻温度下处理和保存新鲜/冷冻的精子。棉塞中的特制封口粉不会膨胀, 因此可以尽量减少吸收的精液量。

细管的棉塞内芯更短, 吸收的精子数比标准精液细管少3-4%。它是冷藏温度下精液实现隔夜平衡的理想选择。

(+ 产品优势

- + 更好地利用每份精液的精子, 因为粘附到塞子上
- + 在不增加成本的情况下更好的利用宝贵的基因
- + 适用于精液隔夜平衡和新鲜精液保存



鲜精细管和EcoStraws细管

使用方式与标准精液细管相同。
相同的流程用于: 灌装/封口/印刷/人工授精

	小型细管 0.25 ml	EcoStraw 细管 0.25 ml	鲜精细管 0.25 ml	鲜精细管 0.5 ml	EcoStraw 细管 0.5 ml
透明	13407/0010 	13407/3010 	13407/2010 	13408/0010 	13408/3010 
透明—蓝白芯	13407/0011 	---	---	---	---
透明—红白芯	---	---	13407/2212 	---	---
红色—透明	13407/0044 	13407/3044 	13407/2044 	13408/0044 	13408/3044 
绿色—透明	13407/0054 	13407/3054 	13407/2054 	13408/0054 	13408/3054 
蓝色—透明	13407/0064 	13407/3064 	13407/2064 	13408/0064 	13408/3064 
灰色	13407/0070 	---	---	---	---
灰色—透明	13407/0074 	13407/3074 	---	13408/0074 	13408/3074 
紫色	13407/0080 	13407/3080 	---	---	---
紫色—透明	13407/0084 	13407/3084 	---	---	---
黄色	13407/0090 	13407/3090 	---	---	---
黄色—透明	13407/0094 	13407/3094 	13407/2094 	13408/0094 	13408/3094 
粉色	13407/0100 	13407/3100 	---	13408/0100 	13408/3100 
蓝绿色	13407/0130 	13407/3130 	---	13408/0130 	13408/3130 
橙色	13407/0140 	13407/3140 	---	---	---
橙色—透明	13407/0144 	13407/3144 	13407/2144 	13408/0144 	13408/3144 
橙红色	13407/0160 	13407/3160 	---	---	---
淡棕色	13407/0180 	13407/3180 	---	---	---
淡棕色—透明	---	---	---	---	13408/3184 
淡黄绿色	---	13407/3200 	---	---	---
淡黄绿色透明	13407/0204 	13407/3204 	---	13408/0204 	13408/3204 
白色	---	---	---	13408/0210 	13408/3210 

■ 冷处理柜

宽敞的不锈钢冷处理柜，用于精液处理，工作温度为+5℃。

（⚙️ 产品特点

- 制冷区高度: 50 cm (34 cm 位于冷柜前部的丙烯酸玻璃盖以下)
- 内表面全不锈钢, 可倾斜面板, 可倾斜有机玻璃盖
- 数字温度控制器: 温度可在0℃到环境温度范围内设定
- 气流的特殊路径使温度分布均匀
- 自动编程的除霜功能
- 蒸发式冷凝装置
- 室内照明可实现最佳工作条件
- 工作区域有两个电源插座
- 每侧各有一个50 mm 的开口, 用于安装电线
- 冷却装置下方设有存储空间
- 安装在重型辊上
- 电源: 230 V/ 50 Hz 或115 V/ 60 Hz
- 功率: 约450 W

有两种规格,
可调节或不可调节液压高度

	工作区 (cm - 宽x 深)	外部尺寸 (cm - 宽x 深x 高)	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz
大型	200 x 90	216 x 114 x 127	14335/0403	14335/0400
大型(可调节液压高度)	200 x 90	216 x 114 x 127	14335/0402	14335/0399
标准型	200 x 67	216 x 91 x 127	14335/0401	14335/0398
标准型(可调节液压高度)	200 x 67	216 x 91 x 127	14335/0404	14335/0397



CoolingCastle

（⚙️ 产品特点

- 外部尺寸:
 - 包括后壁上间隔物的空间尺寸: 1420 x 960 x 1752 mm (宽x深x高)
 - 仅限设备, 不包括间隔物的空间尺寸: 1420 x 890 x 1752 mm (宽x深x高)
- 内部尺寸 (宽 x 深): 1280 x 650 mm
- 电子冷凝水蒸发
- 网络兼容性
- 配备电源插座、网络端口、LED灯和后面板搁板
- 电源: 230 V/50 Hz 或 110 V/60 Hz
- 功率消耗: 大约810 W

CoolingCastle

230 V/50 Hz	14335/0422
110 V/60 Hz	14335/0421

（+ 产品优势

- + 占地面积小 (可通过普通门) 允许在小型实验室中使用
- + 透明门设置易于监测机器运转
- + 冷空气帘可以将温度损失降到最低: 即使打开柜门, 也能将柜子内部保持在+5°C (室温条件下)
- + 独立的电子系统连接方式: 即使关闭冷却系统, CoolingCastle中的插座仍然能够使用

智能设计

冷却柜设计符合人体工程学,并且节省空间,可在+5°C下处理精液。



MPP Quattro and MPP Uno

- 0.25和0.5 ml精液细管的自动灌装和封口机
- 在1-2分钟内实现0.25和0.5 ml精液细管的快速无工具转换
- 可更换料斗, 容量: 2400MiniStraws (0.25 ml) 或1200根中号精液细管 (0.5 ml)
- 超声波密封装置, 超声波发生器可以安装在2.5 m的距离处 (直接在机器上打开/关闭开关)
- 提供理想的卫生和安全条件
- 可以在冷藏室或机柜中操作, 也可以在室温下单独操作或与MiniJet打印机组合进行操作
- 具有集成储液器和自动调节功能的真空元件; 可以通过按钮轻松修改真空度
- PLC微处理器控制
- 电源: 110 V/60 Hz或230 V/50-60 Hz



MPP Quattro

每次可以对1至4个细管进行灌装和封装 – 操作者自行选择。



产品特点

- 生产能力: 14 000 细管/小时
- 功能强大, 耐用, 易更换的紧凑型超声波封口器, 并且拥有全球服务网络
- 现代化的触摸屏监控器, 用于软件控制和过程显示:易于操作, 彩色编码显示; 连续显示已灌装细管数量, 机器状态和细管规格
- 在加工两个批次精液的间隙可以快速更换带有4个喷嘴的灌装块和抽吸块
- 操作者可以实现最佳的控制: 该机器同时处理4个细管, 操作者易于观察该过程
- 节省精液: 当射精接近完成时, 工作灌装针会自动从4根减少到1根, 非工作灌装针留下的精液会流回储液器——不浪费任何一滴精液
- 针对每个精液样本的前8根冻精管, 采用降低真空度并延长灌装时间的策略, 以确保最佳的灌装效果
- 其内置的记忆功能可存储多达8组灌装与密封参数, 便于用户根据冻精管与稀释剂的组合快速选择最优参数集
- 机器尺寸: 650 x 390 x 500 mm (宽 x 高 x 深) 含超声波发生器



运行安全

紧凑的密封装置: 非常快速和容易地更换密封模块, 大大提高了服务能力和选择。

MPP Quattro, 全套设备

13018/0000

MPP Uno

每循环密封灌装1精液细管-小体积操作理想模式。

产品特点

- 生产能力: 约4000 个细管/小时
- 设备设计非常小巧, 占用空间小
- 机器尺寸: 460 x 350 x 410 mm (宽x 高x 深) + 超声波发生器

MPP Uno, 全套设备

13017/0000



附件适用于MPP Quattro 和 MPP Uno

适用于MPP Quattro4灌装喷嘴灌装模块 [1]

灌装喷嘴 0.25 ml 13018/0012

灌装喷嘴 0.5 ml 13018/0017

适用于MPP Quattro4灌装喷嘴吸入模块 [2]

抽吸喷嘴 0.25 ml 13018/0022

抽吸喷嘴 0.5 ml 13018/0027

MPP Uno灌装喷嘴

灌装喷嘴 0.25 ml 13017/0012

灌装喷嘴 0.5 ml 13017/0017

MPP Uno抽吸喷嘴

抽吸喷嘴 0.25 ml 13017/0022

抽吸喷嘴 0.5 ml 13017/0027

细管料斗, 适用于0.25 ml和0.5 ml细管 [3]




0.25 ml 和0.5 ml 喷嘴用垫圈 5000个/包 13021/3001

灌装/抽吸管, 380mm, 精子友好型材料 (硅胶), 斜切边, 100个/铝箔袋 13021/3800

一次性精液用锥形皿, 100 个/包 [4] 13018/0100

填充块和抽吸块的固定装置, 可堆叠不锈钢 [5] 13017/0050

精液细管密封测试仪, 每循环10根精液细管 (0.25 ml/0.5 ml) 13019/0210

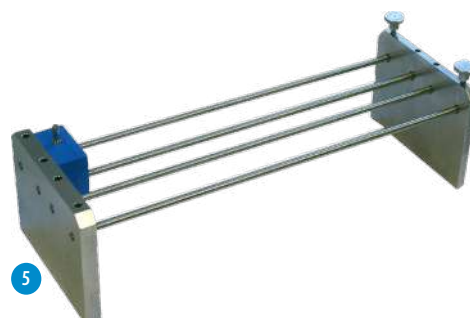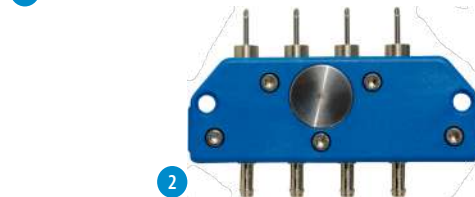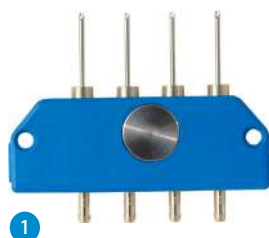

细管处理和冷冻

MiniJet



0.25 ml和0.5 ml细管专业打印系统。高清晰打印质量与高速打印的结合。

(+ 产品优势

- + 卓越的打印质量, 超高的打印速度 (字型大小 1.4 mm 至 5 mm, 条形码和标志打印, 黑体打印选项)
- + 采用Minitube 软件, 菜单清晰明了, 使用方便
- + 易于调整打印头位置
- + 不用辅助工具即可更换转印带
- + 不需要齿轮泵给油墨回路产生压力, 因而不会有磨损颗粒使油墨老化
- + Sealtronic打印头技术避免打印头堵塞, 无须频繁清洁打印头: 确保墨水不变干
- + 打印头中的墨水不会变干: 即使在长时间停机后也可以立即打印
- + 基于Windows的触摸屏显示屏, 操作方便
- + 每天调整一次油墨粘度, 实现最佳启动条件
- + 低运行成本: 只需重新注满墨盒, 不用更换
- + 从客户数据库输入数据, 方便客户自定义数据库保存
- + Minitube实验室管理软件接口
- + 通过电信服务可以实现远程维护

每个系统包括:

- Inkjet打印机 Leibinger Jet3up: 490 x 450 x 290 mm (宽 x 高 x 深)
- 带Minitube软件电脑
- 细管传送装置, 带可交换料斗: 730 x 500 x 260 mm (宽 x 高 x 深)
- 传送装置的电子器件和电源控制装置: 380 x 400 x 220 mm (宽 x 高 x 深)

(⚙️ 产品特点

- 生产量: 约每小时20 000管
- 适用于CombiSystem
- 电源: 110 V/60 Hz 或230 V/50-60 Hz

MiniJet 带喷墨系统 Leibinger,
全套设备

13034/0001

(⚙️ 附件

墨水, 950 ml 13033/0010

溶剂, 950 ml 13033/0012

细管输出滑块 13034/0010



独一无二的技术

独一无二的喷墨技术使油墨分布均匀, 即使在长时间不打印状态下保证油墨不干。

MiniJet打印系统可以与灌装封口机MPP Quattro或MPP Uno组合成CombiSystem使用。



CombiSystem

在精液实验室实现最高效率：将您的灌装封口机MPP Quattro或MPP Uno与MiniJet打印相结合，精液处理的完美自动化集成系统：精液细管的灌装、密封和打印一步完成

除了单个设备提供的功能和优势外，MPP Uno或MPP Quattro与MiniJet的组合提供了更多优势。

CombiSystem, 110 V/50-60 Hz 或 230 V/50-60 Hz

包括MPP Quattro和MiniJet
生产量每小时14000 支细管 13018/0002

包括MPP Uno和MiniJet
生产量每小时4000 支细管 13017/0002

+ 产品优势

- + 完美地自动整合精液处理过程：采用同一个系统一次完成灌装、封装和打印工作
- + 所有组件均采用电子控制
- + 控制精液液位，并在精液加工结束时自动停止供应细管
- + 包括带有布尔数据文件的软件，可以与Prism10 Bull实验室软件配套使用
- + 无需其它控制单元，仅需要标准计算机（已包含在系统中）
- + 系统配备创新的PrintControl打印软件，用户界面直观易用，支持预览功能，打印结果尽在掌控
- + 连接设备的诊断程序



细管处理和冷冻

EasyCoder

洁净且无气味打印，无油墨和溶剂。

- 热转印打印机，可自动供给细管（输出量：每小时3600个细管）
- 无以伦比地干净清晰地打印，适用于0.5 ml和0.25 ml细管（可在不同规格细管之间便捷快速地转换）
- 可打印3行共约200个字符，即使是在小型细管上（可打印条形码符号、标志和特定字符）
- 通过电脑采用简单易操作的Minitube软件来控制打印
- 易操作，维护简便
- 尺寸（长x宽x高）：690x370x310 mm（不包括电脑）
- 电源：110-230 V AC, 50/60 Hz

EasyCoder 打印机 13038/0000

细管打印机色带，黑色 13038/0010



MultiCoder

通过快速简单的可读标签，使您的实验室流程专业化。

- 高清晰的喷墨打印
- 打印头保护系统（避免墨干）
- 各种产品打印载体
- 载体更换时无需借助任何工具
- 可预先设计打印布局
- 可以上传 MS Excel 文件格式
- 在数据库中存有现成的格式设计，可在打印时直接套用，自动生成

+ 产品优势

- + 多功能：特殊打印系统可以标记包括塑料，玻璃，铝制品在内的大多数材料
- + 手动调节滑道以及一个独一无二的易操作载体系统使得快速工作流得以实现
- + 易书写的信息如文字、条码、二维码和商标都可以在狭小的空间里被清晰呈现

MultiCoder 打印机 13145/0000



独一无二，灵活且多功能

简单快捷的在全套载体上打印：如精液细管，拇指管，三角盒，培养皿，粗管，注射器，冷冻瓶等等。

ScanDMC

智能扫描转换器, 将普通智能手机转换为可靠、低成本的二维码扫描器, 用于0.25毫升或0.5毫升的细管。

- 将细管固定在理想的扫描距离
- 消除反光, 提高扫描准确性
- 支持所有Minitube精液细管颜色
- 隔离环境光, 并使用LED背光 (6种颜色) 以获得最佳照明
- 包括一条短款双USB-C电缆用于电源供应
- 兼容所有带 USB-C端口的智能手机
- 可调节以适应任何手机尺寸和相机位置



ScanDMC细管智能扫描转换器

13034/0020

SFS 133

- 每次可灌装和封装6x6个细管
- 用金属或玻璃密封珠封装安全卫生
- 有不同颜色的玻璃密封珠
- 每个细管中自动产生一个直径为1cm的气泡
- 生产能力: 每小时约2000个细管

SFS 133 半自动灌装和封装机, 带真空瓶、灌装和吸头 [1]

用于0.5 ml 13133/0133

用于0.25 ml 13133/0135

低密度真空泵, 30-60 Hg, 带压力计和阀 [2]

230 V/50 Hz 13133/0267

115 V/50 Hz 13133/0268

管仓装载装置, 带装载块, 和10个管仓, 每个管仓可放置36个细管 [3]

为0.5 ml 13133/0005

为0.25 ml 13133/0025

附件

灌装头带有6个喷嘴 [4] 13133/1000

抽吸头带有6个喷嘴 [5] 13133/2000

灌装喷嘴和抽吸喷嘴用的垫圈, 5000个/袋 13021/3001

SFS 用硅胶管, 透明, 3 x 1 mm, 长度 10 m 13133/3550

封口钢珠

用于0.25 ml 13400/9970

用于0.5 ml 13400/9900

封口玻璃珠, 用于 0.25 ml 细管, 有多种颜色 13400/997x



GobletPacker

提供准确可靠冻存解决方案, 将冷冻的0.25 ml精液细管自动注入液氮/氮气蒸汽中容器。

- 高达每分钟100根精液细管装进各种冻存容器 (直径: 7.1、9.2、10、12、13、35、53和65 mm)
- GobletPacker 升降器可有效调整储罐内不断变化的液氮位
- 用于Goblet Packer的液氮罐, 配有排水管, 用于在包装任务后恢复液氮水平
- 声频信号提醒用户操作
- 确定未知数量的精液细管 (库存函数) 或计算用户定义数量
- 通过用户友好的触摸显示屏轻松控制

+ 产品优势

- + 耗时的包装任务实现自动化, 不再需要手动
- + 减少液氮处理带来的风险, 对于实验室人员更安全
- + 在液氮/氮气中操作保证精液质量, 确保理想的储存温度而不会波动
- + 基于传感器的智能操作, 精确可靠, 适用液氮的设计和专用材料

GobletPacker, 100-240 V [1]

16825/0000

附件

GobletPacker kit*, 包括一个尺寸的拇指管、拇指管漏斗装置、2个

16825/002x

拇指管装载机* 适用于单尺寸拇指管

16825/004x

适用于GobletPacker液氮罐**, 体积150l, 高度不可调

16826/0010

适用于 GobletPacker液氮罐***, 体积150l, 电动可调高度 [2]

110 V

16826/0011

230 V

16826/0023

GobletPacker升降器

16825/0005

* 提供7.1, 9.2, 10, 12, 13, 35, 53, or 65 mm拇指管。

** 内径: 58 x 65 x 40 cm (宽 x 深 x 高),
总尺寸: 78 x 100 x 106 里面(宽 x 深 x 高)。

*** 内径: 58 x 65 x 40 里面(宽 x 深 x 高),
总尺寸: 78 x 100 x 96-126 里面(宽 x 深 x 高)。



1

前所未有的效率

高达每分钟100根精液细管的处理速度, 再加上不间断的操作和冷冻容器的平行装载。



2

StrawPal

创新摄像头监控液氮细管计数系统。StrawPal 通过集成先进的摄像头技术和软件, 彻底改变了冷冻精液细管的检查和库存管理。它可以在不到两分钟的时间内准确计数多达800根细管, 极大地提高了效率。在此过程中, 细管安全地存放在液氮中, 确保精子质量得到保护。

系统包含: StrawPal、迷你电脑、触摸屏监视器、键盘、鼠标、杜瓦瓶、杯架。


- 尺寸 (不含配件的 StrawPal): 490 x 750 x 505 mm (宽 x 深 x 高)
- 监视器可以放置在 StrawPal 顶部, 建议将键盘和鼠标放在实验台上
- 重量: 35 kg
- 杜瓦瓶容量: 3 l
- 根据不同情况, 杜瓦瓶中的液氮可持续数小时
- 细管的检出率约为99%, 可处理所有颜色及 0.25 ml 和 0.5 ml 的细管

+ 产品优势

- + 用于库存管理、进出冷冻精液细管的理想监控方案
- + 始终保证精子质量的保存
- + 可以计数所有颜色的细管, 适用于各种尺寸的支架
- + 0.25 ml 和 0.5 ml 的细管
- + 主要数据可以通过条形码导入
- + 可通过CSV文件导入公牛和人工授精站的列表
- + 计数结果保存在数据库中
- + 可创建报告和装箱单
- + 操作简单直观
- + 最少量清洁工作

StrawPal, 100-240 V

16824/0000

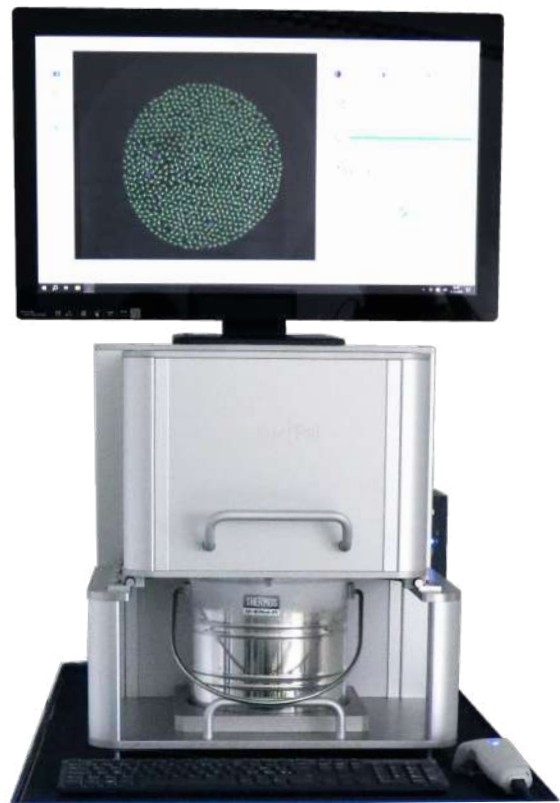

快速、安全、准确

在不到两分钟内计数多达800根细管, 检测约99%的细管 (所有颜色, 0.25 ml 和 0.5 ml)。

TurboFreezer L

- 带不锈钢盖的高度绝缘机身
- 双操作盖: 采用嵌入式滑动盖, 可降低细管冷冻架装入和取出时对冷冻室造成的影响; 可以通过气压弹簧完全打开操作盖
- 前一个冷冻周期结束后立即开始下一个冷冻周期
- 所有温度曲线和每一个冷冻周期资料都可以存储、显示, 并转换成Excel以便进一步分析
- 4个液氮注入口
- 空调静压箱与冷冻室分开
- 2个风扇块, 每个安装有4个风扇, 确保冷冻室内的液氮制冷气流分散均匀
- 可编程控制器
- 2个温度传感器 (1个冷冻室传感器, 1个样品传感器)
- 外部尺寸: 222 x 132 x 86 cm (宽 x 高 x 深)
- 冷冻室尺寸: 145 x 41 x 32 cm (宽 x 高 x 深)
- 容积: 30个冷冻架
175个0.25 ml 细管, 共计5250个细管
100个0.5 ml 细管, 共计3000个细管

TurboFreezer L, 220 V/50 Hz
(220 V/ 60 Hz 可选)

16811/0000



TurboFreezer M

- 提供定向、连续的氮气流, 从而形成独特的均匀冷冻模式
- 细管容量: 15个冷冻架
- 175 x 0.25 ml 细管, 共计 2625支
- 100 x 0.5 ml 细管, 共计 1500支
- 外部尺寸 (监视器和控制仪不计):
102 x 103 x 86 cm (宽 x 高 x 深)
- 箱体大小: 78 x 41 x 32 cm (宽 x 高 x 深)

TurboFreezer M, 220 V/50 Hz
(220 V/ 60 Hz 可选)

16810/0000



创新冷冻技术

迄今唯一一部具有单向水平气流的冷冻仪
- 所有的细管都经历相同的冷冻曲线!

(+ 产品优势 TurboFreezer L 和 M

- + 通过用户定义的冷冻程序进行精确控制
- + 符合人体工程学, 在宽敞的空间内轻松处理支架和精液细管
- + 高产量带来卓越经济性
- + 由于均匀冻结曲线, 与精液细管位置无关, 精液解冻后质量一致
- + 可选择从第二次冷冻循环开始, 温度为+5°C打开, 节省时间和液氮
- + 两个冷冻柜都配有2个容纳4个和精液细管的固定装置精液细管钳的钳子和固定盒以及将精液细管装入的漏斗 (65 mm)

(⚙️ 附件 TurboFreezer L 和 M

液氮罐, 189 l	16150/0185
加热模块可缩短循环之间的加热时间	
左侧电缆插座	16811/1100
右侧电缆插座	16811/1101
支架升降器	5016810/1503
支架用装载块	5016810/1504



MT Freezer 2.0

牛精液自动冷冻仪机身由不锈钢制成。

- 容量: 12个冷冻支架
 - 175 x 0.25 ml 细管, 共计2100个细管
 - 100 x 0.5 ml 细管, 共计1200个细管
- 外部尺寸: 112 x 88 x 105 cm (宽 x 高 x 深)
- 内室尺寸: 76 x 64 x 30 cm (宽 x 高 x 深)
- 电子控温, 数字显示温度
- 风机强制气体循环
- 隔热保温性能出众
- 防裂防划伤盖
- 温度范围: +5°C 到 -140°C
- 冷冻时间: 8分钟 (0.5 ml细管10分钟)

MT Freezer 2.0, 230 V/50 Hz

适用于0.5 bar液氮罐 16813/0000

适用于1.5 bar液氮罐 16813/0015

液氮罐

自增压0.5 bar, 容量60 l 16820/1900

自增压1.5 bar, 容量120 l 16150/0120



经济节能

冷冻循环液氮消耗低。
可以按顺序操作冷冻循环。

细管处理和冷冻

附件适用于所有液氮罐

液氮连接管长度2.0 m 16812/0200

冻存架 [1]

175 支0.25 ml 细管 15040/0175

100 支0.5 ml 细管 15040/0100

细管支架用装载块 [2]

175 支0.25 ml 细管 15041/0175

100 支0.5 ml 细管 15041/0100

细管钳用于取出冷冻细管 [3]

适用于65 mm细管套的不锈钢漏斗 15004/0402



2



细管套

液氮罐总览



细管套 [1]

Ø 7.1 mm	白色	16907/0071
Ø 10 mm	白色*	16910/0010
Ø 13 mm	白色*	16913/0133
Ø 35 mm	白色	16935/0135
Ø 53 mm	白色	16953/0133
Ø 65 mm	白色	16965/0133
六角形	白色	16970/0136

* 提供不同颜色可供选择。

细管套夹 [2]

装2支7.1 mm 细管套	16965/6171
装2支10 mm 细管套	16965/6000
装2支13 mm 细管套	16965/6013

细管套夹标签, 有不同颜色

13422/00xx

细管套分隔板, 100 个/包, 12 x 6,5 cm [3]

16967/0065

标识棒 长度 140 mm

0.25 ml	16903/0210
0.5 ml	16903/1210

大细管套灌装用漏斗, 用于65 mm细管套 [4]

15004/0402



精液细管储存盒

	三角盒 [1]* 长	短	扁平盒 [2]** 长	短
绿色	16981/01351	16981/01201	16980/1201	16980/0601
蓝色	16981/01361	16981/01211	16980/1202	16980/0602
黄色	16981/01371	16981/01221	16980/1203	16980/0603
红色	16981/01381	16981/01231	16980/1204	16980/0604
白色	16981/01391	16981/01241	16980/1205	16980/0605
米黄色	16981/01401	16981/01251	16980/1206	16980/0606
橙色	-	-	16980/1207	16980/0607

* 适用于0.5 ml 10/20 精液细管或0.25 ml 28/56精液细管。

** 适用于0.5 ml 3/6 或0.25 ml 6/12 精液细管。



6 授精和妊娠检测



授精用成套工具

授精成套工具包括：ABS塑料工具箱，电子解冻仪 MT30/54, QuickLock, 100个万能套管, 80支人工授精枪用卫生套管, ReproJelly润滑剂, Varikon窥器, 1盒人工授精专用手套, MiniCutter细管剪, 镊子, 夹子

授精用成套工具

17050/0070

也可以单独提供各个组件:

授精箱

17050/0001

MiniThaw 解冻设备(见33页)

17048/0001

QuickLock 2000 (见32页)

17026/0000

万能套管, 无裂口(见33页)

17007/0000

卫生护套(见46页)

17028/0100

ReproJelly 润滑剂, 100 ml

11907/0100

Varikon 窥器

17064/0380

授精手套, 敏感型, 绿色, 5指肩部长度, 100个/盒

17080/0015

MiniCutter (见33页)

17062/0010

细管用镊子, 呈角形

17060/0000

夹子

17063/0000



QuickLock人工授精枪

运用人工授精枪使人工授精的实施安全而准确。

(+ 产品优势

- + 适用于所有类型精液细管和护套的人工授精枪, 分体式或非分体式
- + 独特的设计, 可实现安全和精确的精液细管操作; 不浪费精液
- + 所有部件均由灭菌塑料或不锈钢制成
- + 无活动部件, 活塞不会滑出
- + 用不同颜色的套针识别
- + 人工授精后独立精液细管释放信息控制

QuickLock Classic, 套管固定和松开非常容易, 只需按下一个按钮 [1]

白色	17025/0000
红色	17025/0003
蓝色	17025/0005
黄色	17025/0008
绿色	17025/0009

QuickLock 2000, 人体工程学设计, 固定时仅需占用1 cm 的套管长度 [2]

白色	17026/0000
红色	17026/0003
蓝色	17026/0005
黄色	17026/0008
绿色	17026/0009

QuickLock Ergo, 由于可用长度更长, 对年龄大的公牛尤为适用, 超小人体工程学手柄可供选择, 人工授精枪清洁简便 [3]

白色	17024/0000
红色	17024/0003
蓝色	17024/0005
黄色	17024/0008
绿色	17024/0009

该系统还包含专为QuickLock人工授精枪及护套设计的保护管 [4]



万能套管

- 绝对紧密, 适合于所有精液细管
- 柔和的顶部形状, 可温和授精
- 透明接头, 可更好地目视控制精液细位置
- 包装袋带有胶带, 便于重新密封打开

万能套管, 有裂口 (透明—绿色) [1]

50 个/包	17007/0001
带软卫生护套, 50 个/包	17007/0012
单独包装, 50 个/包	17007/0014

万能套管, 无裂口 (透明—蓝色) [2]

50 个/包	17007/0000
带软卫生护套, 50 个/包	17007/0011
单独包装, 50 个/包	17007/0013



MiniThaw 解冻装置

- 可变温度设置 (环境温度至+50°C)
- 当前温度数字显示
- 精液细管提升器有三个隔间, 每次最多可解冻10根精液细管 (0.5 ml或0.25 ml)
- 通过USB-C电缆或适配器连接到车载12-24 V 插座和110-230 V 电源插座
- 坚固且易于操作

带USB-C电缆的MiniThaw解冻杯 [1] 17048/0001

（附件适用于所有液氮罐

USB车载适配器, 用于连接车载12-24 V 插座	17048/0420
USB电源转换器, 用于连接110-230 V 电源插座	17048/0430
MiniThaw基座, 金属材质 [2]	17048/0005
数字式计数器, 带磁铁, 内置电池 [3]	17048/0006
移动电源, 配合MiniThaw便携移动使用, 最高可提供15小时电力 [4]	17048/0410



MiniCutter

- 精密切割0.25 ml 和0.5 ml 细管
- 细管剪器有助于在正确长度处直线切割, 这也避免了精液损失
- 形状符合人体工学设计
- 易于保持清洁

MiniCutter 细管剪 17062/0010



深入宫腔人工授精

- 长而柔韧的套管和探针, 用于深入子宫角授精
- 套管的金属尖易于与细管接触和精密配合
- 另外的引导细探针有助于穿透子宫颈

牛DIUI 授精套件, 用于0.25 ml 细管 17015/0000
包括柔韧的人工授精探针, 刚性引导探针, 手指支撑件和固定环

牛DIUI 套管, 有裂口, 适用于0.25 ml 细管, 10 个/包 17015/0650

牛DIUI 套管, 带裂口, 适用于0.25 ml 细管, 1个/包 17015/0660



QuickLock 加热器 4.0

(+ 产品优势

- + 人工授精和胚胎移植装置在恒温下运输
- + 从解冻到授精/移植, 保持精液/胚胎处于最佳温度
- + 加热袋内目标温度可自由调节
- + 行动电源具有更大的灵活性和可靠性
- + 非常坚固, 加热袋材质易于清洁
- + 可以通过调节背带用不同的方式携带加热袋

QuickLock 加热器 4.0 17028/0400

QuickLock 加热器 4.0 带行动电源 17028/0401

(⚙️ 附件

QuickLock加热器4.0充电器 17028/0410

USB车载适配器, 用于连接车载 12-24 V 插座 17048/0420

USB电源转换器, 用于连接110-230 V 电源插座 17048/0430

QuickLock 加热器内衬袋, 100个/包 17028/0201



■ 超声扫描仪 Minitube 3.0 Plus

便携式超声扫描仪，用于多物种产科测量，可准确自动计算妊娠天数。

- 包括11英寸平板电脑、电源、背带、ReproJelly润滑剂和充电器，所有附件都被盛放在一个坚固耐用的机箱中
- 兼容任何带有USB-C端口的安卓设备
- 支持多种扫描模式，包括B模式、双B模式、M模式、PW和CF彩色多普勒，并具有自动参数计算功能
- 内置电池可延长运行时间（长达6小时），快速充电（2-3小时）
- 大型无眩光显示屏可确保在所有照明条件下清晰显示解剖结构
- 紧凑、轻便、IPX7防水

超声扫描仪 Minitube 3.0 Plus [1] 23500/2005

6.5 MHz线性直肠探头，用于奶牛经直肠妊娠检测 [2] 23500/2106



■ 细胞刷

一次性工具，用于采集子宫内膜细胞进行细胞学分析。单件包装，无菌，一次性使用，带卫生外包装，10个/包。

细胞刷 17075/0010



Henryetta, 人工授精培训用母牛模型

这种革命性的训练模型牛提供了新的独特的培训机会, 并使您人工授精课程的时间和地点更加灵活。

培训师可以通过窗口观看和指导学员, 从而提高学员的学习效率。母牛模型的生殖器官像活体一样可以移动, 可用于初学者解剖学和人工授精技术的初步演示。根据不同学员可以选择困难或容易的子宫颈进行培训, 并且可以根据需要重复训练。通过妊娠和触诊模型, 学员可以培训手动妊娠检查和卵巢诊断的最重要步骤。

- 用于人工授精训练的自然大小和形状的奶牛模型
- 母牛身体由玻璃纤维和丙烯酸玻璃制成, 生殖道由硅胶制成
- 面积: 1320 x 680 mm, 高度: 1400 mm, 重量: 53 kg

Henryetta, 荷尔斯坦弗里斯兰型

230 V	22400/1040
115 V	22400/1041

Henryetta, 西门塔尔型

230 V	22400/1050
115 V	22400/1051

西门塔尔设计是应要求独家制作的特别版。因此, 订单可能需要更长的交付时间。

（附件

子宫	22400/1167
仿真阴道管	22400/1168
子宫颈	
窄小型, 专为高级培训提供	22400/1164
宽大型, 专为初级培训提供	22400/1163
肠袋 (直肠)	22400/1061
子宫颈导入器, 用于快速插入子宫颈	22400/1161



人工授精培训达到新水平

事实证明, 这一新型的人工授精培训模式使受训人员受益匪浅, 同时还促进了动物福利!

（附件 AI PLUS

生殖道	
怀孕迹象约妊娠第42	22400/1171
怀孕迹象约妊娠第60	22400/1172
肠垫 产品号码	22400/1179
卵巢	
小卵泡	22400/1181
大卵泡	22400/1182
黄体	22400/1185
滤泡囊肿	22400/1189

7 胚胎移植与活体采卵/ 胚胎体外生产

温度控制

控制元件HTi50, 用于加热台或珠浴箱, 可调节温度, 数字显示。

HTi 50 控制器 [1]

12057/0100

放置在立体显微镜的光基座顶部的加热台, 180 x 180 x 10 mm, 需要控制器。

加热台 [2]

12057/0600

置物架系统, 用于优化实验室工作台空间利用。

用于HTi控制模块和小加热板的架子 系统 (1个) [3]

12057/0080

恒温珠浴箱, 适用于不同规格样品管或细管 (最大直径15 mm) 的控温温育箱, 内置钢珠, 固定安全。控温范围为室温至 +55°C。需配备HTi 50控制器。

恒温珠浴箱 [4]

12057/5000

实验室加热板加热区域: 470 x 260 mm, 预设温度为 37°C, 配备集成控温组件和外置电源。

实验室加热板 [5]

12055/0010



BoviFlush

用于牛胚胎恢复的即用培养基。含有缓冲液、BSA或PVA和抗生素的完整配方。

- 可用塑料瓶（可完全回收）和输液袋
- 输液袋配备三通接口配置和密封接口，确保取出的液体高净度无污染 [1]
- 乳白色瓶，带橡胶塞，可快速连接 Y 型管路，带悬挂片和 100 ml 刻度 [2]
- 透明瓶，带螺旋盖，实现实时目测检查，操作安全简便 [3]
- 在GMP认证的专用洁净无尘间 GMP 生产，严格遵守生产和质量控制标准

BoviFlush 含 BSA

1l, 袋装 [1]	19982/6001
2l, 袋装 [1]	19982/6002
1l, 带橡胶塞的瓶子 [2]	19982/6003
1l, 带螺旋盖的瓶子 [3]	19982/6004

BoviFlush 含 PVA

1l, 袋装 [1]	19982/6011
2l, 袋装 [1]	19982/6012
1l, 带橡胶塞的瓶子 [2]	19982/6009
1l, 带螺旋盖的瓶子 [3]	19982/6010



回收溶液

BoviHold

该溶液含有葡萄糖、丙酮酸盐、BSA、氨基酸、生长因子和抗生素。BoviHold用于：

- 在大气空气中，室温下保存体内或体外获取的胚胎
- 胚胎运输
- 冲洗胚胎
- 保存胚胎以移植入受体

BoviHold

3 x 10 ml	19982/6047
20 ml	19982/6046



保存溶液

BoviFreeze

冷冻保存液，用于常规的缓慢胚胎冷冻。冷冻液的缓冲溶剂含有D-葡萄糖，丙酮酸，BSA和抗生素。含乙二醇，用于常规冷冻。

BoviFreeze, 3 x 10 ml

19982/6052



低温保存溶液

BoviPlus Trypsin wash

冷冻前胰蛋白酶清洗液, 符合IETS规范要求, 质量达到出口标准。

BoviPlus 0.25%胰蛋白酶清洗液, 10 ml 19982/1300



清洗溶液

冲洗导管

- 冲洗导管可重复使用, 性价比高
- 透明度高, 可视性强使得客户在冲洗时可清晰观察液位, 也便于使用后将导管清洗干净
- 除非另有规定, 所有导管都有4个端口/开口

2通硅胶导管, 路厄锁, 1个/包 [1]

CH 12	19005/0100
CH 16	19005/0102
CH 18	19005/0103
CH 20	19005/0104

2通硅胶导管, 折叠端, 1个/包 [2]

CH 12	19005/0220
CH 16	19005/0221
CH 18	19005/0222
CH 20	19005/0223

3通硅胶导管, 折叠端, 1个/包 [3]

CH 16	19005/0230
CH 18	19005/0231
CH 20	19005/0232

不锈钢尖端导管, 路厄锁, CH 12, 6个口, 硅胶质地, 1个/包 [4]

冲洗导管用探针

CH 12/16 (3-通道)	19007/0011
CH 14	19007/0012
CH 15/16	19007/0016
CH 18/20	19007/0018

子宫颈扩张器, 完全由不锈钢制成, 耐高温高压, 便于导入胚胎采集导管 [5]



1



2



3



4



5

胚胎移植与活体采卵
/ 胚胎体外生产

胚胎采集过滤器

- 采集过程中盖子安全固定，采集后易于打
- 内置的回收盘上刻有网格，便于寻找胚胎
- 也适用于OPU过滤卵母细胞
- 过滤网一直浸入液体中，使其不会干燥
- 通过连接管出口和附属拇指钳可以控制和清除过多液体（进入孔足够大，以确保冲洗介质的必要流速）
- 可以连接所有种类的Y形连接管
- 无菌且绝对紧密连接

使用方便安全

该一体式两用过滤器恒定20 ml容积，因此在冲洗过程中无须监测液位。胚胎直接从过滤盘中回收。



EmSafe 过滤器

19010/6000

Miniflush®

- 具有大过滤面积的垂直回收系统
- 在整个冲洗过程中保持恒定的20 ml容量
- 由于表层设计较浅，非常适合与所有显微镜配套使用



Miniflush® 过滤器

19222/2000

冲洗管

一次性带夹Y形连接管，适用于连接所有导管和管线过滤器。无菌（经射线辐照处理），1个/包冲洗管由十分光滑、有弹性的材料制成。与过滤器末端连接，无需额外使用接头

连接EmSafe过滤器的胚胎采集Y形连接管

Luer 末端Y形连接管 19011/0100

Foley 末端Y形连接管 19011/0200

连接Miniflush®过滤器的胚胎采集Y形连接管

Luer 末端Y形连接管 19011/0000

Foley 末端Y形连接管 19011/0001



■ 立体变焦显微镜

- 45°倾斜管的宽视野 HFW 10x/22 毫米目镜（无眼罩）
- 1:6.7 型消色差变焦物镜，放大倍数 0.67 倍至 4.5 倍，视场 33 毫米至 4.9 毫米
- 经过防真菌处理、防反射涂层的光学器
- 配有不透明的以及白色/黑色的载物台板和两个物体夹具
- 3瓦特 LED 入射光和透射光照明，带旋转镜，可分别调节，内置电源

立体变焦显微镜，三目式

12014/2000



■ 控温胚胎冷冻仪

控温胚胎冷冻仪专为从业医师而设计。采用液氮作为制冷介质，通过热量控制调节温度。

- 每套系统由一个低温罐，一个控制器和一个手提箱构成
- 温控范围: +20°/-43°
- 容量: 23 x 0.5 ml 或 46 x 0.25 ml 精液细管

控温胚胎冷冻仪

CL 2200, 8套预置程序, 1.5l 低温罐, 外置电源 [1]

19406/2200

CL 5500, 16套预置程序, 1.5l 低温罐, 内置电池电源 [2]

19406/5500

CL 8800, 16套预置程序, 3.8l 低温罐, 外置电源 [3]

19406/8800

适用于 CL 2200/CL 8800 的外置电源

19407/0000



2



1



3

胚胎移植与活体采卵
/ 胚胎体外生产

■ 玻璃化装置

设备用于在 OPS 开放式拉长细管或常规细管中玻璃化胚胎或卵母细胞。

- 泡沫塑料盒，带不锈钢玻璃化槽
- 玻璃化材料
- 详细的培养基制备说明

玻璃化装置

19500/2000



带盖5孔培养板

胚胎培养皿，圆边，用于小鼠胚胎批次测试。由不含双酚A的材料制成，利培养基的pH平衡。

胚胎培养盘, 有盖, 无菌, 5 孔, 且孔缘圆润, MEA测试 [19021/0001](#)



Steripette

无菌吸量管, 用于胚胎处理, 55 mm, 独立包装, 无菌, 与1ml 胰岛素注射器配套使用

Steripette, 50 个/包 [19025/0050](#)



微量移液器

微量移液器: 适用于容量1 ml 内的所有细管, 通过处理轮, 其移取快速精确

微量移液器 [19022/0002](#)



培养皿

塑料,用于胚胎操作

培养皿	
直径35 mm	19020/0035
直径 94 mm	19020/0094
直径 145 mm	19020/0145
带网格, 直径 65 mm	19020/2065



0.25 ml细管, 长度133mm

MiniStraw, 灭菌, 10个/包	
透明 [1]	19042/0010
黄色 (直接转印) [2]	19042/1010
透明, 带玻璃密封球	19041/0010
MiniStraw, 透明, 经射线辐照处理, 10个/包, 白色, 带ID杆, 有多种颜色 [3]	19040/0010

提供各种款式
各种颜色




0.25 ml细管, 长度90 mm

MiniStraw, 透明, 经射线辐照处理, 白色, 带ID杆, 有多种颜色, 10个/包	19040/9010
--	------------

ET ID 杆

ET ID 杆, 用于对0.25 ml细管进行封口和标识, 100支/包, 白色, 有多种颜色	19046/0010
记号笔, 极细, 乙醇基永久型黑色	19045/0100

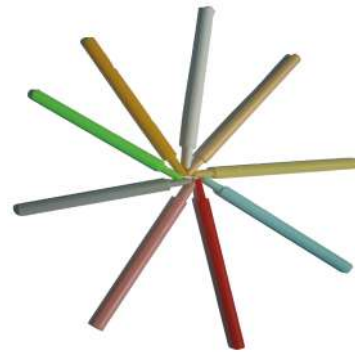

CryoSealer

手工超声波封口机。可用于0.25 ml, 0.5 ml和。超声波封口有助于每个细管完美均匀的密封。电源: 100 V-240 V/60 Hz。

CryoSealer	13135/0000
------------	------------



手动封口机

细管的手动封口机, 通过对细管末端进行加热可对所有类型的细管进行安全封口。也可在液氮蒸汽中封口。由细管用钳式焊头和可转换不同热量水平的控制单元组成。

手动封口机	13135/2500
-------	------------



胚胎移植与活体采卵
/胚胎体外生产

便携式恒温培养箱

- 安全且温度稳定的卵母细胞及胚胎运输与保存
- 采用金属球作为导热介质, 确保温度均匀分布
- 高精度温控 ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)
- 试管和精液细管的固定简单并且安全
- 完全干燥且卫生的环境
- 多种配件可选择, 支持灵活供电方案

便携式恒温培养箱 (温度可调: 环境温度至 $+50^{\circ}\text{C}$) [1] 19180/0003

（附件

便携式移动电源 [2] 17048/0410

车载USB适配器 (适用于12-24 V车载插座) [3] 17048/0420

USB电源转换器 (适用于110-230 V交流插座) [4] 17048/0430

便携式培养箱金属底座 [5] 17048/0005



胚胎运输套装

- 含便携式培养箱、干电池及充电器的携带箱
- 为胚胎提供最佳环境, 确保长途运输安全
- 长效可充电电池 (续航长达20小时)
- 高精度温控系统, 保持恒定温度
- 坚固耐用、可上锁且防震的携带箱, 保障运输安全
- 外部尺寸: $584 \times 267 \times 289$ 毫米 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)
- 整套设备重量: 11.5 公斤

胚胎运输套装 (含培养箱及电池) 19180/2101

5 毫升塑料试管 (圆底、按压盖, 已灭菌, 1000支/包) 19180/5006

移植枪侧式护套和胚胎移植套管

移植枪侧式套管，侧开式金属头套管，适用于0.25 ml的。

胚胎移植套管

5支/包	19240/1005
1支/包，带卫生护套	19240/1006

胚胎转移套管与外侧护套结合使用	19240/1000
-----------------	------------



胚胎移植设备加热器

详情请参阅第35页的快速锁定加热器4.0。


MT 不锈钢制胚胎移植器具

- 对于子宫颈难以通过的小母牛的最佳选择
- 可以无护套使用的可消毒不锈钢装置
- 可拆卸式尖端，由不锈钢制成，一侧带出口
- 带凹槽手指支撑环标记尖端出口位置
- 提供一次性塑料尖头

移植器具与0.25 ml细管配套使用 [1]	19250/0000
------------------------	------------

不锈钢头 [2]	19250/0989
----------	------------

一次性塑料尖头，无菌，单包装，100个/包 [3]	19250/0991
---------------------------	------------

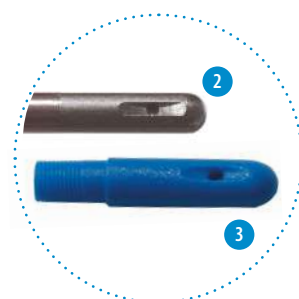

胚胎移植与活体采卵
/胚胎体外生产

卫生护件

在人工授精和胚胎移植中使用，以保持器械在通过阴道直达宫颈时的清洁。

卫生护件

长度: 46 cm (用于人工授精), 80片/包 [1]	17028/0100
-------------------------------	------------

长度: 53 cm (用于胚胎移植), 80片/包 [2]	19271/0080
-------------------------------	------------

卫生护管: 刚性卫生护层，带孔帽卫生护管，25个/包 [3]	19270/0025
--------------------------------	------------



■ 超声波测定仪 Versana Active

- 便携易用的超声系统，线性与凸面扇形
- 高质量文件和数据传输系统
- 显示模式：B模式、M模式
- 带自动计算的PW彩色多普勒
- 实时三重模式
- 编码谐波成像、交叉光束CrossXBeam、散斑抑制成像（SRI-HD）提供卓越的图像质量
- 连接：USB、HDMI、以太网
- 显示器：15.6英寸高分辨率液晶显示器
- 尺寸：39 x 5.8 x 36.2 cm（宽x高x深）
- 重量：5 kg，带电池
- 电气连接：100-240 VAC/50-60 Hz



超声波测定仪 Versana Active [23360/0000](#)

（附件

用于, 测定仪的凸阵探头 6.0 - 10.0 MHz [23360/0002](#)

的Endo 线性直肠探头 3.5 - 10.0 MHz [23360/0003](#)

■ 超声波探头支架

带针头装置。探针支架可适用Aloka, BCF, ECM, GE或SonoSite探头。

- 探头支架非常轻柔光滑, 易于操作
- 材料可迅速升温到体温
- 与小型探针结合使用, 纤细的设计使得年龄低的动物中的卵母细胞很容易被抽吸
- 针头出口的设计非常适合推荐针头 (23360/1200和23360/1250)



超声波探头支架	
GE	23400/0120
SonoSite	23400/0040
Aloka	23360/0600
BCF	23400/0115
ECM	23400/0413
Esaote	23400/0125
探针支架护罩, 144个/包装	23360/1260

根据要求, 我们也可以提供适用于其他探头的设备。



活体取卵用泵

用于奶牛和小母牛卵泡抽吸和卵母细胞采集的OPU泵。

- 带培养基加热块
- 脚踏开关操作
- 加热温度可调至+50℃
- 真空抽吸压力值可调至-375毫米汞柱
- 真空快速传导至针
- 可调温加热模块，并在操作过程中精确保持设定温度
- 通过LC显示器和数控器可轻松调整控制抽真空抽气和加热模块的温度
- 配有：1x 500ml 瓶，2x 带硅胶塞50ml管，6x 50ml管，2x 硅胶管，2x 疏水过滤器
- 220-240 V/50-60 Hz；也适用于115 V（Ref. 23362/0001）

活体取卵用泵 [1]

23362/0000

附件

连接管套装，
连接50ml试管，1个/包装 [2]

23360/1100

管道套件，灭菌，单独包装 [3]

23360/1000

一次性针头，标准/长斜面，100个/包

适用母牛 (1.2 x 75 mm) [4]

23360/1200

适用后备母牛 (0.9 x 70 mm) [5]

23360/1250

疏水过滤器 [6]

23362/1015



胚胎移植与活体采卵
/ 胚胎体外生产

BoviPlus 活体取卵培养基

即用型完全培养基，含BSA（牛血清白蛋白）或PVA（聚乙烯醇）及肝素，用于卵巢穿刺取卵（OPU）过程中防止血液凝固。

BoviPlus 采卵恢复培养基，500 ml

含BSA

19982/1281

含PVA

19982/1283



BoviPlus 卵子清洗培养基

含BSA的即用培养基，用于收集后清洗活体取卵或养殖场来源牛卵母细胞。

BoviPlus 卵子清洗培养基，500 ml

19982/1200

牛胚胎体外生产 (IVP) 培养基

- 天然添加剂为配子和胚胎提供更自然和更健康的环境
- 以干粉形式提供, 每份包装内均含用于溶解的无菌水
- 溶解后即可使用, 无需额外添加任何成分
- 干粉形态简化了操作过程, 降低了污染风险
- 与液体配方相比, 保质期更长, 确保性能持久稳定
- 经济实惠, 便于运输 (可在室温下运输)
- 每批培养基均经过严格的质量控制, 包括牛胚胎检测和无菌测试

卵母细胞和胚胎洗涤

洗涤培养基, 50毫升 19990/0100

卵母细胞成熟

成熟培养基, 10毫升 19990/0110

含HEPES的成熟培养基, 10毫升 19990/0111

NaturARTs成熟培养基, 10毫升 19990/0113

含HEPES的NaturARTs成熟培养基, 10毫升 19990/0112

体外受精

受精培养基, 10毫升 19990/0140

精子制备

上游筛选培养基, 20毫升 19990/0120

精子洗涤培养基, 20毫升 19990/0130

体外培养

培养基, 10毫升 19990/0150

IVP培养基检测套装


包含: 卵母细胞冲洗液, 卵母细胞成熟培养液/基, 精液获能培养液/基, 精子冲洗液, 授精培养液/基, 胚胎培养液/基。

IVP培养基检测套装 19990/0099

NaturARTs成熟培养基

富含天然添加剂, 为卵母细胞提供更优越的环境



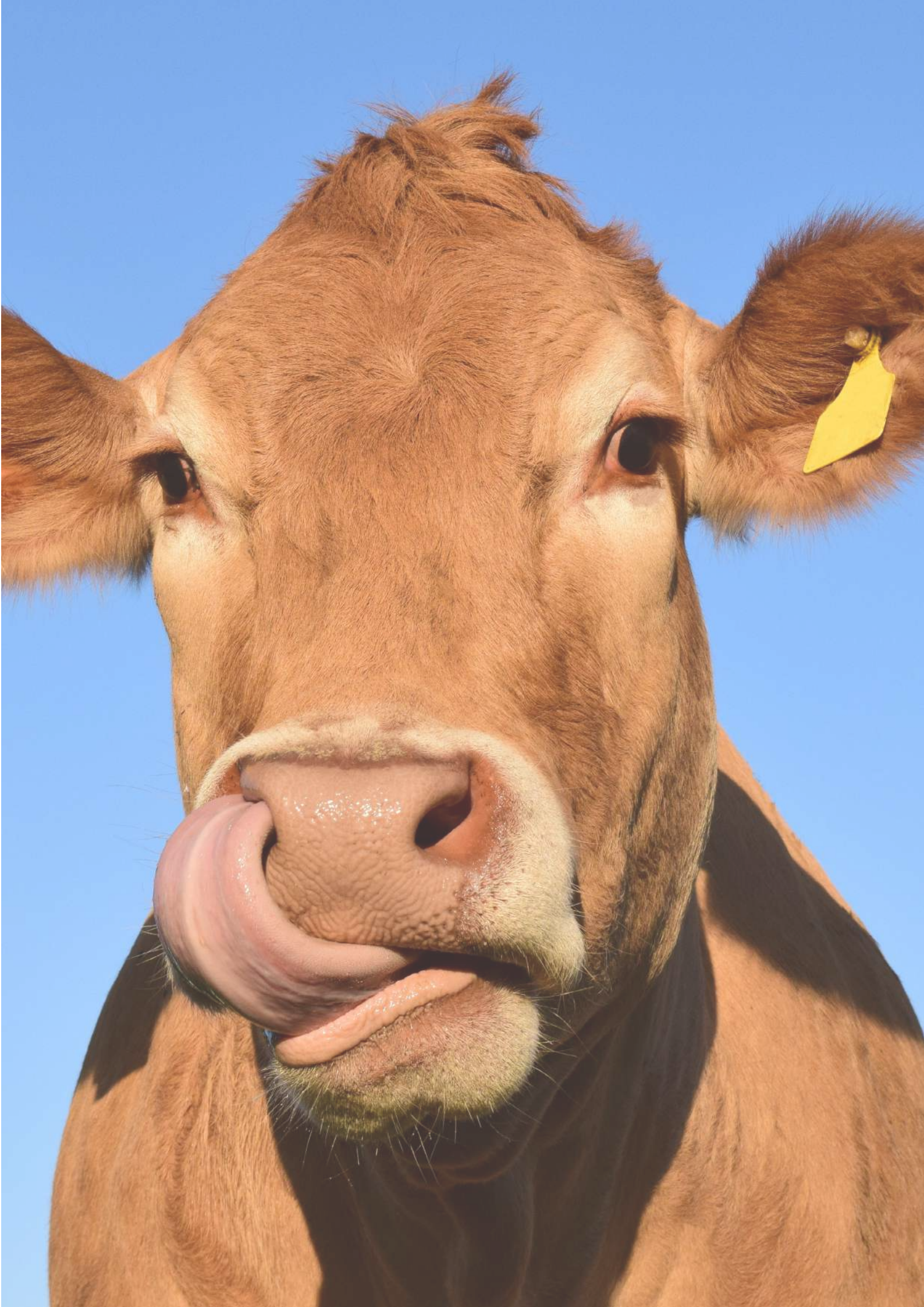



MINITUBE INTERNATIONAL

国际全球生殖技术服务

Minitube USA

800.646.4882
info@minitube.com

Minitub do Brasil

+55 51 3222 7876
minitub@minitube.com.br

Minitube India

+91 11 4309 0668
info@minitube-india.com

Minitube China

+86 185 1545 5770
info@minitube.cn

Minitub Ibérica

+34 977 845 397
info@minitub-iberica.com

Minitube Australia

+61 3 5342 8688
info@minitube.com.au

Minitube Central Europe

+421 377 877 915
mtce@minitube.sk

Minitube Canada

800.500.7978
info.canada@minitube.com

Minitube México

+52 442 246 73 46/47
info@mexitube.mx

Minitube Middle East

+971 426 68871
info.middle.east@minitube.com

Minitube Indonesia

+62 21 7591 75-96/94
info@minitube.co.id


Minitube International AG, 德国

+49 8709 9229 0
minitube@minitube.de

Follow us



www.minitube.com

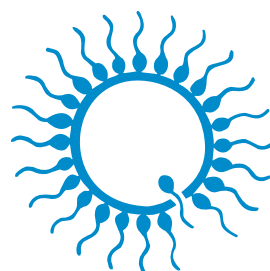

minitube

我们的知识, 您的成功